



**INTEGRA
TOOLS**

Formerly
LIFEtool Solutions



VERSION
// 1.0

IntegraMouse[®] AIR Kratki vodič

integramouse.com



Hrvatski (HR)



**Puštanje u pogon,
čišćenje i korištenje**

Puštanje u rad

Sklop IntegraMouse AIR

1.



Umetnite usnik, obraćajući pozornost na čep i vodilicu.

2.



Lagano pritisnite i okrenite nastavak za usta u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok ne klikne na mjesto.

3.



Pričvrstite IMAIR na svoj sustav za montažu (navoj 1/4").

4.



Postavite IMAIR po želji.

Za početno postavljanje preporučujemo rad s žičanom vezom.

5.



Uključite kabel u USB-C priključak na stražnjoj strani IMAIR-a.

6.



Uključite USB kabel u računalu (USB-A priključak).

7.


Kratko pritisnite desni gumb na usnama za uključivanje IMAIR-a.

8.


Sve LED diode se nakratko pale; IMAIR se automatski kalibrira.

9.


Lijeva LED dioda svijetli (priključak kabela). Desna LED dioda (M) je isključena (način rada miša).



Molimo vas da ne dodirujete usnik tijekom kalibracije!

Sljedeći koraci se događaju automatski:

- Unutarnja baterija se puni.
- Vaše računalo će instalirati IntegraMouse AIR kao zadani miš.

Kratki vodič za bežično postavljanje

(Uparivanje putem Bluetootha)



Za korištenje IntegraMouse AIR s Bluetoothom, provjerite je li baterija dovoljno napunjena. Prije prve upotrebe koristite priloženi punjač i napunite bateriju.

1.



Kratko pritisnite desni gumb za usne (za uključivanje IMAIR-a).

2.



Sve LED diode se kratko pale, IMAIR se kalibrira.

3.



Lijeva LED lampica svijetli.

4.



Pritisnite lijevu tipku za usne 3 sekunde.

5.



LED 1 počinje treptati narančasto.

6.




Odaberite željeni položaj (1, 2 ili 3) pritiskom na lijevu tipku na usnici.

7.



Pričekajte trenutak dok odabrana LED lampica ne zatreperi plavo.

8.

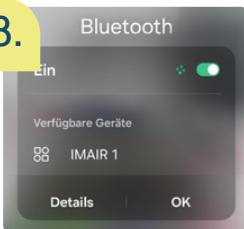

Pokrenite pretragu uređaja na krajnjem uređaju, odaberite IMAIR.

9.



Ako je uparivanje uspješno, treptanje prestaje i LED svijetli narančasto.

Opće upute za čišćenje



Upotreba IntegraMouse AIR u kliničkim uvjetima

- U kliničkim uvjetima, usnik (uključujući membranu i silikonski nastavak) i gumbi za usne koriste se kao proizvodi za jednokratnu upotrebu.
- Intervale zamjene usnika (uključujući membranu i silikonski nastavak) i gumbića za usne određuje kvalificirano osoblje ili liječnik.
- Ako sumnjate da imate zaraznu bolest, poduzmite dodatne sigurnosne mjere (npr. nosite rukavice prilikom mijenjanja nastavka za usta).

Dezinfekcija maramicom

- Koristite samo površinska dezinfekcijska sredstva koja su prikladna za LEXAN polikarbonat.
- Preporučujemo sljedeće proizvode tvrtke Schülke & Mayr (www.schuelke.com): Mikrozid Sensitive tekućina; Mikrozid Sensitive vlažne maramice ili ekvivalentne proizvode.



Ne koristite mokru ili gama sterilizaciju.

Usnik, gumbi za usne i ostale komponente IntegraMouse AIR uređaja ne smiju se čistiti mokrom ili gama sterilizacijom.

Ne koristite jaka sredstva za čišćenje.

Nikada ne koristite jaka sredstva za čišćenje, jer će to oštetiti površinu komponenti.

Ne uranjati u vodu

Nikada ne uranjajte IntegraMouse AIR i njegove elektroničke komponente u vodu i nikada ne koristite tekuću vodu za čišćenje – to će trajno oštetiti elektroniku.



Pravilno čišćenje komponenti

- Obrišite komponente IntegraMouse AIR, napanje, uključujući kabel i tronožac možete obrisati blago vlažnom krpom koja ne ostavlja dlačice.
- Čistite komponente barem jednom svaka dva tjedna.

Kratki vodič: Čišćenje usnika i zamjena membrane

Interval čišćenja i odlaganja usnika i gumba za usne

Čišćenje: IntegraMouse AIR ima funkciju podsjetnika za čišćenje i podsjetit će vas nakon preporučenog vremena korištenja trepćućom LED lampicom (vidi str. 8).

- barem jednom svaka dva tjedna
- češće u slučaju bolesti

Zamijeniti:

- u slučaju oštećenja ili znakova habanja
- najkasnije nakon šest mjeseci

Interval odlaganja membrane

Uvijek pravilno odložite membranu. Čišćenje se strogo ne preporučuje.



Prvo okrenite nastavak za usta u smjeru kazaljke na satu, a zatim ga ravno izvucite.



Uklonite i bacite membranu.



Kuhajte u parnom sterilizatoru



Osušite nastavak za usta i ostavite ga da se ohladi na sobnu temperaturu.

5.



Stavite novu membranu na nastavak za usta

6.



Umetnite usnik (obratite pozornost na čep i vodilicu) i lagano ga okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.




**Usnik se također
može kuhati u loncu
s vodom.**

- Zakuhajte vodu
- Žlicom stavite usnik u lonac, pazeći da je potpuno navlažen vodom.
- Ostavite u kipućoj vodi najmanje 5 minuta.
- Zatim ga pažljivo žlicom izvadite iz lonca.

Funkcionalnosti IntegraMouse AIR-a

IntegraMouse AIR nudi 3 načina rada; standardni način rada je način rada miša.

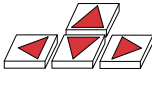	Miš	Tipkovnica	Gamepad
Pomicanje usnika: - gore - dolje - lijevo - Desno			
Usisati	Linkovi-klik 	Datoteka-ukus 	Button 1 
Udarac	Pravo-klik 	Enter-ukus 	Button 2 
Mikrofon	Napomena: Na donjoj strani nalazi se mikrofon. Može se koristiti samo kada je uređaj spojen na kabel.		
Kalibriraj: Desni gumb za usne Pritisnite 3 sekunde	Sve LED diode trepere istovremeno. ⓘ Molimo vas da ne dodirujete nastavak za usta.		
Prebacivanje uređaja: Kratko pritisnite lijevu tipku na usnama	1x kabel 3x Bluetooth	 1 2 3 M  1 2 3 M  1 2 3 M  1 2 3 M	
Prebacivanje načina rada: Kratko pritisnite desni gumb za usne.	 1 2 3 M Miš	 1 2 3 M Tipkovnica	 1 2 3 M Gamepad
Podsjetnik za promjenu usnika	LED 0 treperi narančasto. Istovremeno pritisnite obje tipke na usnama za resetiranje timera.		
Upozorenje o niskoj bateriji	Kada je razina baterije niska u bežičnom načinu rada, LED diode 1, 2 ili 3 početi će treperiti narančasto.		
Za isključivanje: Pritisnite i držite desni gumb za usne 6 sekundi.	Napomena: IMAIR mora biti aktivan (LED svijetli). Pritisnite i držite dok se sve LED diode ne ugase.		



Za dodatne postavke i funkcije preuzmite besplatnu aplikaciju za postavke s web stranice IntegraMouse na www.integramouse.com. Tamo ćete pronaći dodatne korisne informacije i mogućnosti konfiguracije.