




Predictable 7

Benutzerhandbuch



Index

- 1. Wege, um Predictable zu verwenden**
 - 1.1. iOS
 - 1.2. Mac
 - 1.3. Android
 - 1.4. Webplattform
- 2. Konto erstellen**
- 3. Die Grundlagen von Predictable**
 - 3.1. Tastaturbildschirm
 - 3.2. Grid
 - 3.3. Einstellungen
- 4. Kontoeinstellungen**
 - 4.1. Kontoaktionen
 - 4.2. Kontotyp
 - 4.3. Die Serverstandort
 - 4.4. Privatmodus
 - 4.5. Einstellungen deaktivieren
 - 4.6. Zurücksetzungsoptionen
- 5. Spracheinstellungen**
 - 5.1. Standardstimmen
 - 5.2. Voice-Banking-Anbieter
 - 5.3. Sprechknopfverhalten
 - 5.4. Sprachverhalten
 - 5.5. Benutzerdefinierte Aussprache
 - 5.6. Abkürzungserweiterung
- 6. Barrierefreiheitseinstellungen**
 - 6.1. Direkte Berührung
 - 6.2. Bildschirmtipp
 - 6.3. Schalterzugang
 - 6.4. Kopfverfolgung
 - 6.5. Augenverfolgung
 - 6.6. Zugriffskontrolle
 - 6.7. Auditiver Vorschau
 - 6.8. Bodenhalt
 - 6.9. Anruf und Facetime
- 7. Erscheinungsbild-Einstellungen**
 - 7.1. Vorlagen
 - 7.2. Farb- und Schriftanpassungen
 - 7.3. Andere Anpassungen
 - 7.4. Startbildschirm
- 8. Tastatureinstellungen**
 - 8.1. Tastaturoptionen
 - 8.2. Emojis
- 9. Wortvorhersage-Einstellungen**
 - 9.1. Wortvorhersage-Anpassung
 - 9.2. Vorhersageleiste anpassen
 - 9.3. Lernen
 - 9.4. Schmutzwörter
- 10. Grid layout**
 - 10.1. Grid Größe
 - 10.2. Farben und Schriftanpassung
 - 10.3. Anzeigeeoptionen
- 11. Verknüpfungen**
 - 11.1. Funktionstasten
 - 11.2. Gesture speak
 - 11.3. Hot corners
 - 11.4. Tastenkombinationen für externe Tastaturen
 - 11.5. Alle Aktionen
- 12. Online-Dienste**
- 13. Mehrsprachig**
- 14. Verbreite die Nachricht**
- 15. Unterstützung**
- 16. Webplattform**

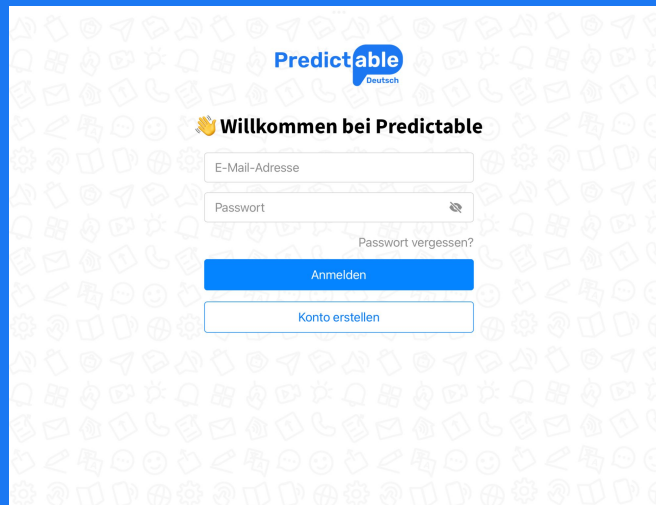

1. Wege, um Predictable zu verwenden

Predictable ist zum Download auf einer Vielzahl von iOS- und Android-Geräten verfügbar. Die Kompatibilität mit bestimmten Predictable-Funktionen kann von Ihrem Gerät abhängen. Nicht verfügbare Funktionen werden im Benutzerhandbuch gekennzeichnet. Diese Informationen finden Sie auch in unserer Feature-Vergleichsliste, die auf unserer Website zum Download bereitsteht.

1.1. iOS

Predictable 7 ist auf iPads und iPhones mit iOS 15 und höher verfügbar. Einige Funktionen wie Head Tracking stehen auf älteren Geräten aufgrund der erforderlichen Hardware nicht zur Verfügung.

Es kann im App Store oder über Bundles auf der Therapy Box Website erworben werden.

1.2. Mac

Nachdem Sie Predictable heruntergeladen haben, steht es auch auf Ihrem Mac zur Verfügung.



1.3. Android

Predictable 7 ist auf Tablets und Telefonen mit Android-Versionen 12 und höher verfügbar. Einige Funktionen sind auf Android nicht verfügbar und werden in unserer Feature-Vergleichstabelle aufgeführt.


Predictable Android ist im Google Play Store zum Download verfügbar.

1.4. Web Plattform

Bitte beachten Sie, dass die Web-Plattform zwar für die Nutzung mit Predictable-Konten aller Sprachen zugänglich ist, jedoch alle Texte und Informationen auf der Web-Plattform in Englisch verfasst sind und daher möglicherweise für einige Benutzer nicht nutzbar sind.

Die Predictable-Web-Plattform ermöglicht es Ihnen, sich remote bei jedem Predictable-Konto anzumelden. Von dort aus können Sie Ihre Einstellungen anzeigen und bearbeiten, Nachrichten speichern und Grid-Inhalte verwalten. Melden Sie sich einfach über den untenstehenden Link mit Ihrem Predictable-Login an:

Web-Plattform-Link: <https://predictable-cms-4f655.web.app/>

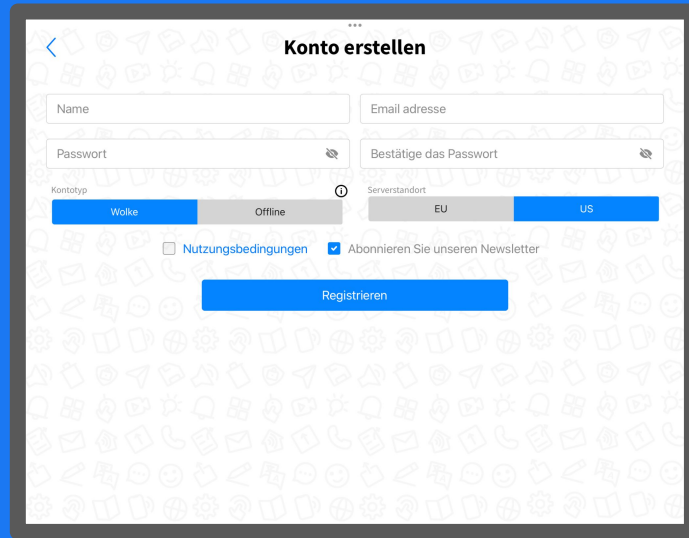

2. Erstellen eines Kontos

Um mit der Erstellung eines Kontos zu beginnen, drücken Sie auf die Schaltfläche "Konto erstellen" auf der Hauptanmeldeseite. Anschließend werden Sie gebeten, einige wichtige Informationen einzugeben, die zur Einrichtung Ihres Kontos benötigt werden:

- **Name** - So werden wir Sie in Predictable ansprechen.
- **E-Mail-Adresse** - Diese E-Mail-Adresse verwenden Sie zum Anmelden bei Predictable. Stellen Sie sicher, dass Sie darauf zugreifen können, um Ihr Konto zu verifizieren.
- **Passwort** - Dies muss ein sicheres Passwort sein. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie sich an Ihr Passwort erinnern können, da es benötigt wird, um auf Ihr Konto zuzugreifen und einige Einstellungen in Predictable ein- oder auszuschalten.
- **Passwort bestätigen** - Dies dient dazu, sicherzustellen, dass Sie Ihr Passwort beim ersten Mal korrekt eingegeben haben und dass Sie sich daran erinnern und es bei Bedarf erneut eingeben können.
- **Kontotyp** - Sie müssen zwischen einem Cloud- und einem Offline-Konto wählen:
- **Cloud** - Alle Daten werden in die Cloud hochgeladen, damit die Einstellungen auf allen Geräten synchron bleiben. Wenn Sie sich von einem Gerät abmelden, werden Ihre vorherigen Einstellungen wiederhergestellt, sobald Sie sich erneut anmelden. Wählen Sie diese Option, um Datenverlust zu vermeiden.



- **Offline** - Alle Daten werden auf Ihrem Gerät gespeichert. Nach dem Ausloggen werden Ihre Daten gelöscht. Jedes Mal, wenn Sie sich in Ihr Offline-Konto einloggen, werden die Einstellungen und das Raster auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Um die Einhaltung regionaler Datenschutzbestimmungen zu gewährleisten und die Leistung zu verbessern, bieten wir Nutzern die Möglichkeit, ihre bevorzugte Serverregion auszuwählen: **EU** oder **USA**.

- ☐ Im Bildschirm „Konto erstellen“ werden Sie aufgefordert, zwischen dem **EU**- und dem **US**-Server zu wählen.
- ☐ Diese Auswahl bestimmt, wo Ihre Kontodaten gespeichert und verarbeitet werden.

Sie müssen dann den Nutzungsbedingungen zustimmen, um fortzufahren.


Nachdem Sie auf Registrieren gedrückt haben, müssen Sie Ihr Konto verifizieren, bevor Sie sich einloggen können. Sie erhalten eine E-Mail mit einem Link zum Anklicken und werden dann zu einer Bestätigungswebseite weitergeleitet. Nach erfolgreichem Abschluss können Sie sich mit Ihrem neuen Konto bei Predictable anmelden.

 **Passwort vergessen**

Um Ihr Passwort zurückzusetzen, geben Sie bitte unten Ihre E-Mail-Adresse ein. Sie erhalten eine E-Mail mit einem Link, um Ihr Passwort zurückzusetzen.

E-Mail-Adresse


Senden

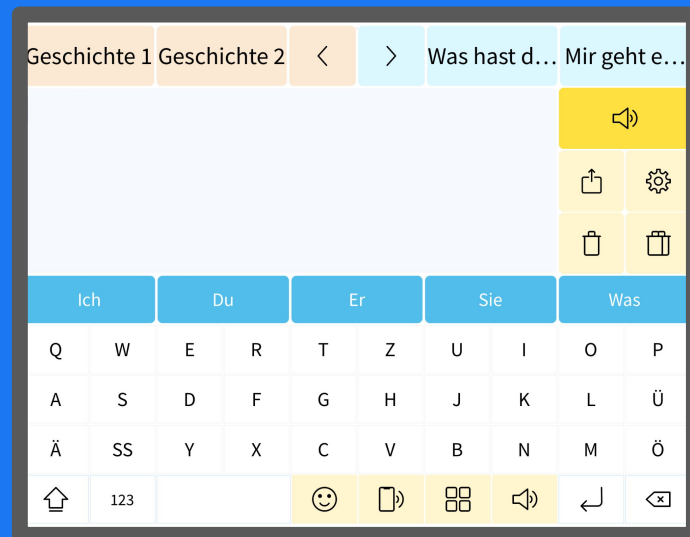

3. Die Grundlagen von Predictable

3.1. Tastaturbildschirm

Die Tastaturansicht ist der Hauptbildschirm von Predictable. Die Abschnitte sind hier auf dem Bildschirm beschriftet.

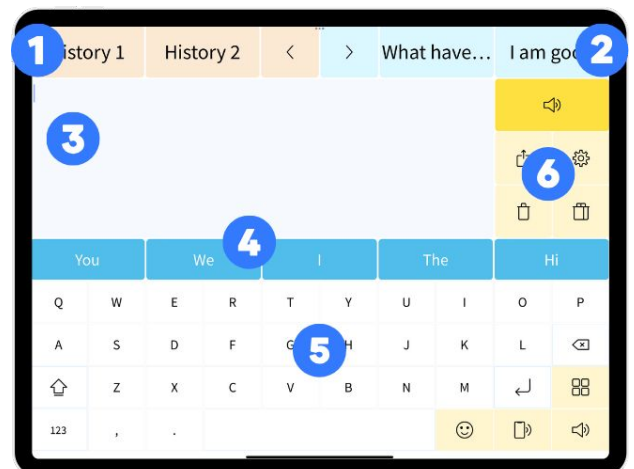

1. Verlaufsstreifen - Dies befindet sich oben links auf dem Bildschirm und zeigt Ihre historisch gesprochenen Phrasen an. Nach dem Sprechen einer Nachricht erscheint sie an der äußersten rechten Stelle. Sie können durch diese Nachrichten navigieren, indem Sie horizontal scrollen oder die Pfeiltaste in der Mitte verwenden.

2. Favoritenstreifen - Dies befindet sich oben rechts auf dem Bildschirm und zeigt alle Phrasen aus Ihrer Favoritenkategorie an. Die Phrasen hier können im Bearbeitungsmodus des Rasterbildschirms bearbeitet werden. Sie können diese Phrasen navigieren, indem Sie horizontal scrollen oder die Pfeiltaste in der Mitte verwenden.

3. Nachrichtenfenster - Das Nachrichtenfenster ist die große Box in der Nähe der Bildschirmmitte. Wenn Sie eine Nachricht eingeben, wird hier jeglicher Text angezeigt. Sie können das Verhalten des Nachrichtenfensters in den Spracheinstellungen bearbeiten.

4. **Wortvorhersageleiste** - Diese befindet sich in der Mitte des Bildschirms und zeigt Ihre vorhergesagten Wörter basierend auf dem an, was Sie eingegeben haben. Standardmäßig werden fünf Wörter angezeigt, aber verschiedene Anzahlen von Vorhersagen sowie andere Anpassungen sind in den Einstellungen für Wortvorhersage verfügbar..



5. **Tastatur** - Die Standardtastatur von Predictable ist so gestaltet, dass sie große, einfache Zielbereiche aufweist, um einfaches Tippen zu ermöglichen. Andere Tastaturen wie Ten Key oder Native können in den Tastatureinstellungen ausgewählt werden.


6. **Funktionstasten** - Die gelben Schaltflächen auf dem Bildschirm sind Funktionstasten. Diese ermöglichen es Ihnen, je nach Bedarf verschiedene Funktionen auszutauschen. Standardmäßig sind diese als Sprechen, Teilen, Einstellungen, Alle löschen, Löschen, Emoji-Tastatur, Boden halten, eine zweite Sprechaste und Grid festgelegt. Eine vollständige Liste und Beschreibungen aller Funktionstasten finden Sie im Abschnitt "Kurzbefehle" dieses Benutzerhandbuchs.

3.2. Grid Bildschirm

Der Grid-Bildschirm ist der Ort, an dem Sie eine personalisierte Sammlung von Kategorien und Phrasen speichern und darauf zugreifen können. Um diese Kategorien oder Phrasen zu bearbeiten, drücken Sie auf das Bleistiftsymbol, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen. Von hier aus können Sie vorhandene Kategorien oder Phrasen auswählen, um sie zu bearbeiten oder zu löschen, oder auf die Schaltfläche „Kategorie/Phrase hinzufügen“ drücken, um neue hinzuzufügen.

Beim Hinzufügen einer Kategorie haben Sie die Möglichkeit, einen Anzeigenamen hinzuzufügen und ein Bild auszuwählen, um Ihre Kategorie zu repräsentieren. Dies kann aus unserer Bibliothek von Symbolen ausgewählt, aus Ihrer Galerie ausgewählt, aus dem Web gesucht oder Sie können ein Foto unterwegs machen.

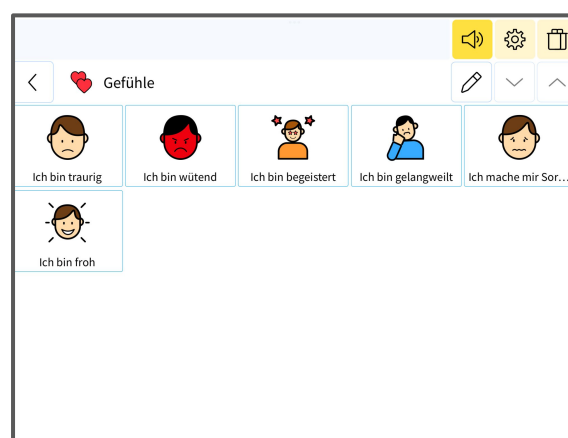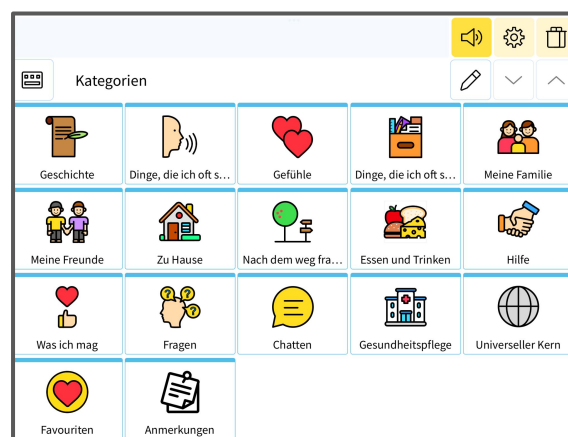

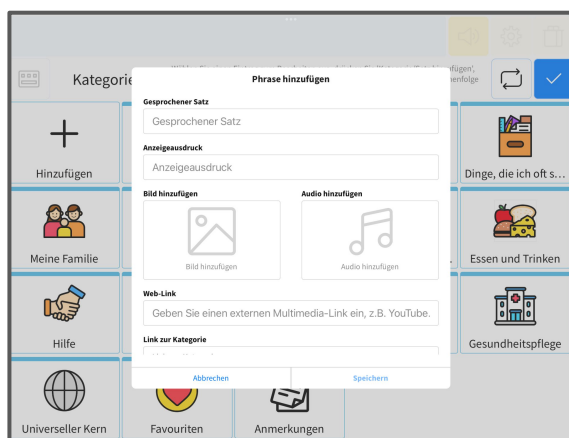


Beim Hinzufügen einer Phrase gibt es mehrere Optionen. Diese sind unten aufgeführt:

- **Anzeigetext** - Dies ist der Text, der auf dem Bildschirm angezeigt wird und in Ihrer Phrasenzelle ausgewählt werden kann
- **Gesprochene Phrase** - Dies wird an das Nachrichtenfenster gesendet und ausgesprochen.
- **Bild hinzufügen** - Dies ist das Bild, das in Ihrer Phrasenzelle angezeigt wird. Es kann aus verschiedenen Quellen ausgewählt werden: Kamera, Galerie, Tawasol, Webbilder oder unsere Symbolbibliothek.
- **Audio hinzufügen** - Dies wird abgespielt, wenn Sie Ihre Phrase sprechen. Es kann Text-zu-Sprache, eine Tonaufnahme oder aus zuvor verwendeten Audiodateien in Predictable ausgewählt werden.
- **Multimedia-Links** - Hier kann ein Link zu einer Website oder einem Video eingegeben werden. Der Benutzer wird hierhin navigiert, wenn die Phrase gedrückt wird.
- **Link zur Kategorie** - Dies führt Sie automatisch zur ausgewählten Kategorie, sobald die Phrase ausgewählt wurde.
- **Zu Favoriten hinzufügen** - Dadurch wird Ihre Phrase der Favoritenkategorie hinzugefügt.

Sie können auch Kategorien oder Phrasen neu anordnen. Drücken Sie die Umsortieren-Schaltfläche, um diesen Modus zu aktivieren, und wählen Sie dann die Zellen in der Reihenfolge aus, in der sie angezeigt werden sollen.

3.3. Einstellungen

Die Einstellungen von Predictable bieten viele Funktionen. Wir haben eine Suchleiste und Seitenelementbeschreibungen, um Ihnen zu helfen, individuelle Einstellungen am einfachsten zu finden. Die besten Möglichkeiten, herauszufinden, welche Einstellungen verfügbar sind, sind das Lesen dieses Benutzerhandbuchs, das Ansehen unserer Videoanleitungen (verlinkt auf unserer Website) oder das Buchen einer Schulungssitzung mit einem Mitglied unseres Teams.

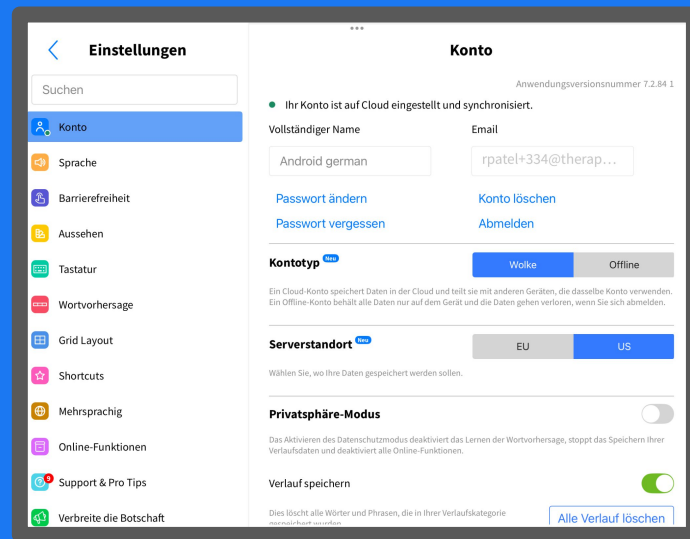

4. Kontoeinstellungen

4.1. Kontoaktionen

Diese Einstellungen bieten Ihnen wesentliche Steuerungen für Ihr Konto. Der Kontostatus-Indikator, dargestellt durch einen Punkt, liefert sofortige Informationen über die Konnektivität Ihres Kontos. Grün bedeutet Online-Status, Gelb zeigt Offline an. Sie können Ihren vollständigen Namen und Ihre E-Mail-Adresse, die mit dem Konto verbunden sind, anzeigen.

- **Passwort ändern** - Klicken Sie auf die Schaltfläche "Passwort ändern", um das Passwort Ihres Kontos zu aktualisieren. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um ein neues, sicheres Passwort festzulegen.
- **Passwort vergessen** - Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Passwort vergessen", um den Passwort-Wiederherstellungsprozess zu starten. Sie erhalten eine E-Mail zur Passwortzurücksetzung mit weiteren Anweisungen. Befolgen Sie die bereitgestellten Schritte.
- **Konto löschen** - Um Ihr Konto dauerhaft zu entfernen, klicken Sie auf die Option "Konto löschen". Seien Sie vorsichtig, da diese Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann und zum Verlust aller zugehörigen Daten führt. Bestätigen Sie Ihre Entscheidung, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

- **Logout** - Melden Sie sich sicher von Ihrem Konto ab, indem Sie "Logout" auswählen.

4.2. Kontotyp

Wählen Sie den Kontotyp, der am besten Ihren Bedürfnissen entspricht. Ihr Kontotyp bestimmt, wie Daten verwaltet und über Geräte hinweg geteilt werden.

- **Cloud** - Ein Cloud-Konto bietet die Bequemlichkeit, Daten in der Cloud zu speichern. Ihre Informationen werden sicher online gespeichert, was einen nahtlosen Zugriff von mehreren Geräten mit demselben Konto ermöglicht. Alle von Ihnen vorgenommenen Änderungen oder Updates werden auf allen verbundenen Geräten synchronisiert. Dadurch wird die Kontinuität und Zugänglichkeit Ihrer Daten gewährleistet, auch wenn Sie zwischen Geräten wechseln.
- **Offline** - Ein Offline-Konto ist für diejenigen konzipiert, die ihre Daten lieber ausschließlich auf dem Gerät behalten möchten. Mit einem Offline-Konto bleiben alle Ihre Informationen lokal gespeichert. Das Abmelden von einem Offline-Konto führt zum Verlust der mit diesem Konto auf dem Gerät verbundenen Daten.

4.3 Die Serverstandort

Sie können wählen, wo Ihre Daten gespeichert und verarbeitet werden – entweder in der **Europäischen Union (EU)** oder in den **Vereinigten Staaten (USA)**.

Sie können Ihren Serverstandort jederzeit ändern, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

- Gehen Sie zu Einstellungen > Konto > Serverstandort.
- Tippen Sie auf EU oder USA, um Ihre neue Region auszuwählen.
- Sie werden aufgefordert, Ihr Passwort einzugeben, um die Änderung zu bestätigen.
- Nach der Bestätigung wird Ihr Serverstandort aktualisiert.

Hinweis: Serverstandortwechsel

Bitte beachten Sie, dass die Änderung Ihres Serverstandorts eine Datenmigration und eine kurze Dienstunterbrechung zur Folge haben kann. Dieser Schritt ist passwortgeschützt, um die Sicherheit Ihrer Daten zu gewährleisten.

4.4. Privatmodus

Verbessern Sie Ihre Privatsphäre mit der Datenschutzmodus-Funktion. Dadurch können Sie steuern, welche Informationen Ihre App lernt und speichert.

Verwenden Sie den Umschaltknopf, um den Datenschutzmodus je nach Ihren Wünschen ein- oder auszuschalten.

Aktivieren des Datenschutzmodus::

- Deaktiviert die Wortvorhersage-Lernfunktion: Ihre App lernt nicht mehr von Ihren Tippgewohnheiten, um Wörter vorherzusagen.
- Stoppt das Speichern von Verlauf: Die App hört auf, Ihren Eingabeverlauf aufzuzeichnen.
- Deaktiviert Online-Funktionen: Alle mit der App verbundenen Online-Funktionen werden aus Datenschutzgründen deaktiviert.

4.5. Einstellungen deaktivieren


Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Einstellungs-Schaltfläche während des Spiels deaktiviert. Um die Einstellungen erneut aufzurufen, gehe zu den Geräteeinstellungen, dann zu Predictable, finde den Schalter Force Start Settings und aktiviere ihn. Öffne anschließend Predictable erneut, und du wirst direkt zu den Einstellungen weitergeleitet.


Individualisieren Sie, wie Ihre App mit der Funktion "Verlauf speichern" umgeht. Passen Sie Ihre Erfahrung an, indem Sie wählen, ob Sie Ihren Eingabeverlauf speichern möchten. Verwenden Sie die Schaltfläche, um die Funktion "Verlauf speichern" zu steuern.

Das Einschalten speichert Wörter und Phrasen in Ihrer Verlaufskategorie, während das Ausschalten das Speichern Ihrer Wörter und Phrasen einstellt und somit die Privatsphäre erhöht und die Datenspeicherung minimiert.

4.6. Zurücksetzungsoptionen

- **Alle Einstellungen zurücksetzen** - Durch Klicken auf "Alle Einstellungen zurücksetzen" werden alle Ihre Anpassungen und Präferenzen auf ihre Standardwerte zurückgesetzt. Dies umfasst allgemeine Einstellungen, das Erscheinungsbild und alle persönlichen Konfigurationen, die Sie vorgenommen haben.
- **Reset Grid to Default** - Durch die Auswahl von "Standardraster zurücksetzen" wird Ihr grid layout auf den Originalzustand zurückgesetzt und alle Anpassungen an Kategorien und Phrasen werden entfernt. Dies ist nützlich, wenn Sie die allgemeinen Einstellungen beibehalten möchten, aber das Layout Ihres grid zurücksetzen möchten.
- **Grid from Scratch** - Wählen Sie "Raster von Grund auf neu erstellen", um mit einem sauberen Zustand zu beginnen. Diese Option setzt nicht nur das Layout zurück, sondern entfernt auch Standardkategorien und -phrasen, sodass Sie Ihr Raster vollständig neu erstellen können.
- **Neustart der Einführung** - Dadurch können Sie erneut von den Einführungsbildschirmen aus beginnen. Bitte beachten Sie, dass dadurch alle Einstellungen oder Anpassungen entfernt werden und Sie von vorne beginnen können.

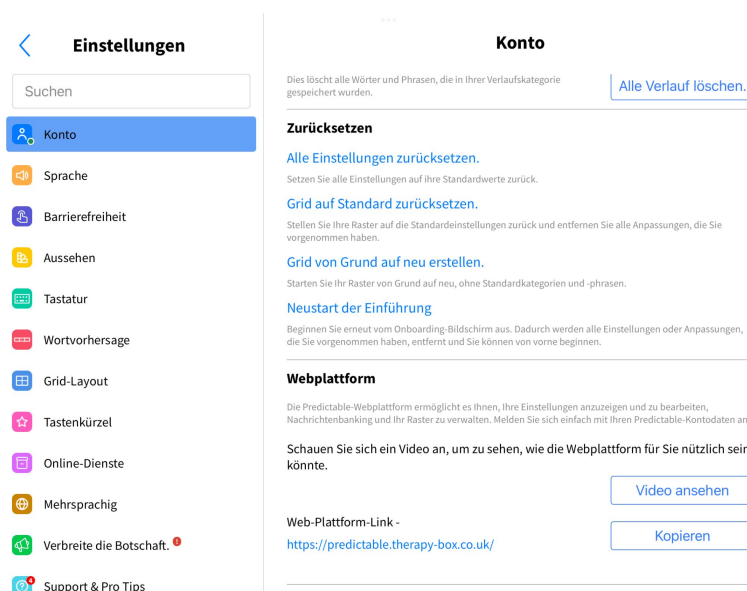

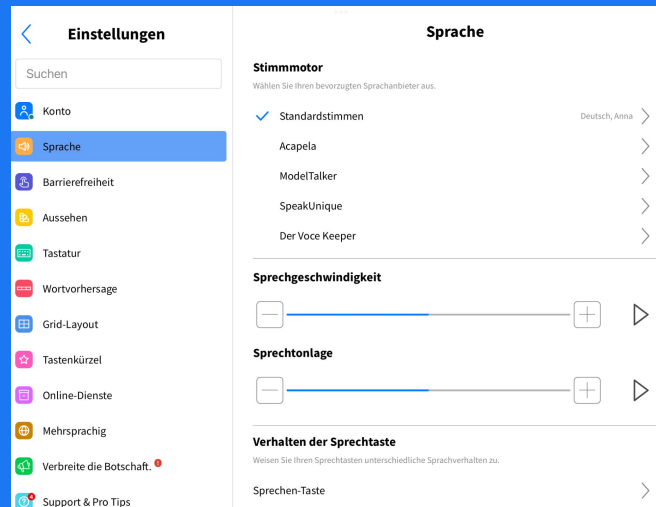

5. Spracheinstellungen

Passen Sie Ihre Predictable-Erfahrung an, indem Sie aus einer Reihe von Sprachanbietern auswählen. Jeder Motor bietet unterschiedliche Stimmen, die Ihren Vorlieben entsprechen.

5.1. Standardstimmen

Gerätestimmen - Standardstimmen sind die Gerätestimmen, die mit dem von Ihnen besessenen Gerät geliefert werden. Einige Gerätestimmen sind vorab heruntergeladen und einsatzbereit. Obwohl sie kostenlos sind, müssen bestimmte Gerätestimmen möglicherweise heruntergeladen oder installiert werden. Wenn Sie eine Gerätestimme verwenden möchten, müssen Sie zunächst den Akzent der Stimme auswählen.

Online-Stimmen - Diese Stimmen erfordern eine Internetverbindung und verwenden Ihr Token-Kontingent für Online-Dienste. Um Ihr verbleibendes Token-Kontingent zu überprüfen, gehen Sie bitte zu Online-Dienste.

Sobald Sie den Akzent ausgewählt haben, können Sie eine Stimme antippen, um sie anzuhören und auszuwählen. Wenn eine Stimme nicht spricht, können Sie sie aktivieren, indem Sie sie in den Einstellungen Ihres Geräts herunterladen. Um sie herunterzuladen, gehen Sie zu den Einstellungen Ihres iOS-Geräts, navigieren Sie zu Barrierefreiheit > Gesprochener Inhalt > Stimmen und laden Sie dort verfügbare Stimmen herunter.

Änderungen in Ihren Text-to-Speech-Einstellungen auf Ihrem Android-Gerät werden automatisch in der Predictable Android-App übernommen.


Um Ihre Text-to-Speech-Einstellungen zu finden, verlassen Sie Predictable, öffnen Sie die Einstellungen Ihres Geräts, gehen Sie zum Menü System, tippen Sie auf Sprache und Eingabe und wählen Sie Text-to-Speech-Optionen (der Standort kann je nach Gerät variieren). Google Text-to-Speech ist oft auf vielen Android-Geräten vorinstalliert. Wenn nicht, können Sie es aus dem Play Store herunterladen. Samsung-Geräte kommen standardmäßig mit Samsung Text-to-Speech in den Text-to-Speech-Optionen.

5.2. Voice-Banking-Anbieter

Erkunden Sie eine Vielzahl von Anbietern für Sprachbanking, um Ihre Kommunikationserfahrung zu personalisieren. Jeder Anbieter bietet einzigartige Funktionen und Möglichkeiten.

- **Acapela** - Acapela ist ein externes Unternehmen, das personalisierte digitale Stimmen aus seinem My-Own-Voice (MOV) Sprachbanking-Service anbietet. Die Verwendung einer Acapela MOV ermöglicht es Benutzern, mit einer einzigartigen persönlichen synthetischen Stimme zu kommunizieren, die repräsentativ für ihre eigene Stimme ist.

Um eine Acapela MOV-Demonstrationsstimme herunterzuladen, öffnen Sie die Spracheinstellungen der App, wählen Sie Acapela als Stimmotor und geben Sie Anmeldeinformationen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche zum Herunterladen.

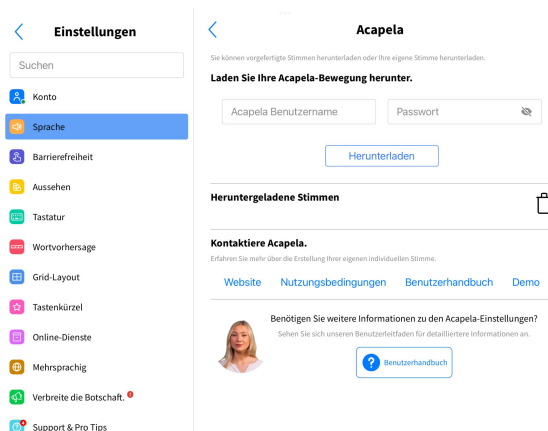

Um Ihre eigene Acapela MOV-Stimme zu erstellen, müssen Sie Ihre Stimme mit Acapela aufzeichnen. Dazu müssen Sie folgende Schritte befolgen:






- Bewerben Sie sich beim 'My-Own-Voice'-Online-Service: <https://mov.acapela-group.com/start-now/>
- Nehmen Sie die Sätze in Ihrem eigenen Tempo auf.
- Hören Sie Ihre Stimme im 'Type and Talk'-Interface.
- Wenn Sie zufrieden sind, können Sie entscheiden, ob Sie ihre Dienste kaufen möchten. Weitere Informationen zu den Preisen finden Sie auf ihrer Website: <https://mov.acapela-group.com/pricing/>

Sobald Sie Ihre Stimme aufgenommen haben, können Sie die Stimme von Predictable herunterladen. Geben Sie dazu Ihren Acapela-Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf 'Herunterladen'. Nach dem Herunterladen können Sie die Stimme in der App verwenden.


- **ElevenLabs** – ElevenLabs ermöglicht es Ihnen, Ihre eigene benutzerdefinierte Stimme oder eine Vielzahl vorgefertigter Stimmen zu erstellen und zu verwenden. Wenn Sie noch keine benutzerdefinierte Stimme erstellt haben und eine möchten, richten Sie bitte ein Konto bei ElevenLabs ein. Sie können Aufnahmen aufnehmen oder auf deren Website hochladen, um Ihre eigene benutzerdefinierte Stimme zu erstellen. <https://elevenlabs.io/>

Predictable ALS-Nutzer erhalten ElevenLabs kostenlos. Wir haben eine Partnerschaft mit ElevenLabs geschlossen, um kostenlose Codes für ElevenLabs-Stimmen an Personen mit MND (Motoneuronerkrankung), MSA (Multisystematrophie) und Mundkrebs zu verteilen.

Um Ihre ElevenLabs-Stimmen in Predictable zu verwenden, rufen Sie zunächst die ElevenLabs-Website auf, um Ihren einzigartigen API-Schlüssel zu generieren. Mit diesem verbinden Sie Ihre Stimme mit Predictable. Klicken Sie unten links auf „Mein Arbeitsbereich“ und dann auf „API-Schlüssel“ und „Neuen API-Schlüssel erstellen“ (Sie können dies beliebig nennen). Anschließend wird Ihnen Ihr API-Schlüssel angezeigt, den Sie speichern sollten, da Sie ihn nicht erneut anzeigen können. Wenn Sie diesen Schlüssel verlieren, können Sie jederzeit zu diesem Bildschirm zurückkehren und einen neuen generieren.

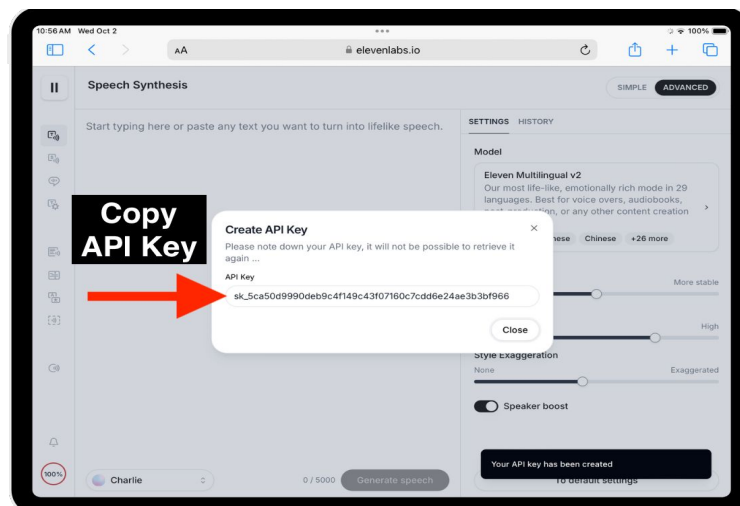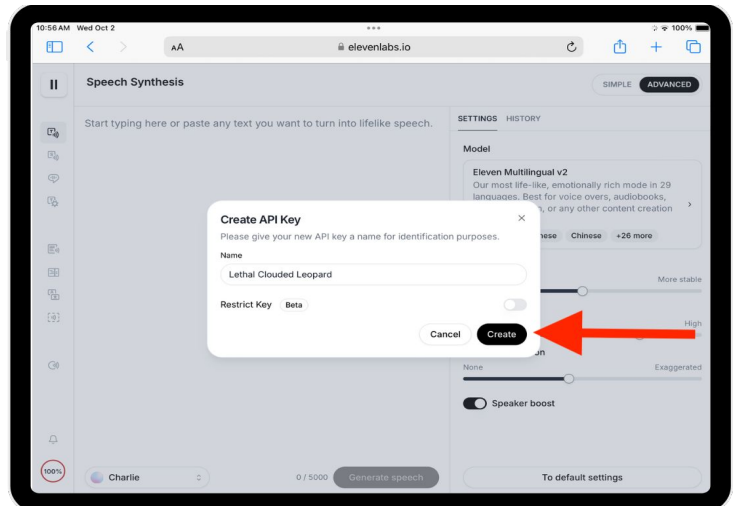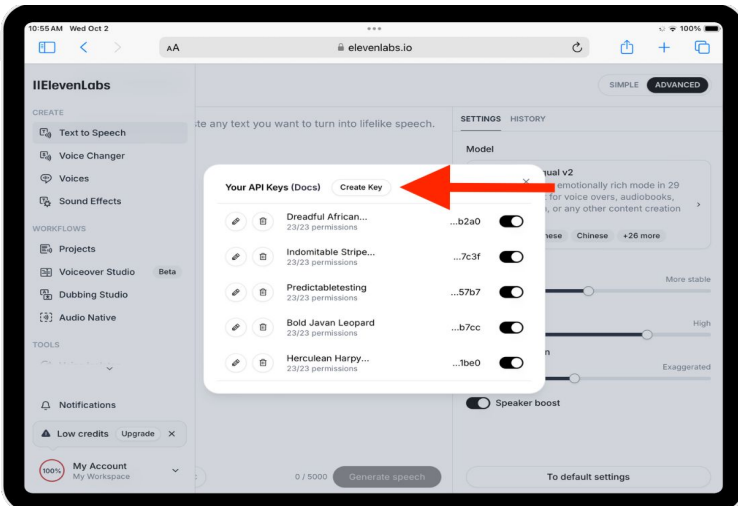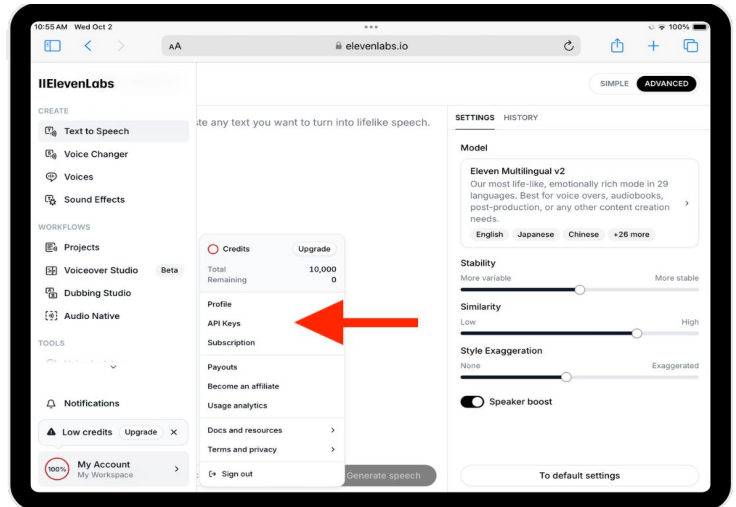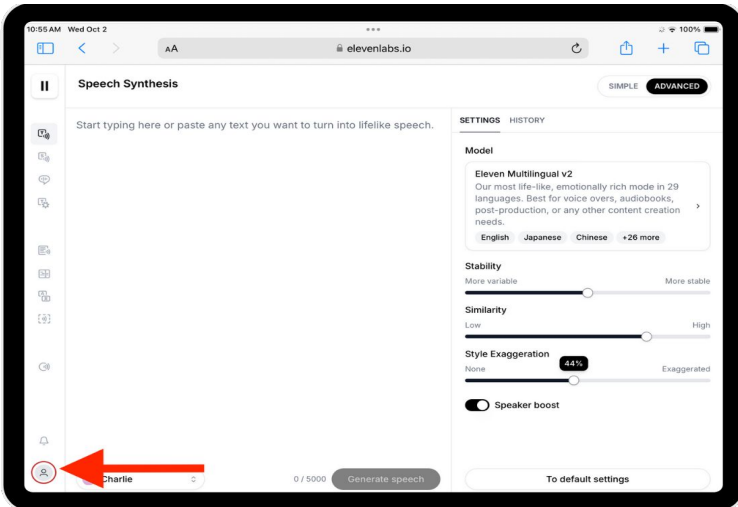

Gehen Sie dann zu Predictable-Einstellungen, Sprache und drücken Sie unter Sprach-Engines auf ElevenLabs. Geben Sie den von Ihnen generierten API-Schlüssel in das Eingabefeld ein (am einfachsten ist es, ihn zu kopieren/einzufügen, da er ziemlich lang ist) und drücken Sie dann auf Meine Stimmen verbinden. Sie sollten dann alle Ihre Stimmen in einer Liste unten anzeigen und auswählen können.

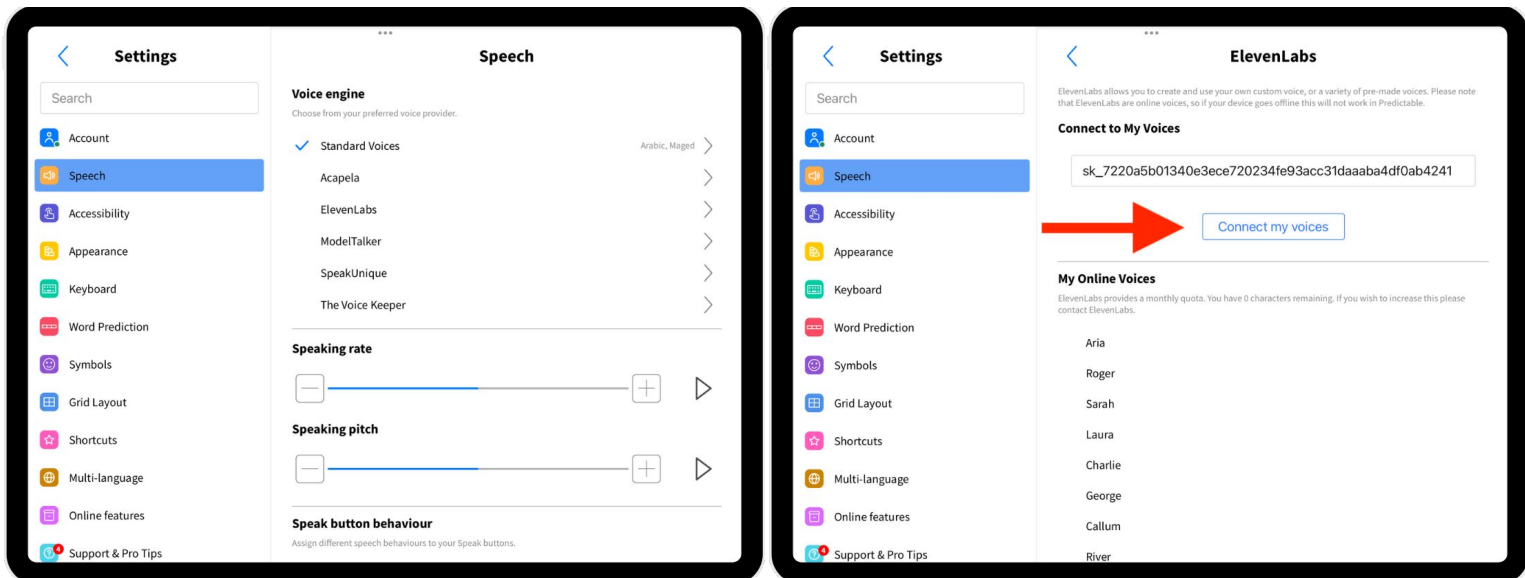

Bridging Voice & Scott Morgan Foundation – Die besten professionellen Stimmen sind kostenpflichtig. Wenn Sie an ALS/MND leiden und finanzielle Unterstützung bei der Erstellung einer hochwertigen ElevenLabs-Stimme wünschen, wenden Sie sich bitte an Bridging Voice, wenn Sie in Amerika sind, und an die Scott Morgan Foundation, wenn Sie außerhalb Amerikas sind.

<https://bridgingvoice.org/>

<https://www.scottmorganfoundation.org/>

Was passiert, wenn ich offline gehe?

Da ElevenLabs Online-Stimmen sind, können Sie offline keine neuen Texte sprechen. Wir haben einige Optionen implementiert, um in diesem Szenario zu helfen:

- Wir speichern die Aufnahmen, die wir von ElevenLabs erhalten, für Ihren Verlauf, sodass Sie alles, was Sie bereits gesagt haben, erneut mit ElevenLabs sprechen können. Dies sollte auch die Geschwindigkeit verbessern, selbst wenn Sie online sind und einen Satz wiederholen.
- Option in den Einstellungen zum Herunterladen Ihres Rasters. Dadurch wird Ihr gesamtes Raster heruntergeladen, sodass wir die ElevenLabs-Aufnahmen vorab laden. Dies wird einen erheblichen Teil Ihres ElevenLabs-Kontingents verbrauchen. Überprüfen Sie dies daher bitte, bevor Sie fortfahren. Sie können jedoch jeden Satz sprechen, wenn Sie offline gehen.



Grid herunterladen – Da es sich bei den Stimmen von ElevenLabs um Online-Stimmen handelt, bedeutet dies, dass Sie keinen neuen Text sprechen können, wenn Ihr Gerät offline geht. Um weiterhin auf Ihr Grid zugreifen zu können, können Sie es unten herunterladen. Wir greifen also auf diese heruntergeladenen Dateien zu, anstatt direkt auf ElevenLabs. Bitte beachten Sie, dass diese Aktion Ihr ElevenLabs-Kontingent verbraucht.

- **ModelTalker** - ModelTalker ist eine weitere Sprachsynthese-Software, die vom Nemours Speech Research Laboratory entwickelt wurde. ModelTalker bietet auch die Möglichkeit, eine aufgezeichnete Stimme zu verwenden. Aufgezeichnete Stimmen sind synthetisch nachgebildete Stimmen, die mit Predictable verwendet werden können.

Einstellungen

Suchen

- Konto
- Sprache**
- Barrierefreiheit
- Aussehen
- Tastatur
- Wortvorhersage
- Grid-Layout
- Tastenkürzel
- Online-Dienste
- Mehrsprachig
- Verbreite die Botschaft.
- Support & Pro Tips

ModelTalker

Sie können vorgefertigte Stimmen herunterladen oder Ihre eigene Stimme herunterladen.

Laden Sie Ihre ModelTalker-Stimme herunter.

ModelTalker Benutzername Passwort

Herunterladen

Heruntergeladene Stimmen

Kontaktiere ModelTalker.

Erfahren Sie mehr über die Erstellung Ihrer eigenen individuellen Stimme.

Website Nutzungsbedingungen

Benötigen Sie weitere Informationen zu den ModelTalker-Einstellungen?
Sehen Sie sich unseren Benutzerleitfaden für detailliertere Informationen an.

Benutzerhandbuch

Um Ihre Stimme mit ModelTalker aufzuzeichnen, müssen Sie dieses Online-Formular ausfüllen und absenden: <https://www.modeltalker.org/registration/registration.php?t=7> to Erstellen Sie ein Konto auf ModelTalker.org und erhalten Sie Zugriff auf ihre Sprachaufzeichnungssoftware. Weitere Informationen zur Aufzeichnung Ihrer Stimme finden Sie auf ihrer Website: <https://www.modeltalker.org/getting-set-up-for-recording/>. Hier ist die E-Mail-Adresse für den Support: staff@modeltalker.org.



Um Ihre benutzerdefinierte ModelTalker-Stimme in Predictable herunterzuladen, öffnen Sie die Spracheinstellungen der App, wählen Sie ModelTalker als die Sprachengine aus, geben Sie Ihre ModelTalker-Anmeldedaten ein und drücken Sie dann auf "Herunterladen".

- **SpeakUnique** - SpeakUnique bietet drei Sprachbankdienste an: Voice Build, Voice Repair und Voice Design.


Die Stimme kann dann in Predictable verwendet werden, und der Prozess ist einfach.

Sobald Sie Ihre Stimme in der Sprachbank hinterlegt haben, können Sie sich mit dem von SpeakUnique bereitgestellten Benutzernamen und Passwort anmelden und innerhalb der Einstellungen für Sprache in Predictable einloggen.

Wenn Sie Fragen zu den Sprachbankdiensten von SpeakUnique haben, können Sie SpeakUnique über ihre Website kontaktieren:

<https://www.speakunique.co.uk/overview/>

Um Ihre individuelle SpeakUnique-Stimme auf Predictable herunterzuladen, öffnen Sie die Spracheinstellungen der App, wählen Sie SpeakUnique als Sprachmotor aus, geben Sie Ihre SpeakUnique-Anmeldeinformationen ein und drücken Sie dann auf "Herunterladen".

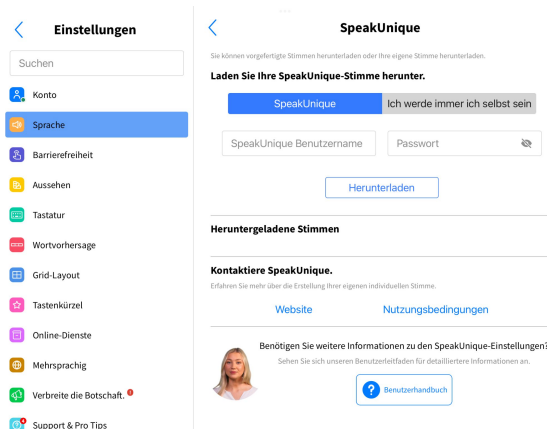


- **The Voice Keeper** - Der Voice Keeper-Dienst wird von Almagu betrieben, einem synthetischen Sprachunternehmen, das seit 2011 in diesem Bereich tätig ist. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.thevoicekeeper.com/>.

The Voice Keeper bietet die eigene benutzerdefinierte Stimme, die sie mit The Voice Keeper erstellt haben.



Sie finden weitere Informationen zum Erstellen Ihrer Stimme auf ihrer Website: <https://www.thevoicekeeper.com/>.


Um Ihre Voice Keeper-Stimme in Predictable zu verwenden, gehen Sie einfach in die Einstellungen unserer App. Tippen Sie auf Sprache und dann auf The Voice Keeper im Menü Voice Engine. Geben Sie dann den Benutzernamen und das Passwort ein, die Sie bei The Voice Keeper eingerichtet haben, um Ihre Stimme herunterzuladen und in Predictable zu verwenden.

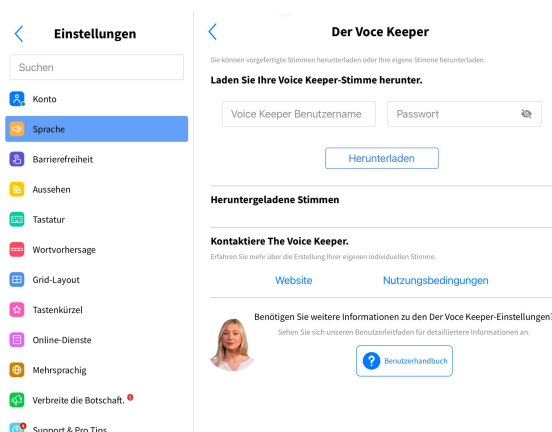

5.3. Sprechknopfverhalten

Entdecke verschiedene Möglichkeiten, die Sprechschaltfläche mit verschiedenen Sprechverhaltensweisen zu verwenden. Es gibt drei unterschiedliche Sprechverhaltensweisen: 1) Kommunikationstyp, 2) Sprechunterbrechungen und 3) Sprechinteraktionen. Passe deine Erfahrung an, indem du spezifische Verhaltensweisen für die Sprechschaltfläche und das Nachrichtenfenster zuweist.

- Sprechschaltfläche - Passe das Verhalten der Sprechschaltfläche an deine Vorlieben an.
- Nachrichtenfenster Sprechschaltfläche - Wenn die Nachrichtenfenster-Sprechschaltfläche aktiviert ist, wird durch Tippen auf das Nachrichtenfenster das zugewiesene Sprechverhalten aktiviert. Beachte, dass dadurch alle anderen möglichen Interaktionen mit dem Nachrichtenfenster deaktiviert werden, wie das Bewegen des Cursors, Kopieren, Einfügen usw.

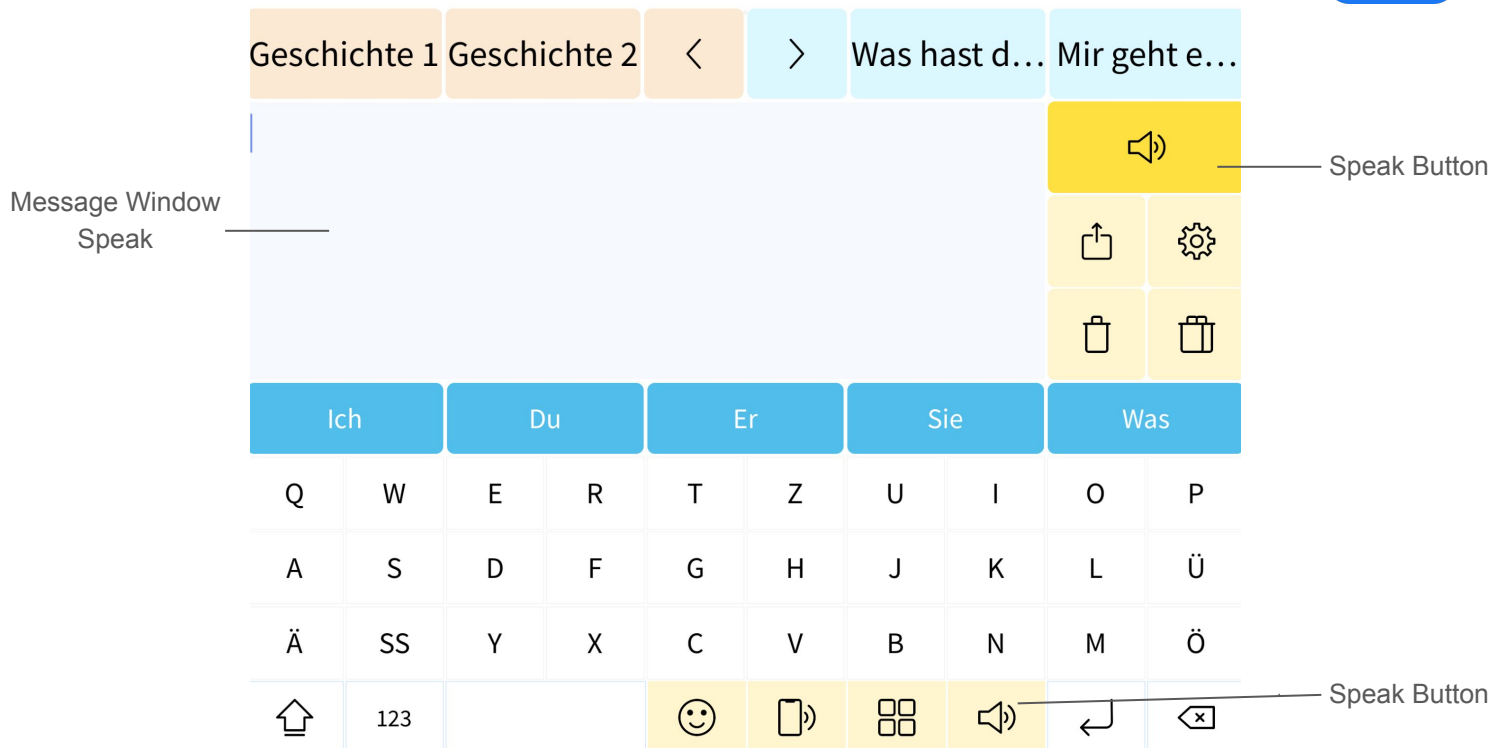


- 1) **Kommunikationstyp** - Wähle zwischen "Anzeigen" und "Sprechen" für deinen Kommunikationstyp.
 - **Anzeigen** - Wenn gedrückt, wird der Text in deinem Nachrichtenfenster rückwärts angezeigt.
 - **Sprechen** - Wenn gedrückt, wird der Sprechen-Button deine Nachricht vorlesen.
- 2) **Sprechen-Unterbrechungen** - Verbessere deine Kontrolle über gesprochene Nachrichten, indem du zwischen zwei Sprechen-Unterbrechungen wählst.
 - **Stop** - Aktiviere die Stopp-Funktion, um die gesamte Nachricht zu unterbrechen, wenn gedrückt. Wenn du die gleiche Nachricht erneut sprechen möchtest, musst du von vorne beginnen, anstatt an der Stelle fortzusetzen, an der du die Stopp-Taste gedrückt hast.
 - **Pause** - Aktiviere die Pause-Funktion, um die Nachricht bei Drücken anzuhalten. Im Gegensatz zum Stopp erlaubt Pause dir, ab der pausierten Stelle weiterzumachen, wenn du die Wiedergabe-Taste drückst. Dies bietet eine größere Flexibilität beim Verwalten von gesprochenen Nachrichten.
 - **Non stop sprechen** - Dies entfernt die Stopp- oder Pause-Funktionalität von deinem Sprechen-Button. Wenn du den Sprechen-Button drückst, wird der gesamte Text vorgelesen, und während des Sprechens ist der Button nicht verfügbar. Dies kann helfen, versehentliche doppelte Drücke des Sprechen-Buttons zu verhindern.



3) **Speak Interaction** - Verfeinern Sie, wie Ihre Nachrichten gesprochen werden, indem Sie die Optionen für die Sprachinteraktion anpassen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Sprachinteraktion für die Sprachtaste und das Nachrichtenfenster zu ändern.

- **Speak All** - Die gesamte Nachricht im Nachrichtenfenster wird gesprochen, wenn die Sprachtaste gedrückt wird.
- **Speak Last Sentence** - Nur der letzte Satz in der Nachricht wird vom Sprachmotor gesprochen.
- **Speak Unspoken Text** - Nur Wörter, die zuvor nicht gesprochen wurden, werden gesprochen.
- **Speak by Paragraph** - Dies spricht den ersten Absatz aus, bevor es stoppt; erneutes Drücken spricht den nächsten Absatz ab der Stelle, an der es gestoppt hat.
- **Speak by Sentence** - Dies wird den ersten Satz vorlesen, bevor es stoppt. Durch erneutes Drücken wird der nächste Satz abgespielt, ab wo es aufgehört hat.
- **Speak After Cursor** - Dies wird den gesamten Text vorlesen, der sich nach der aktuellen Position Ihres Cursors im Nachrichtenfenster befindet.
- **Speak Before Cursor** - Dies wird den gesamten Text vorlesen, der sich vor der aktuellen Position Ihres Cursors im Nachrichtenfenster befindet.
- **Speak Current Sentence** - Dies wird den Satz vorlesen, in dem sich Ihr Cursor gerade befindet.

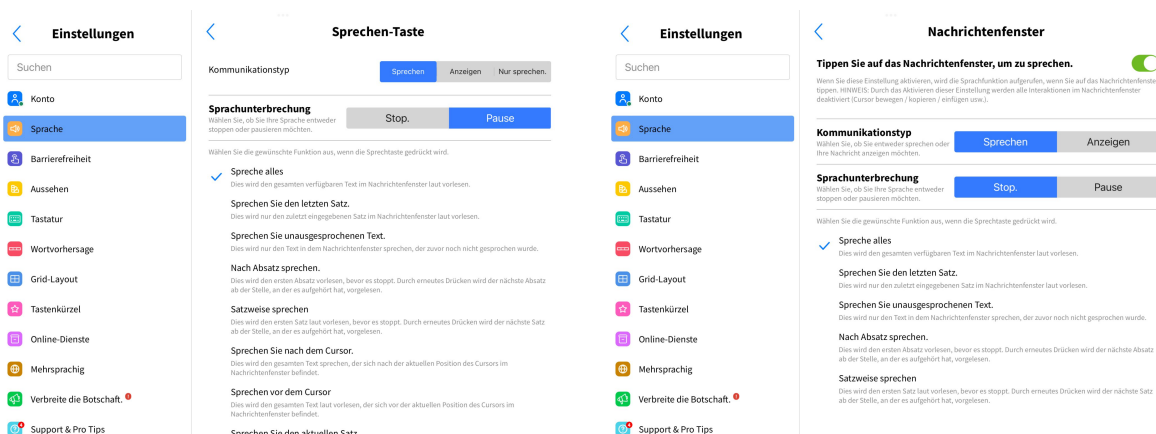



5.4. Sprachverhalten

Individualisiere das Verhalten der Sprachfunktion, um deinen Vorlieben anzupassen. Entdecke die folgenden Sprachverhaltensoptionen:

- Nach Sprechen Nachrichtenfenster leeren - Durch Aktivierung dieser Option wird das Nachrichtenfenster automatisch nach dem Sprechen geleert und bietet eine saubere Oberfläche für deine nächste Kommunikation.
- Sprechen nach Leerzeichen - Aktiviere diese Option, um den Text im Nachrichtenfenster automatisch sprechen zu lassen, wenn die Leertaste gedrückt wird.
- Sprechen nach Satz - Wenn diese Option aktiviert ist, spricht die Sprachengine, sobald ein Satz abgeschlossen ist.
- Send Phrases to Message Window - Diese Funktion ermöglicht es, Phrasen direkt in das Nachrichtenfenster zu senden, wenn Sie darauf tippen.
- Speak Phrases on Tap - Aktivieren Sie diese Option, um Phrasen laut vorlesen zu lassen, wenn Sie sie in der Phrasenbank antippen.
- Speak Categories on Tap - Wenn diese Option aktiviert ist, wird durch Antippen von Kategorien der Name der Kategorie vorgelesen.

5.5. Benutzerdefinierte Aussprache

Passen Sie die Aussprache bestimmter Wörter an, um Ihren Vorlieben mit der Funktion Benutzerdefinierte Aussprache gerecht zu werden. Wenn die synthetische Stimme ein Wort nicht so ausspricht, wie Sie es möchten, können Sie hier Anpassungen vornehmen.

Zum Beispiel, wenn das Wort "Husten" nicht so ausgesprochen wird, wie Sie es bevorzugen, können Sie es in das Feld für die benutzerdefinierte Aussprache einfügen und die gewünschte phonetische Aussprache angeben, wie zum Beispiel "Koff".

Passen Sie die Aussprache von Wörtern an, um die Klarheit und Genauigkeit der synthetischen Stimme zu verbessern. Entdecken Sie die Optionen, um benutzerdefinierte Aussprachen hinzuzufügen, zu bearbeiten oder zu löschen, für eine personalisierte und raffinierte Kommunikationserfahrung.



1) Aussprache hinzufügen -


- Um eine neue Aussprache hinzuzufügen, geben Sie den Anzeigetext ein und geben Sie Ihre gewünschte phonetische Aussprache an.
- Dies ermöglicht es Ihnen, anzupassen, wie die synthetische Stimme bestimmte Wörter ausspricht.

2) Vorhandene benutzerdefinierte Aussprache bearbeiten -

- Tippen Sie auf die Aussprache, die Sie bearbeiten möchten.
- Wählen Sie "Bearbeiten" in der eingeblendeten Popover aus.
- Ändern Sie das Wort oder die phonetische Aussprache nach Bedarf.

3) Vorhandene benutzerdefinierte Aussprache löschen -

- Tippen Sie auf die Aussprache, die Sie löschen möchten.
- Wählen Sie "Löschen" in der eingeblendeten Popover aus.
- Bestätigen Sie die Löschung, um die benutzerdefinierte Aussprache zu entfernen.

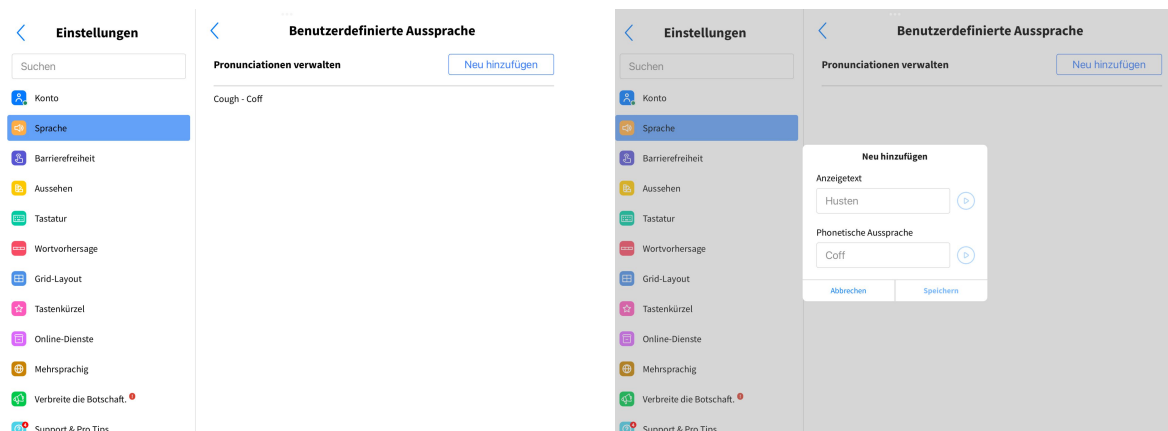

5.6. Abkürzungserweiterung

Beschleunigen Sie die Erstellung Ihrer Nachrichten mit personalisierten Abkürzungen in Predictable. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Verknüpfungen für häufig verwendete Phrasen zu erstellen und Ihre Kommunikation zu optimieren. Zum Beispiel können Sie die Abkürzung "LOL" für "Laugh Out Loud" erstellen. Wenn Sie "LOL" im Nachrichtenfenster eingeben, wird Predictable den Text erweitern und die zugehörige Phrase anzeigen, um Ihre Kommunikation schneller und effizienter zu gestalten.

Entdecken Sie die Optionen, um benutzerdefinierte Abkürzungen hinzuzufügen, zu bearbeiten oder zu löschen, für eine personalisierte und verfeinerte Kommunikationserfahrung.



1) Abkürzung hinzufügen -



- Um eine neue Abkürzung zu erstellen, gehen Sie zu 'Abkürzungserweiterung' in den Einstellungen.
- Tippen Sie auf 'Neu hinzufügen' und geben Sie die Abkürzung zusammen mit ihrer zugehörigen Vollform ein.


2) Abkürzung bearbeiten-

- Um eine vorhandene Abkürzung zu ändern, tippen Sie auf die Abkürzung, die Sie bearbeiten möchten.
- Wählen Sie die Bearbeiten-Option im erscheinenden Popover aus.

3) Abkürzung löschen -

- Um eine vorhandene Abkürzung zu entfernen, tippen Sie auf die Abkürzung, die Sie löschen möchten.
- Wählen Sie die Löschen-Option im erscheinenden Popover aus.

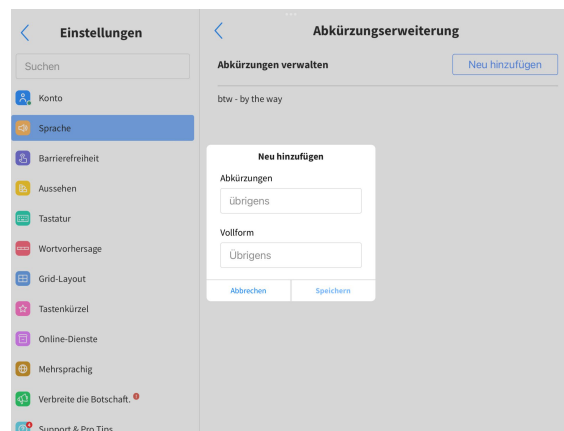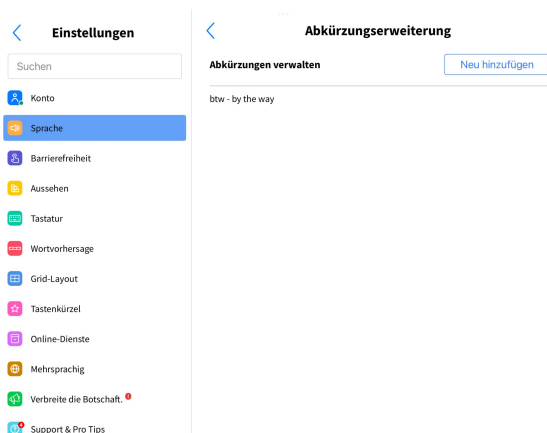

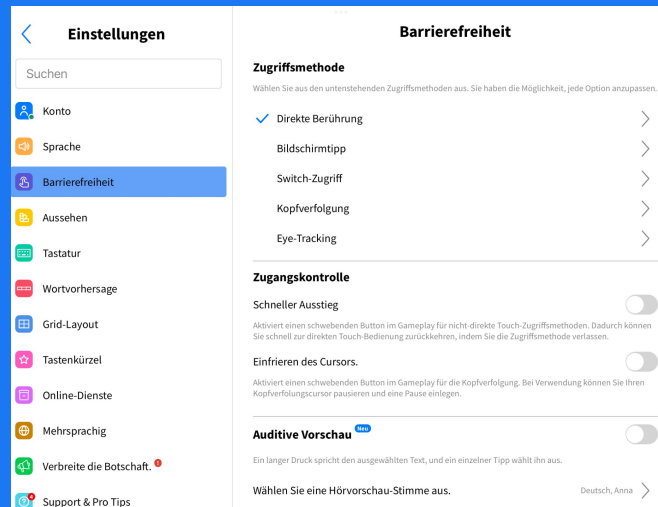


6. Barrierefreiheitseinstellungen

Predictable bietet eine Reihe von Zugriffsmethoden, um verschiedenen Benutzerbedürfnissen und -präferenzen gerecht zu werden. Jede Methode ist darauf ausgelegt, die Zugänglichkeit zu verbessern und die Kommunikation zu optimieren. Die fünf verfügbaren Zugriffsmethoden sind:

6.1. Direkte Berührung


Standardmäßig verwendet Predictable die direkte Berührung als primäre Zugriffsmethode. Bei der direkten Berührung tippt der Benutzer auf den Bildschirm, um durch Seiten zu navigieren und Schaltflächen auszuwählen.

Um spezifische Feinmotorik-Bedürfnisse zu berücksichtigen, stehen zwei Anpassungsoptionen zur Verfügung: Kraft und Zeitverzögerung. Diese Optionen sind besonders vorteilhaft für Benutzer, die Schwierigkeiten haben, ihre Bewegungen zu kontrollieren und versehentliche Interaktionen mit der App zu vermeiden. Die beiden Optionen, Kraft und Zeitverzögerung, können nicht gleichzeitig aktiviert werden.

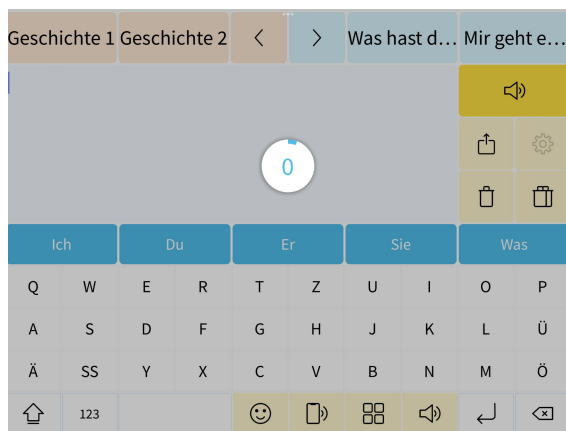

Time Delay - Bei aktiviertem Zeitverzug müssen Sie auf die gewünschte Schaltfläche drücken und diese für eine festgelegte Zeit gedrückt halten, um sie zu aktivieren. Ein Timer informiert Sie über die verbleibende Zeit, bevor die Schaltfläche ausgewählt wird. Passen Sie die Zeitverzögerung von 0,5 bis 7 Sekunden mit dem Schieberegler an.

Force Delay - Durch Aktivierung der Zwangspause friert der Bildschirm nach dem ersten Tippen ein. Während des gefrorenen Zustands löst das Berühren des Bildschirms keine Aktionen aus. Ein anpassbarer Timer informiert Sie über die verbleibende Zeit, bevor der Bildschirm wieder entsperrt wird. Legen Sie die Dauer der Zwangspause von 0 bis 7 Sekunden mit dem Schieberegler fest.

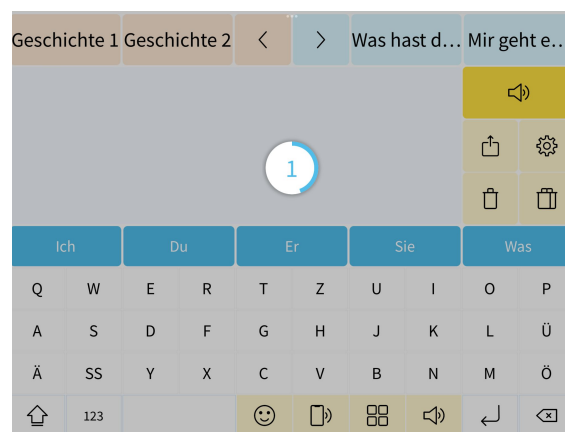

6.2. Bildschirmtipp

Screen Tap ist eine barrierefreie Methode, die für Benutzer entwickelt wurde, die aufgrund von Koordinations- oder Muskelkraftproblemen möglicherweise Schwierigkeiten haben, Schaltflächen direkt auszuwählen. Die Elemente auf dem Bildschirm werden durch ein Scanmuster hervorgehoben, und der Benutzer tippt auf den Bildschirm, um die gewünschten Elemente auszuwählen.

Für Screen Tap können Sie zwischen automatisch oder manuell wählen:

- **Automatisch** - Die Fortschritt des Scanmusters bewegt sich automatisch durch den Zyklus mit der Geschwindigkeit der Scannerrate, die Sie anpassen können.
- **Manuell** - Dies ermöglicht es Ihnen, eine Bildschirmseite auszuwählen, auf der Sie tippen möchten, um das Scanmuster voranzutreiben, und eine Seite des Bildschirms auszuwählen, auf der Sie tippen möchten, um eine Auswahl zu treffen. Sie können wählen, welche die rechte Hälfte und welche die linke Hälfte ist, je nachdem, was sich für Sie am natürlichsten anfühlt.



Für den Bildschirmtipp gibt es einige Anpassungsmöglichkeiten:

- **Scangeschwindigkeit** (nur für automatischen Bildschirmtipp) -
 - Bestimmt, wie lange der Scanner auf einer Ebene auf dem Bildschirm verbleibt, bevor er zum nächsten übergeht.
 - Passen Sie die Scangeschwindigkeit Ihren Vorlieben und Zugänglichkeitsbedürfnissen an.
- **Erscheinungsbild des Scans** -
 - Wählen Sie die Füllfarbe der Ziel-Schaltfläche aus.
 - Bestimmen Sie, wie transparent die Ziel-Schaltfläche ist. Passen Sie die Deckkraft von sehr niedrig bis sehr hoch entsprechend Ihren visuellen Vorlieben an.
 - Wählen Sie die Randfarbe der Ziel-Schaltfläche.

6.3. Schalterzugang

Switch Access ist eine Zugänglichkeitsmethode, die es Ihnen ermöglicht, Predictable mithilfe eines Schalters zu verwenden. Sie ist für Benutzer:innen gedacht, die aufgrund von Koordinations- oder Muskelkraftbeschränkungen Herausforderungen beim direkten Auswählen von Tasten haben könnten.


Es gibt zwei verschiedene Scanfortschrittsoptionen:

- **Automatischer Fortschritt** -
 - Elemente werden automatisch auf dem Bildschirm hervorgehoben, und Sie können die Scangeschwindigkeit anpassen.
 - Drücken Sie auf einen Schalter, um das hervorgehobene Element auszuwählen.
 - Es wird nur ein Schalter benötigt.
- **Manueller Fortschritt** -
 - Beinhaltet zwei Bluetooth-Schalter: einen für die Auswahl und einen für den Fortschritt.
 - Verwenden Sie einen Schalter, um den Markierer über den Bildschirm zu bewegen.
 - Drücken Sie auf den zweiten Schalter, um das hervorgehobene Element auszuwählen.



Für den Schalterzugriff können Sie Anpassungen vornehmen, um Ihr Erlebnis zu verbessern:

- **Scangeschwindigkeit** (nur für automatisch) -
 - Bestimmt, wie lange der Scanner auf einem Abschnitt bleibt, bevor er zum nächsten Abschnitt übergeht.
- **Scanaussehen** -
 - Wählen Sie die Füllfarbe der Ziel-Schaltfläche.
 - Bestimmen Sie, wie transparent die Ziel-Schaltfläche sein soll. Passen Sie die Deckkraft von sehr niedrig bis sehr hoch gemäß Ihren visuellen Vorlieben an.
 - Wählen Sie die Rahmenfarbe der Ziel-Schaltfläche.

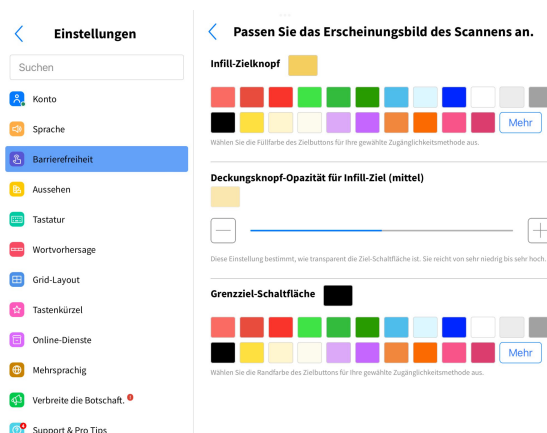

Obwohl Switch Access traditionell mit physischen Schaltern zur Steuerung des Fortschritts und der Auswahlmethode verwendet wurde, hat Predictable die Möglichkeit, eine externe Tastatur für denselben Vorgang zu verwenden.

Um dies zu tun, gehe zu Switch Access und wähle dann 'Manuell' und dann 'Tasten anpassen'. In diesem Abschnitt findest du die Option, verschiedenen Tasten auf deiner Tastatur Fortschritt und Auswahl zuzuweisen.

- Zum Beispiel könntest du die \$-Taste dem Fortschritt zuweisen und die Zahl 0 der Auswahl.
- Das Drücken der \$-Taste bewegt den Bildschirmscanner nach unten, und 0 wird auswählen, worauf der Scanner gerade steht.


Wenn Sie zur Verwendung herkömmlicher Schalterkästen zurückkehren möchten, drücken Sie auf "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen".



6.4. Augenverfolgung



Head Tracking ist eine Barrierefreiheitsmethode, die nur mit iOS-Geräten kompatibel ist, die über ein Gesichtserkennungssystem verfügen. Es ist auf dem iPad der 7. Generation und neuer verfügbar. Leider ist Head Tracking auf Android-Geräten nicht verfügbar.

Kopfverfolgung ermöglicht es Ihnen, mit Predictable zu interagieren, indem es die Bewegungen Ihres Kopfes verfolgt. Wenn aktiviert, erkennt Predictable Ihr Gesicht, normalerweise unter Verwendung der Nase als zentralen Punkt, und ahmt sie als Zeiger auf dem Bildschirm nach. Die Bewegung des Zeigers wird durch die Bewegung Ihrer Nase bestimmt.

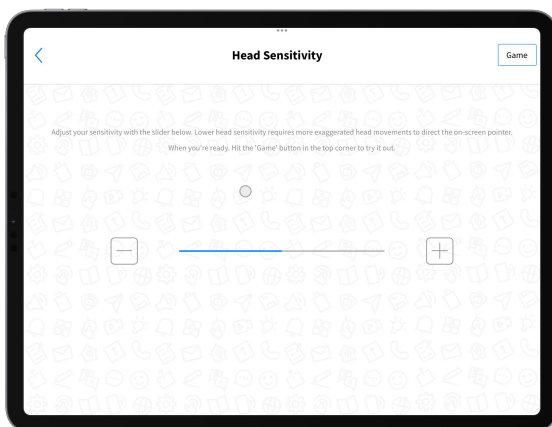

Head Sensitivity - Sie können die Fortschreitung des Cursors beeinflussen, indem Sie die Kopfsensitivität anpassen, die niedrige bis hohe Sensitivität bietet. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, zu kalibrieren, wie signifikant die Kopfbewegungen sein müssen, damit der Bildschirmcursor sich bewegt. Wenn Sie es zum Beispiel niedrig einstellen, müssen Sie Ihren Kopf eine größere Strecke zurücklegen, um den Cursor zu bewegen.

Head Position - Die App erwartet, dass sich Ihr Kopf in einer zentrierten Position in Bezug auf die Frontkamera befindet. Die besten Ergebnisse für die Standardeinstellung werden erzielt, wenn die Frontkamera des Geräts auf Augenhöhe ist, das Gerät gerade montiert ist und Sie sich zwischen 10 cm und 100 cm von der Nasenposition des Geräts entfernt befinden. Drücken Sie "Speichern", um ein Foto Ihrer Kopfposition zu machen, und die Kalibrierung wird anhand dieses Fotos vorgenommen.

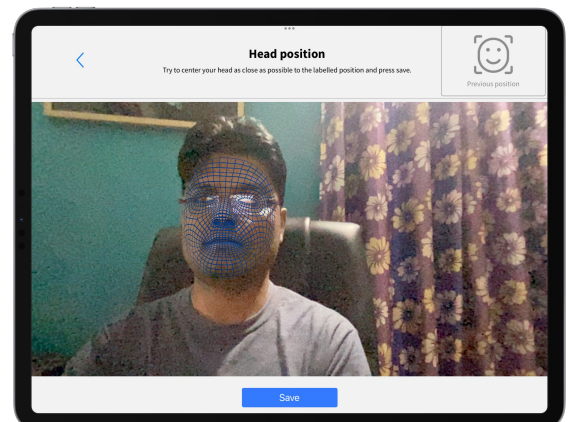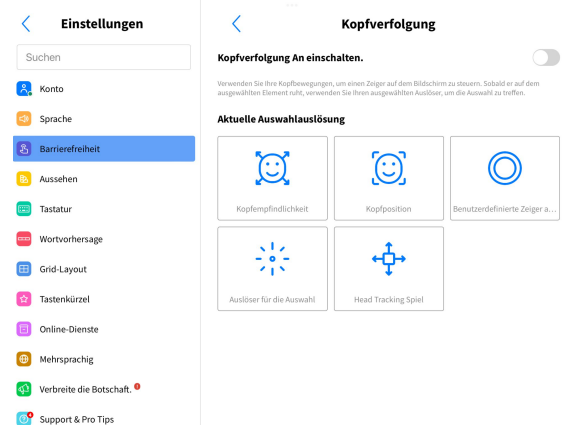



Anpassung des Zeigers - Die Anpassung des Zeigers ermöglicht es Benutzern, verschiedene Aspekte des Bildschirm-Zeigers zu personalisieren, indem sie ihn nach individuellen Vorlieben anpassen.

1) Zeiger-Einstellungen

- Aktiviere Cursor-Snap - Wenn aktiviert, fungiert der Zeiger als Schnappschuss auf dem Bildschirm für präzise Auswahl.

2) Zeiger-Aussehen

- Dieser Abschnitt bietet Anpassungsoptionen für das Aussehen des Zeigers. Benutzer können die Farbe für den Zeiger selbst wählen, die Farbe des Rahmens um den Zeiger festlegen und die Farbe definieren, die zum Hervorheben von Elementen auf dem Bildschirm verwendet wird.

Auswahl-Auslöser - Für die Auswahl bietet die Kopfverfolgung eine Vielzahl von Alternativen, mit denen Benutzer die für sie am besten geeignete Methode auswählen können. Die Auswahl-Auslöser umfassen:

- Hover - Zeigen Sie den Zeiger für eine vorgegebene Zeitdauer auf einem Element (Die Hover-Zeit kann zwischen 0,1 und 4 Sekunden betragen).
- Mund öffnen - Öffnen Sie Ihren Mund, um eine Auswahl auszulösen.
- Lächeln - Lösen Sie eine Auswahl durch Lächeln aus.
- Linkes Blinzeln - Blinzeln Sie mit dem linken Auge, um eine Auswahl auszulösen.
- Rechtes Blinzeln - Blinzeln Sie mit dem rechten Auge, um eine Auswahl auszulösen.
- Augen nach oben schauen - Schauen Sie nach oben, um eine Auswahl auszulösen.
- Augenbrauen hochziehen - Heben Sie Ihre Augenbrauen an, um eine Aktion auszulösen.
- Stirnrunzeln - Wählen Sie ein Element durch Stirnrunzeln aus.
- Wangen aufblasen - Blasen Sie Ihre Wangen auf, um die Auswahl auszulösen.
- Mund unten rechts - Bewegen Sie den inneren Teil Ihrer Augenbraue nach oben, um eine Auswahl zu initiieren.
- Augen nach unten schauen - Schauen Sie nach unten, um eine Auswahl auszulösen.
- Augen nach rechts schauen - Schauen Sie nach rechts, um eine Auswahl auszulösen.
- Augen nach links schauen - Schauen Sie nach links, um eine Auswahl auszulösen.




- Augen zusammenkneifen - Kneifen Sie die Augen zusammen, um eine Auswahl zu initiieren.
- Augen weit öffnen - Öffnen Sie die Augen weit, um eine Auswahl auszulösen.
- Mund puckern - Puckern Sie mit dem Mund, um eine Auswahl zu initiieren.
- Mund nach rechts - Bewegen Sie Ihren Mund nach rechts, um eine Auswahl auszulösen.
- Mouth Left - Bewegen Sie Ihren Mund nach links, um eine Auswahl zu initiieren.
- Mouth Lower Down Left - Bewegen Sie Ihren Mund nach unten links, um eine Auswahl auszulösen.
- Mouth Upper Up Left - Bewegen Sie Ihren Mund nach oben links, um eine Auswahl auszulösen.
- Mouth Upper Up Right - Bewegen Sie Ihren Mund nach oben rechts, um eine Auswahl zu initiieren.
- Cheek Squint Right - Schielen Sie mit der rechten Wange, um eine Auswahl auszulösen.
- Cheek Squint Left - Schielen Sie mit der linken Wange, um eine Auswahl zu initiieren.
- Mouth Shrug Lower - Senken Sie Ihren Mund, um eine Auswahl zu initiieren.
- Nose Sneer Left - Rümpfen Sie Ihre Nase nach links, um eine Auswahl auszulösen.
- Nose Sneer Right - Rümpfen Sie Ihre Nase nach rechts, um eine Auswahl zu initiieren.
- Brow Down Left - Senken Sie Ihre Augenbraue nach links, um eine Auswahl auszulösen.
- Brow Down Right - Senken Sie Ihre Augenbraue nach rechts, um eine Auswahl zu initiieren.
- Mouth Close - Schließen Sie Ihren Mund, um zu wählen.
- Mouth Frown Left - Runzeln Sie Ihren Mund nach links, um eine Auswahl auszulösen.
- Mouth Frown Right - Runzeln Sie Ihren Mund nach rechts, um eine Auswahl zu initiieren.
- Brow Inner Up - Heben Sie den inneren Teil Ihrer Augenbraue an, um eine Auswahl auszulösen.
- Brow Outer Up Left - Heben Sie den äußeren Teil Ihrer Augenbraue nach links, um eine Auswahl zu initiieren.
- Brow Outer Up Right - Heben Sie den äußeren Teil Ihrer Augenbraue nach rechts, um eine Auswahl auszulösen.
- Mouth Funnel - Formen Sie Ihren Mund wie ein Trichter, um eine Auswahl auszulösen.
- Mouth Press - Drücken Sie mit Ihrem Mund, um eine Auswahl zu initiieren.



Head-Tracking-Spiel - Das

Head-Tracking-Spiel dient als interaktive und unterhaltsame Möglichkeit für Benutzer, zu lernen, wie sie mit der App durch Kopfbewegungen interagieren können. Das Ziel dieses Spiels ist es, den Zeiger über einen Kreis zu bewegen, indem Sie Ihre Kopfbewegungen nutzen.

Das Head-Tracking-Spiel bietet eine angenehme und lehrreiche Erfahrung und ermöglicht es den Benutzern, sich mit den Head-Tracking-Funktionen der App vertraut zu machen.

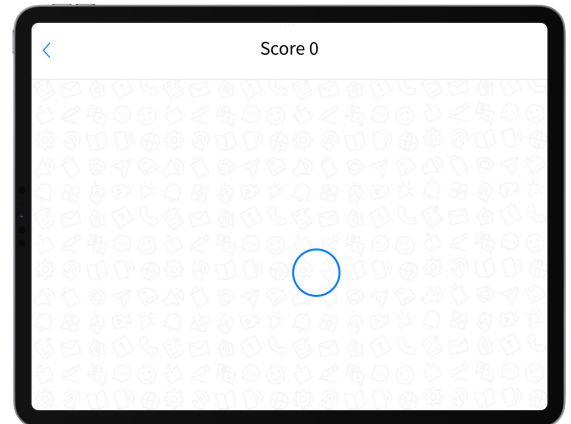

6.5. Augenverfolgung

Eye-Tracking ermöglicht es Ihnen, einen externen Eye Tracker zu verwenden, um auf Predictable über den Augenblick zu zugreifen und somit eine alternative und effiziente Interaktionsmethode bereitzustellen.

Für Eye-Tracking ist normalerweise ein iPad Pro erforderlich. Kontaktieren Sie Ihren Eye-Tracking-Hardwareanbieter für weitere Details. iOS 17 wird benötigt, um die Snap-to-Cell-Funktionalität von Apple nutzen zu können.

1. Schließen Sie Ihren Apple-zugelassenen Eye Tracker an und kalibrieren Sie ihn.
2. Navigieren Sie zu Geräteeinstellungen, Bedienungshilfen, Touch, aktivieren Sie Assistive Touch und suchen Sie Ihren Eye Tracker unter Geräten.
3. Wir empfehlen, Snap-to-Item zu aktivieren, falls verfügbar.



6.6. Zugriffskontrolle

Predictable bietet "Schneller Ausstieg" und "Einfrieren Cursor"

Zugriffskontrollen, um verschiedenen Benutzeranforderungen und -präferenzen gerecht zu werden. Jede Kontrolle ist darauf ausgelegt, die Zugänglichkeit zu verbessern und die Kommunikation zu optimieren. Die beiden verfügbaren Zugriffskontrollen sind:

Schneller Ausstieg - Einführung einer praktischen Funktion für nicht-direkte Touch-Zugriffsmethoden durch Aktivieren einer schwebenden Schaltfläche während des Spiels. Diese Schaltfläche ermöglicht einen schnellen Übergang und ermöglicht es Ihnen, die aktuelle Zugriffsmethode schnell zu verlassen und zum direkten Touch zurückzukehren.

Quick Exit



Enables a floating button in gameplay for non-direct touch access methods, this will enable you to quickly exit the access method and revert to direct touch.

Freeze Cursor - Einführung eines praktischen Features für Benutzer von Head-Tracking während des Spielens. Durch Aktivieren einer schwebenden Schaltfläche können Sie Ihren Head-Tracking-Cursor vorübergehend anhalten und so eine bequeme Möglichkeit zum Pausieren oder Unterbrechen von Interaktionen nutzen.

Freeze cursor



Enables a floating button in gameplay for Head Tracking. On use, this will allow you to pause your Head Tracking cursor and take a break.

Die schwebende Schaltfläche wird während des Head-Tracking-Spielens verfügbar. Tippen Sie auf die schwebende Schaltfläche, um den Head-Tracking-Cursor vorübergehend einzufrieren. Wenn Sie bereit sind, fortzufahren, tippen Sie erneut auf die Schaltfläche, um den Cursor aufzutauen und die Interaktionen fortzusetzen.

6.7. Auditiver Vorschau

Wenn die Funktion für die auditive Vorschau aktiviert ist, haben Sie die Flexibilität, die Stimme auszuwählen, in der Sie die gesprochene Darstellung hören möchten. Ein langes Drücken auf den ausgewählten Text löst eine auditive Vorschau aus und bietet Ihnen eine gesprochene Darstellung des Textes. Ein einzelnes Tippen auf den Text führt die Auswahl aus und ermöglicht Ihnen, mit Ihrer gewählten Option fortzufahren.



6.8. Bodenhalt

Floor Hold ist eine Funktion, die entwickelt wurde, um die Kommunikation zu verbessern, indem sie einen ausgewählten Satz spricht, während Sie Ihre Nachricht eingeben. Diese Funktion ist besonders nützlich, um Ihren Gesprächspartner darüber zu informieren, dass Sie dabei sind, eine längere Nachricht zu verfassen. Es gibt zwei Hauptbetriebsmodi für die Floor Hold-Funktion: Automatisch und Manuell.

- **Automatisch** - Im Automatikmodus spricht die App Ihren Floor Hold-Satz automatisch nach einer festgelegten Zeit aktiven Schreibens. Um diese Funktion zu aktivieren, navigieren Sie einfach zu den Einstellungen und aktivieren Sie die Option Automatische Floor Hold. Sobald aktiviert, werden Ihre vorab erstellten Floor Hold-Sätze nach einer festgelegten Dauer hörbar kommuniziert.
- **Manuell** - Im Gegensatz dazu müssen Sie im manuellen Modus die Floor Hold-Taste drücken, um sie zu aktivieren. Durch Drücken der Floor Hold-Taste wird Ihr ausgewählter Floor Hold-Satz gesprochen und bietet somit einen praktischeren Ansatz für die Verwendung dieser Funktion.

Anpassungsoptionen stehen zur Verfügung, um Floor Hold nach Ihren Wünschen zu verwalten. Sie können die Dauer im Automatikmodus festlegen und damit die Zeit bestimmen, bevor Ihre vorab erstellten Floor Hold-Sätze automatisch vorgelesen werden.

Es gibt drei unterschiedliche Anpassungen verfügbar:

- 1) Phrase hinzufügen
 - Fügen Sie Ihre eigene individuelle Floor-Hold-Phrase hinzu, indem Sie auf die Schaltfläche Neue Phrase hinzufügen tippen. Weisen Sie der Phrase entweder eine Audioaufnahme oder eine Text-zu-Sprache-Untertitelung zu.
- 2) Phrase bearbeiten
 - Bearbeiten Sie bestehende Phrasen, indem Sie die gewünschte Phrase antippen und die Bearbeiten-Option aus dem oberen Tooltip auswählen.
- 3) Phrase löschen
 - Um eine Floor-Hold-Phrase zu löschen, wählen Sie die Phrase aus, die Sie entfernen möchten, und drücken Sie dann die Löschen-Option aus dem oberen Tooltip.




6.9. Anruf und Facetime


Sie haben die Flexibilität, Anrufe zu tätigen, während Sie Predictable verwenden, um die Kommunikation über Text-zu-Sprache zu ermöglichen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass während Anrufen keine Audioaufnahmen, die an Phrasen angehängt sind, hörbar sind. Für Benutzer, die Head Tracking und Gesture Speak verwenden, ist es erforderlich, die Kamera bei FaceTime zur Kompatibilität zu deaktivieren.

Wählen Sie Ihre Anrufknopfpräferenz. Sie können wählen, ob Sie Ihre Kontaktliste anzeigen oder Ihren Favoritenkontakt anrufen möchten, wenn Sie die Anruffunktionstaste betätigen.

Sie haben auch die Flexibilität, die Anrufschaltfläche zu verwenden, um FaceTime-Anrufe mit iPads oder FaceTime- und Telefonanrufe mit iPhones zu tätigen.

Verwalten Sie Ihre Kontaktliste, indem Sie die Namen und Telefonnummern der Personen hinzufügen, mit denen Sie Ihre Nachrichten teilen möchten. Darüber hinaus können Sie einen Kontakt als Favoritenkontakt festlegen. Wenn die Funktion "Favoritenkontakt anrufen" aktiviert ist, wird dieser spezielle Kontakt immer angerufen.

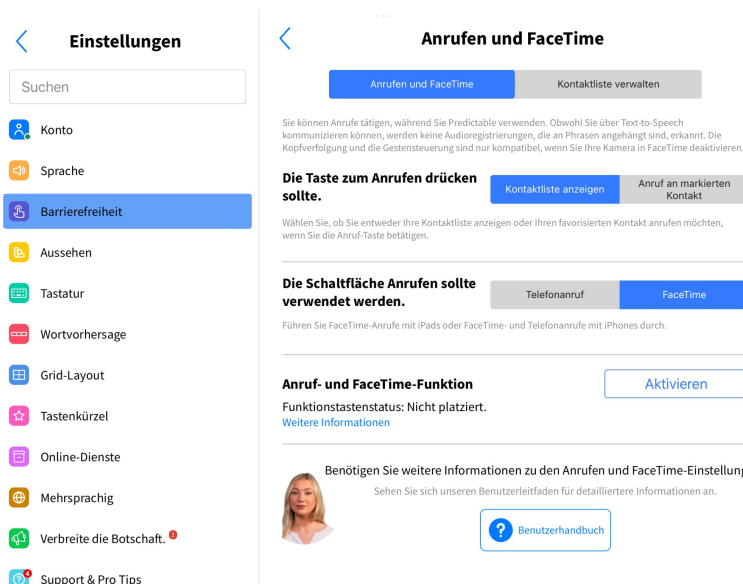

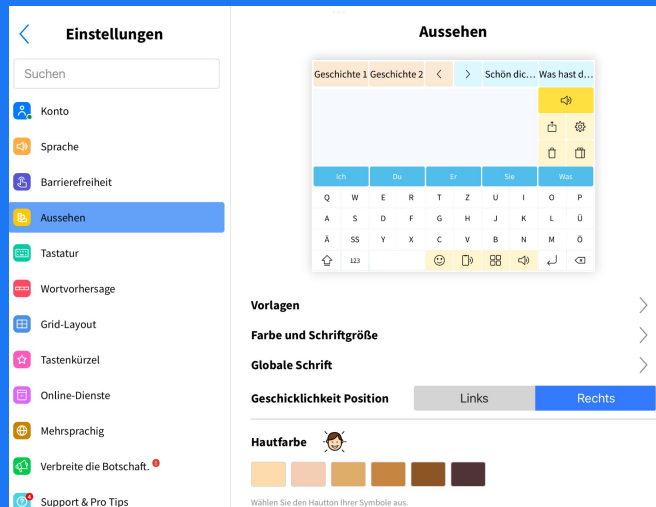


7. Erscheinungsbild-Einstellungen


7.1. Vorlagen

Predictable bietet vorgefertigte Vorlagen mit verschiedenen visuellen und Einstellungsanpassungen, die auf Benutzer mit unterschiedlichen Vorlieben und Anforderungen zugeschnitten sind. In den Erscheinungseinstellungen können Sie ganz einfach aus den vorgefertigten Vorlagen auswählen, um Ihre Erfahrung zu personalisieren.


Zusätzlich bietet Predictable eine benutzerdefinierte Vorlagenfunktion, mit der Benutzer ihre personalisierte Vorlage mit allen innerhalb der Predictable-App vorgenommenen Anpassungen speichern können. Dies bietet Benutzern die Flexibilität, ein einzigartiges und individuelles Erlebnis entsprechend ihren spezifischen Bedürfnissen zu schaffen.

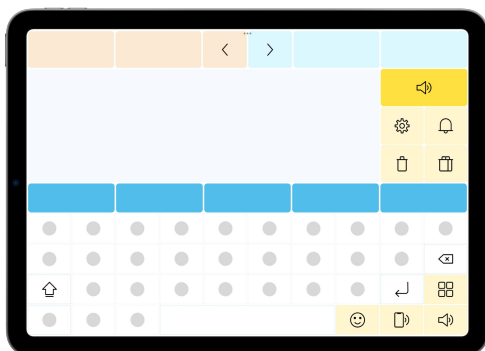


Standard: Die Standardvorlage dient als Standardvorlage in Predictable und umfasst den maximalen Satz verfügbarer Funktionen. Diese Vorlage bietet Benutzern eine umfassende und funktionsreiche Erfahrung innerhalb von Predictable.

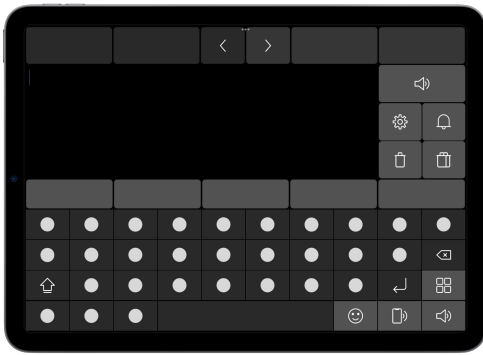


Dark: Das Dunkle Template ähnelt dem Standard Template, verfügt jedoch über ein dunkles Layout. Dieses Template eignet sich ideal für Nutzer, die eine visuell dunklere Oberfläche innerhalb von Predictable bevorzugen und bietet ein einzigartiges und personalisiertes visuelles Erlebnis..

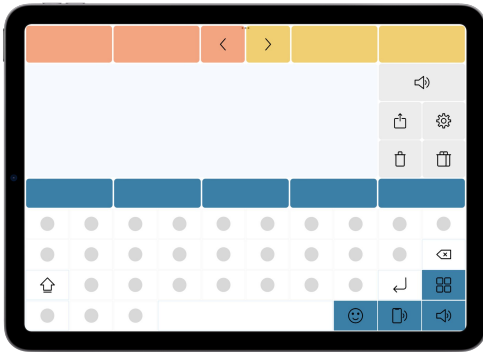


Classic: Das Klassische Template ähnelt dem Standard Template, verwendet jedoch die gleichen Voreinstellungen und Farben wie Predictable 6.

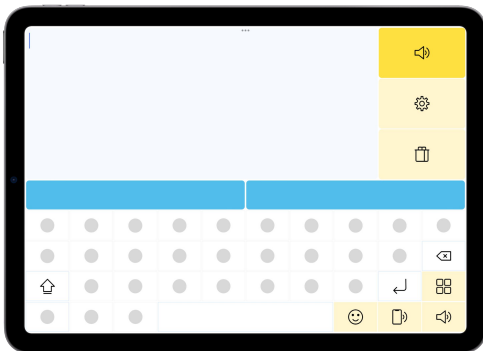


Getting Started: Dies ist das reduzierteste Template, das nur die grundlegenden Funktionen von Predictable bietet. Dieses vereinfachte Template ist besonders nützlich für Personen, die neu bei Predictable sind, da es eine allmähliche Einführung in die Funktionalitäten der App bietet.

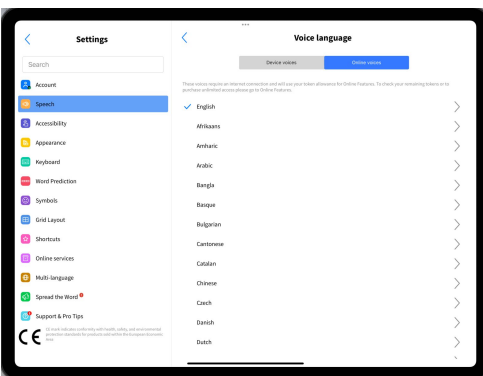


Shortcuts Keyboards: Dies ist ein neues Template in Predictable. Diese Tastatur ist mit verschiedenen Shortcuts ausgestattet, die das Benutzererlebnis innerhalb der App verbessern. Diese Shortcuts bieten schnellen und bequemen Zugriff auf alle Funktionen und vereinfachen die Navigation und Nutzung von Predictable.

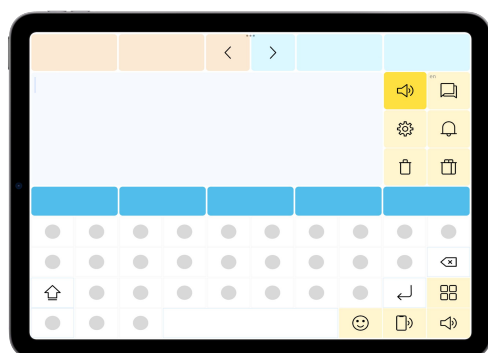


Offline: Die Auswahl des Offline-Modus schaltet alle Online-Funktionen aus. Diese Einstellung ist nützlich für Benutzer, die eine vollständig offline Erfahrung bevorzugen oder benötigen, um sicherzustellen, dass keine Online-Funktionen aktiv sind während der Nutzung von Predictable.

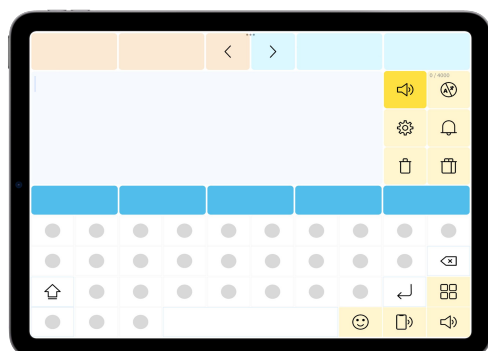


Translate: Die Auswahl des Übersetzen-Modus aktiviert die Übersetzungsfunktion innerhalb von Predictable. Diese Funktion ermöglicht die Übersetzung von getippten Phrasen in verschiedene verfügbare Sprachen. Benutzer können so einfach in verschiedenen Sprachen kommunizieren.

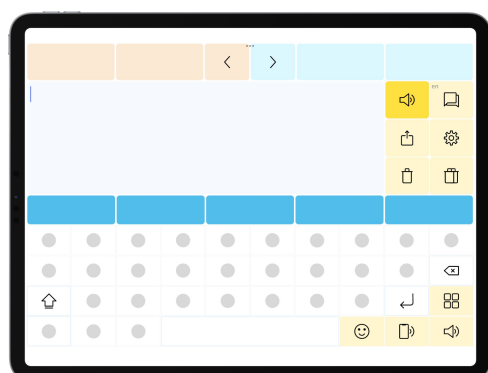


Multi Language: Die Auswahl des Mehrsprachen-Modus aktiviert die Mehrsprachenfunktion, mit der Benutzer die App in verschiedenen Sprachen konfigurieren können. Diese Funktion verbessert die Zugänglichkeit von Predictable für Benutzer, die die App in verschiedenen Sprachen nutzen möchten oder müssen.

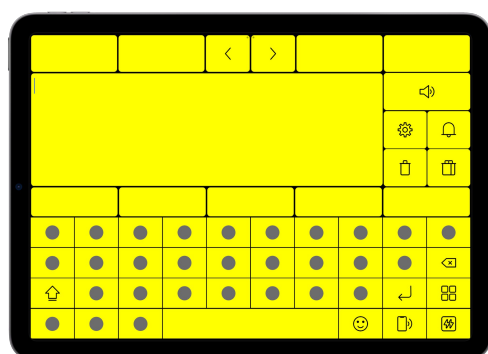


High Contrast: Die High-Contrast-Ansicht ist speziell für Benutzer mit eingeschränktem Sehvermögen konzipiert. Die Benutzeroberfläche in diesem Modus verwendet hoch kontrastierende Elemente, um die Navigation und Interaktion mit Predictable für Personen mit Sehbehinderungen zu erleichtern.

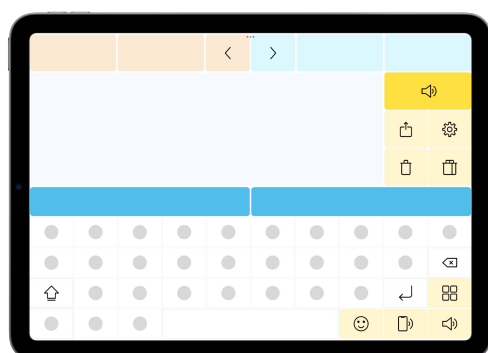


Low Vision: Die Auswahl des Low-Vision-Modus erhöht die Schriftgröße im Nachrichtenfenster und verbessert die Lesbarkeit für Benutzer mit Sehschwierigkeiten.

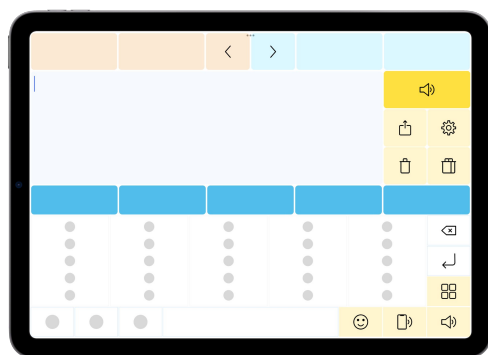


Ten Key: Durch die Auswahl des Ten-Key-Tastaturlayouts wird die Ten-Key-Tastatur als Standardoption festgelegt. Diese Tastaturanordnung ist darauf ausgelegt, eine bequeme und effiziente Möglichkeit zur Eingabe von Zahlen und Buchstaben mit größeren Zielflächen zu bieten.

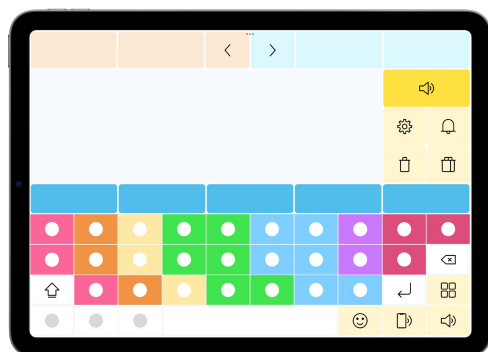


Dyslexia: Das Dyslexia-Layout stellt eine farbcodierte Tastatur vor, die speziell für Menschen mit Legasthenie entwickelt wurde. Diese Funktion zielt darauf ab, die Lesbarkeit und Benutzerfreundlichkeit für Personen mit Legasthenie zu verbessern und ein unterstützendes und zugängliches Schreiberlebnis in Predictable zu bieten.

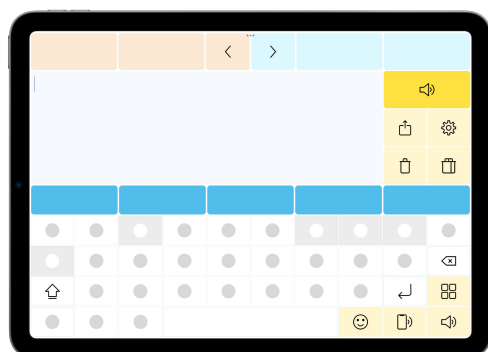


Vowel Keyboard: Das Vowel-Tastaturlayout bietet eine Benutzeroberfläche, die Vokale auf der Tastatur hervorhebt. Diese Anordnung ist besonders vorteilhaft für Personen mit schlechter Sicht und lenkt die Aufmerksamkeit auf wichtige Elemente. Ziel ist es, die Zugänglichkeit und Lesbarkeit in Predictable zu verbessern.

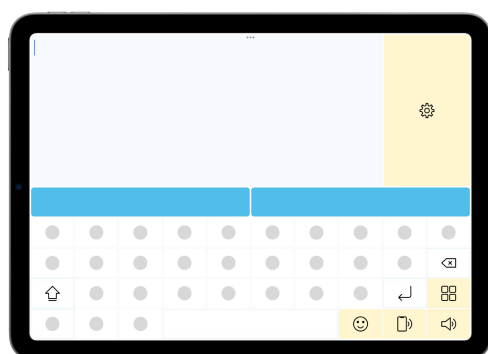


Tap to Speak: Das Tap-to-Speak-Layout bietet ein vereinfachtes Design mit minimalen Funktionen und betont ein vergrößertes Nachrichtenfenster. Benutzer können auf das Nachrichtenfenster tippen, um ihre Nachricht zu artikulieren, und so eine einfache und zugängliche Möglichkeit zur Kommunikation in Predictable schaffen.

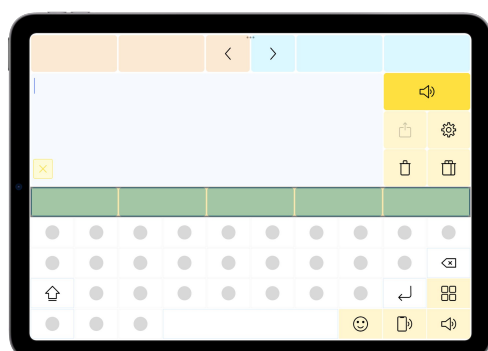


Screen Tap Access: Die Auswahl des Screen-Tap-Access-Layouts legt den Screen Tap als standardmäßige Zugänglichkeitsmethode fest. Dadurch können Benutzer mit Predictable interagieren, indem sie auf dem Bildschirm irgendwo tippen.

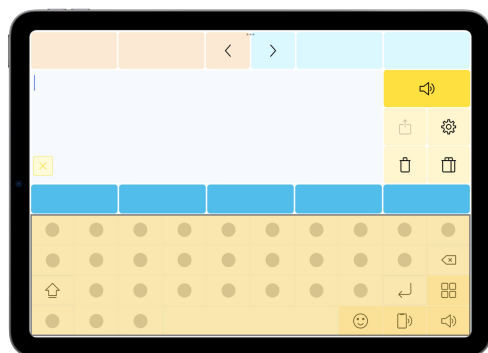


Switch Access: Durch die Auswahl der Switch Access Vorlage wird Switch Access als die Standard-Zugänglichkeitmethode festgelegt. Dadurch können Benutzer Predictable mithilfe von Schaltern navigieren und interagieren, was eine anpassbare und zugängliche Möglichkeit bietet, mit der App zu arbeiten.

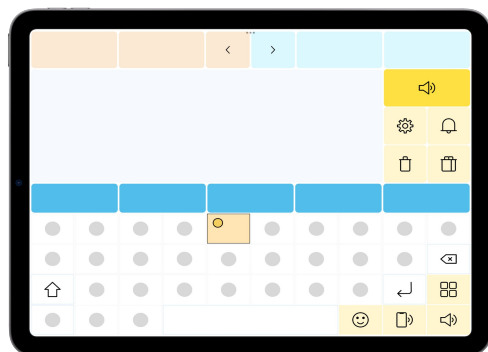

Head Tracking Hover: Durch die Auswahl der Head Tracking Hover Vorlage wird Head Tracking zur Standard-Zugänglichkeitmethode. Diese Funktion ermöglicht es Benutzern, durch Kopfbewegungen mit Predictable zu interagieren, wobei die Auswahl eines Elements durch Überfahren mit dem Cursor aktiviert wird.

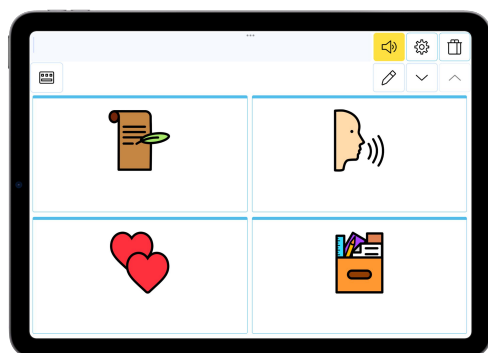

Grid 2*2: Die Auswahl der Grid 22 Vorlage konfiguriert das 2*2 Raster als Standard-Startseite in Predictable. Diese Einstellung vereinfacht die Benutzeroberfläche zu einem vereinfachten Rasterlayout, was die Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit erhöht.

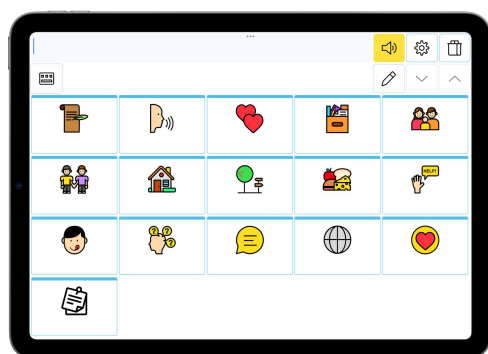

Grid 5*4: Durch die Auswahl der Grid - 54 Vorlage wird das 5*4 Raster als Standard-Startseite in Predictable festgelegt. Diese Wahl optimiert die Benutzeroberfläche, indem sie ein 5*4 Rasterlayout für verbesserte Zugänglichkeit und vereinfachte Navigation präsentiert.

Kindgerecht: Dies ändert die Farben auf dem Tastaturbildschirm zu helleren und bunteren Farben. Es aktiviert auch Symbole für das Nachrichtenfenster und die Vorhersageleiste.



7.2. Farb- und Schriftanpassungen

Während Predictable-Vorlagen eine umfassende Änderung des Gesamterscheinungsbildes der App bieten, haben Sie die Flexibilität, bestimmte Elemente über Farbcode-Schaltflächen anzupassen. Diese Schaltflächen ermöglichen es Ihnen, die Hintergrundfarbe, Schriftgröße und Schriftfarbe individuell für verschiedene Elemente innerhalb der App anzupassen.

Die Tabelle unten zeigt die visuellen Anpassungen für jede Funktion auf.


Funktion	Hintergrundfarbe	Schriftfarbe	Schriftgröße
Verlaufsbalken	✓	✓	✓
Favoritenbalken	✓	✓	✓
Nachrichtenfenster	✓	✓	✓
Wortvorhersage	✓	✓	✓
Tastenfeld	✓	✓	✓
App-Hintergrund	✓	✗	✗

Funktion	Visuelle Anpassung
Hintergrundfarbe	Dies ändert die Hintergrundfarbe für Elemente.
Schriftfarbe	Sie können eine benutzerdefinierte Farbe für den Text auswählen.
Schriftgröße	Sie können die Schriftgröße für Elemente nach Ihren Wünschen anpassen
Fette Tasten der Tastatur	Wenn Sie es einschalten, werden die Tasten der Tastatur fettgedruckt.



7.3. Andere Anpassungen

Globale Schriftart - Predictable bietet eine vielfältige Auswahl an Schriftarten, um Ihr Leseerlebnis zu verbessern. Wählen Sie aus den verfügbaren Schriftarten, um das globale Textaussehen anzupassen.


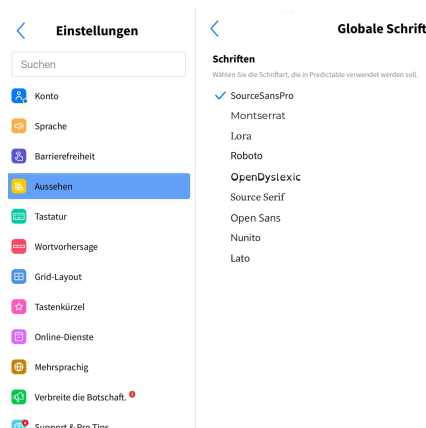


Dexterity Position - Optimieren Sie Ihre Benutzererfahrung, indem Sie die Position der am häufigsten verwendeten Schaltflächen basierend auf Ihrer dominanten Hand anpassen. Wählen Sie zwischen zwei Optionen:

1. Links: Ideal für Linkshänder.
2. Rechts: Anpassen für Rechtshänder.

Diese Funktion gewährleistet bequemen Zugriff auf Schaltflächen und verbessert die Benutzerfreundlichkeit und den Komfort entsprechend Ihrer bevorzugten Handhaltung.

Skin Tone - Personalisieren Sie das Erscheinungsbild der Symbole innerhalb der App, indem Sie den Hautfarbton anpassen. Wählen Sie aus verschiedenen Nuancen, um diverse Hautfarben darzustellen. Diese Anpassung gilt für Symbole in der gesamten App.

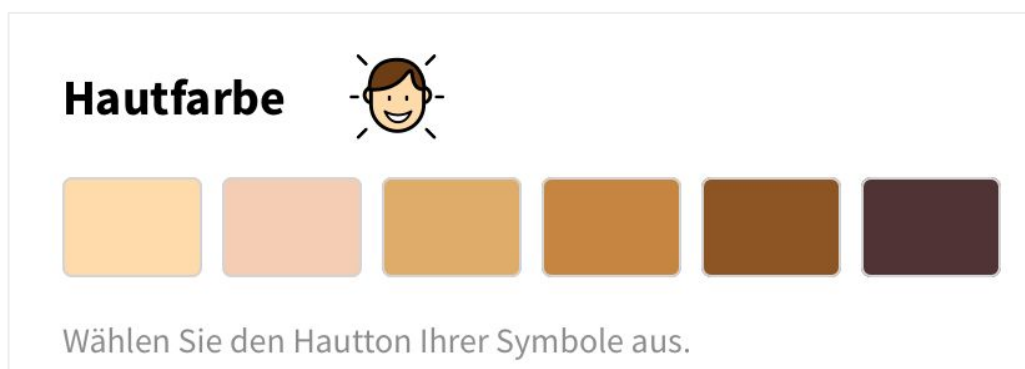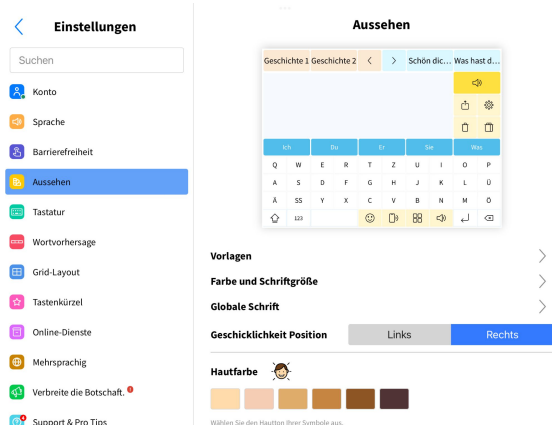





Anzeigen/Ausblenden Favoriten- und Verlauf-Leiste - Passen Sie die Predictable-Oberfläche nach Ihren Wünschen an, indem Sie auswählen, welche Funktionen auf dem Bildschirm angezeigt werden sollen. Sie können die folgenden Leisten anzeigen oder ausblenden:

1. **Favoriten-Leiste:** Entscheiden Sie, ob die Favoriten-Leiste angezeigt werden soll, um schnell auf häufig verwendete Ausdrücke zugreifen zu können.
2. **Verlauf-Leiste:** Legen Sie fest, ob die Verlauf-Leiste angezeigt werden soll, um einen schnellen Überblick über kürzlich gesprochenen Text zu erhalten.

7.4. Startbildschirm

Personalisieren Sie Ihre Predictable-Erfahrung, indem Sie den primären Bildschirm auswählen, den Sie beim Starten der Anwendung sehen möchten. Wählen Sie aus den folgenden Optionen:

- **Tastatur:** Setzen Sie die Tastatur als primären Bildschirm für sofortige Texteingabe.
- **Grid:** Wählen Sie das Grid für schnellen Zugriff auf gespeicherte Phrasen aus.

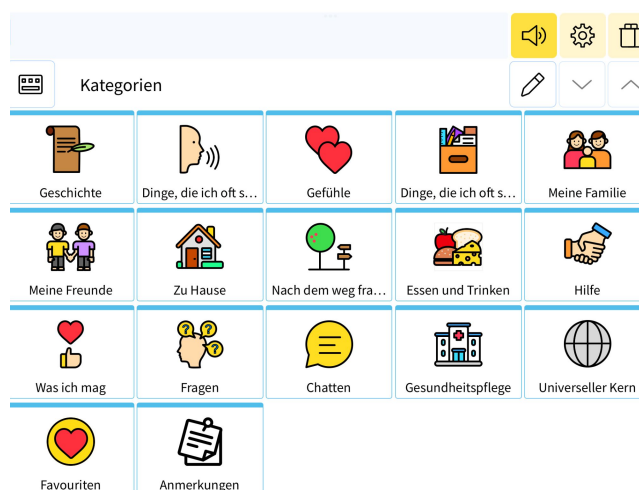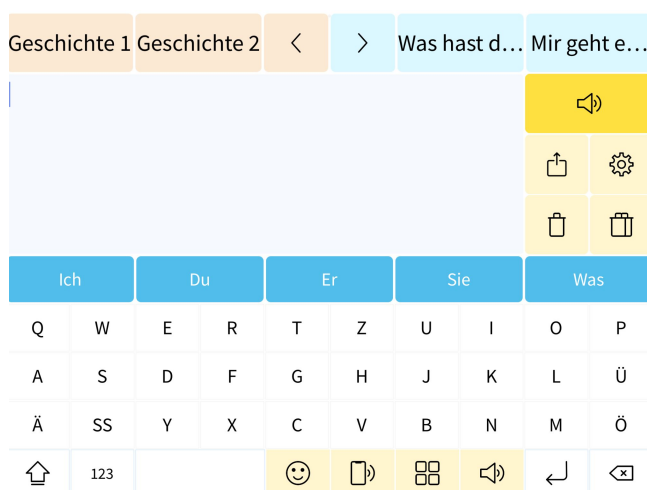



Geschichte 1		Geschichte 2		<	>	Was hast d...		Mir geht e...	
Ich		Du		Er		Sie		Was	
Q	W	E	R	T	Z	U	I	O	P
A	S	D	F	G	H	J	K	L	Ü
Ä	SS	Y	X	C	V	B	N	M	Ö
	123								

8. Tastatureinstellungen

8.1. Tastaturoptionen

Predictable bietet Benutzern sechs Tastaturoptionen und bietet damit vielfältige Kommunikationsmethoden. Zusätzlich unterstützt Predictable externe und Drittanbieter-Tastaturen, was die Flexibilität erhöht. Die sechs integrierten Tastaturoptionen umfassen:

Geschichte 1		Geschichte 2		<	>	Was hast d...		Mir geht e...	
Ich		Du		Er		Sie		Was	
Q	W	E	R	T	Z	U	I	O	P
A	S	D	F	G	H	J	K	L	Ü
Ä	SS	Y	X	C	V	B	N	M	Ö
	123								


QWERTZ - Die QWERTZ-Tastatur ist die Standardoption in Predictable und verfügt über das vertraute Design, das auf Computern und anderen mobilen Geräten zu finden ist. Mit ihrem Standardlayout ermöglicht die QWERTZ-Tastatur eine konventionelle Schreiberfahrung und ist daher eine intuitive Wahl für Benutzer, die an diese traditionelle Konfiguration gewöhnt sind.

Geschichte 1		Geschichte 2		<	>	Was hast d...		Mir geht e...	
Ich		Du		Er		Sie		Was	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	Ü
T	U	V	W	X	Y	Z	Ö	Ä	SS
	123								

ABC - Die ABC-Tastatur in Predictable listet die Tasten in alphabetischer Reihenfolge auf und bietet eine einfache und organisierte Anordnung. Diese Tastaturoption ist darauf ausgelegt, die Schreiberfahrung zu vereinfachen, insbesondere für Benutzer, die alphabetische Reihenfolge intuitiver finden.



Hochfrequenz-Tastatur - Die Hochfrequenz-Tastatur in Predictable ordnet die Tasten basierend auf ihrer Nutzungshäufigkeit. Das bedeutet, dass die am häufigsten verwendeten Buchstaben zuerst aufgeführt werden, während die weniger häufig verwendeten Buchstaben am Ende platziert sind. Die Hochfrequenz-Tastatur ist darauf ausgelegt, die Schreibgeschwindigkeit zu optimieren, indem die am häufigsten verwendeten Tasten leicht erreichbar sind und den Schreibprozess für eine verbesserte Effizienz optimieren.

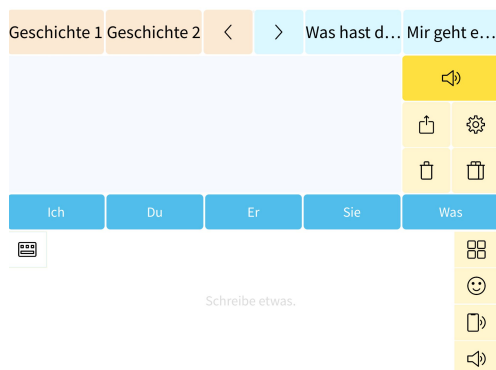

Schnellastatur - Die Schnellastatur-Option in Predictable bietet ein einzigartiges Design im Vergleich zu anderen Alternativen und verfügt über größere Zielbereiche für jede Tastenauswahl. Dieses Design ist besonders vorteilhaft für Personen, die von Touch-Anpassungseinstellungen profitieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tastaturen mit einzelnen Tasten für jeden Buchstaben ordnet die Schnellastatur Buchstaben in Gruppierungen. Zum Beispiel bildet ABCDE eine Buchstabengruppe. Um einen bestimmten Buchstaben auszuwählen, tippen Sie auf die entsprechende Gruppe, und die Tastatur passt sich dynamisch an, sodass Sie aus den Buchstaben innerhalb dieser Gruppierung wählen können. Sobald ein Buchstabe hinzugefügt wurde, kehrt die Tastatur nahtlos zur Hauptseite mit dem gleichen Gruppenformat zurück.



Native Tastatur - Die Native Tastatur-Option in Predictable ermöglicht es Ihnen, die Standardtastatur Ihres gewählten Geräts zu nutzen. Durch Auswahl dieser Option integrieren Sie nahtlos die vertraute Tastaturschnittstelle Ihres Geräts in Predictable und erhalten ein natives und intuitives Schreiberlebnis.



Alphabetentafel - Diese Tastaturoption bietet ein Alphabetentafel-Layout, bei dem die Vokale in der linken Spalte gruppiert sind. Die Wortvorhersage wird in einen 2x2-Bereich oben rechts auf der Tastatur verschoben, und zusätzliche Ja- und Nein-Tasten sind für schnellen Zugriff verfügbar.

Handschrift - Die Handschriftentastaturoption in Predictable ermöglicht es Ihnen, Text durch Handschrift einzugeben. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihre Nachrichten manuell zu schreiben und verleiht Ihrer Kommunikation eine einzigartige und persönliche Note.

Um die Handschriftentastatur zu verwenden, wählen Sie einfach die Option aus, und ein Bereich für die Handschrift erscheint im Nachrichtenfenster, wo Sie Ihre Nachrichten mit Ihrem Finger oder einem Stift zeichnen oder schreiben können.



Bluetooth-Tastatur - Verbessern Sie Ihr Schreiberlebnis in Predictable, indem Sie eine externe Bluetooth-Tastatur mit Ihrem Gerät verbinden. Diese Funktion bietet eine vertraute und effiziente Möglichkeit, Text einzugeben, insbesondere für Benutzer, die physische Tastaturen bevorzugen.

Um eine Bluetooth-Tastatur einzurichten und zu verwenden:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Bluetooth-Tastatur mit Ihrem Gerät gekoppelt ist.
- Navigieren Sie in der Predictable-App zu den Tastatureinstellungen.
- Wählen Sie die Option "Bluetooth-Tastatur verwenden" und aktivieren Sie sie.

Sobald aktiviert, wird Ihre externe Bluetooth-Tastatur nahtlos mit Predictable integriert, sodass Sie präzise und schnell tippen können.





8.2. Emojis

Predictable bietet eine vielfältige Sammlung von Emojis, um Ihr Nachrichtenerlebnis zu verbessern. Um diese ausdrucksstarken Symbole in Ihre Nachrichten einzubinden, greifen Sie auf die Emoji-Tastatur unten rechts auf Ihrer Tastatur zu.

Sie können Ihre Emojis im Abschnitt Tastatur in den Einstellungen anpassen. Wählen Sie dazu das Emoji aus, das Sie bearbeiten möchten, und dann wird das "Emoji bearbeiten"-Modell ausgelöst. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie Ihre Emojis anpassen können:

- A. **Name des Emojis** - Bearbeiten Sie den Namen des Emojis. Dieser Name wird vorgelesen, wenn Sie die Text-in-Sprache-Option für den Sound des Emojis wählen.
- B. **Sound des Emojis** - Es gibt drei verschiedene Arten von Sounds, die Sie Ihrem Emoji zuweisen können:
 - Nehmen Sie Ihre eigene Audio für das Emoji auf. Drücken Sie das "Audio aufnehmen"-Symbol, nehmen Sie die Audio auf, geben Sie einen Aufnahmenamen ein und speichern Sie die Aufnahme.
 - Wählen Sie aus den vorab aufgenommenen Sounds von Predictable für Emojis aus. Es stehen 22 verschiedene Sounds für Männer und Frauen zur Verfügung.
 - Optieren Sie für Text-in-Sprache, das den Namen des Emojis vorliest, wenn es in einer gesprochenen Nachricht verwendet wird.

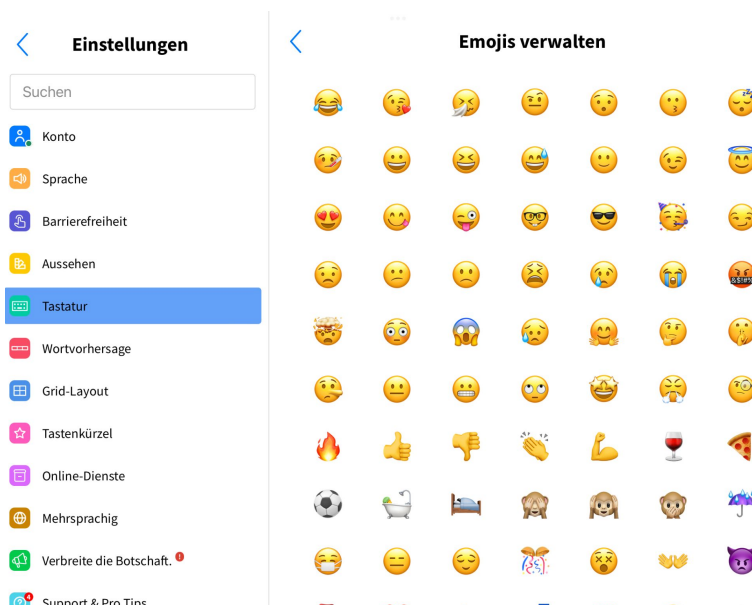

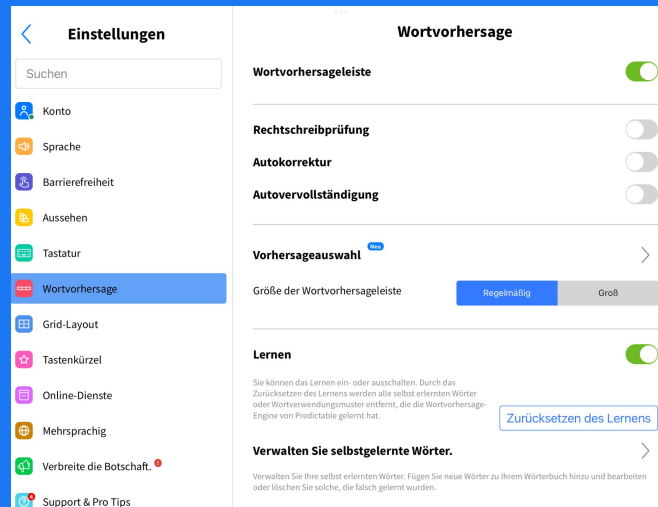

9. Wortvorhersage-Einstellungen

9.1. Wortvorhersage-Anpassung

Zusätzlich zur Anpassung Ihres Vokabulars bietet Predictable zusätzliche Optionen zur Anpassung Ihrer Wortvorhersagen. Gestalten Sie Ihre Wortvorhersageerfahrung, indem Sie den Predictable-Wortvorhersage-Engine aktivieren oder deaktivieren. Bei aktivierter Funktion schlägt der intuitive Wortvorhersage-Engine Wörter vor, während Sie basierend auf Ihren vorherigen Wörtern und eingegebenen Zeichen tippen, was den Nachrichtenerstellungsprozess optimiert.

Predictable bietet drei verschiedene Ansätze zur Identifizierung und Korrektur von Rechtschreibfehlern:

- **Rechtschreibprüfung:** Falsch geschriebene Wörter werden visuell orange markiert, was eine klare Anzeige für Überprüfung und Korrektur bietet.
- **Autokorrektur:** Predictable verfügt über eine Autokorrekturfunktion, die falsch geschriebene Wörter automatisch korrigiert, während Sie tippen, was den Tippvorgang optimiert.
- **Autovervollständigung:** Bei aktivierter Funktion wird das Wort, das Sie eingeben, vorhergesagt und der Rest des Wortes in Grau vervollständigt. Um das vorhergesagte Wort auszuwählen, tippen Sie einfach auf die Leertaste, was die grauen Buchstaben in Schwarz verwandelt.




9.2. Vorhersageleiste anpassen

Einführung eines neuen Features in Predictable, das die Anpassungsfähigkeit in Ihre Hände legt – die Prediction Choice. Jetzt können Sie das Layout Ihrer Wortvorhersageleiste im Nachrichtenfenster nach Ihren Wünschen anpassen. Wählen Sie von einem einzelnen Wort bis zu fünf einzelnen Wörtern, um Ihre Schreiberfahrung zu optimieren.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Größe der Wortvorhersageleiste auszuwählen:

- **Normal:** Dies ist die Standardgröße und bewahrt das übliche Erscheinungsbild der Wortvorhersageleiste.
- **Groß:** Die Wahl der großen Größe erhöht die Sichtbarkeit der Wortvorhersageleiste. Sie wird die Verlauf- und Favoritenleiste ausblenden, das Nachrichtenfenster leicht nach oben verschieben und sicherstellen, dass die Leiste perfekt sichtbar ist. Diese größere Leiste ist besonders vorteilhaft für die Anzeige von Vorhersagewörtern mit Symbolen.

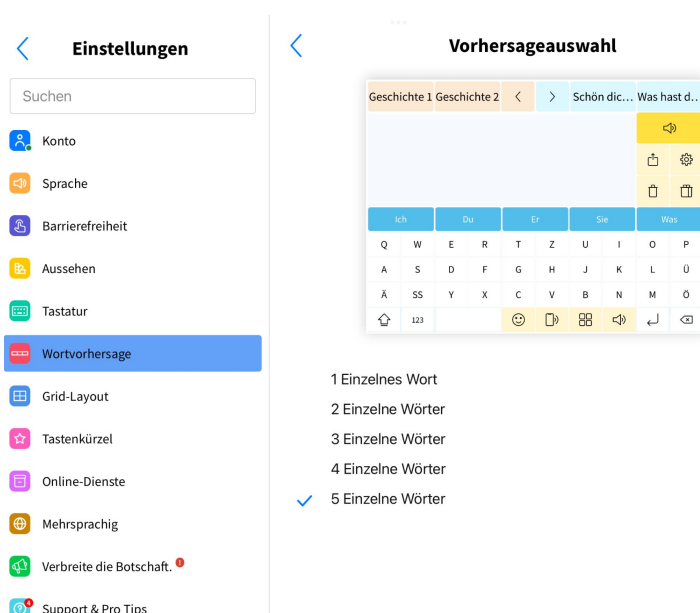




9.3. Lernen

Sie können das Lernen basierend auf Ihren Vorlieben ein- oder ausschalten. "Lernen zurücksetzen" ermöglicht es Ihnen, alle selbstgelernten Wörter oder Wortverwendungsweisen, die der Wortvorhersagemotor von Predictable erworben hat, zu löschen. Dies bietet einen frischen Start, wann immer nötig.

Im Abschnitt "Selbstgelernte Wörter verwalten" haben Sie die Flexibilität zu:

- **Hinzufügen:** Bestimmte Wörter in Ihr Wörterbuch aufnehmen, um sicherzustellen, dass Predictable sich an Ihren einzigartigen Wortschatz anpasst.
- **Löschen:** Korrigieren Sie etwaige Ungenauigkeiten, indem Sie selbstgelernte Wörter löschen. Tippen Sie einfach auf das Wort und wählen Sie die Löschoption aus.

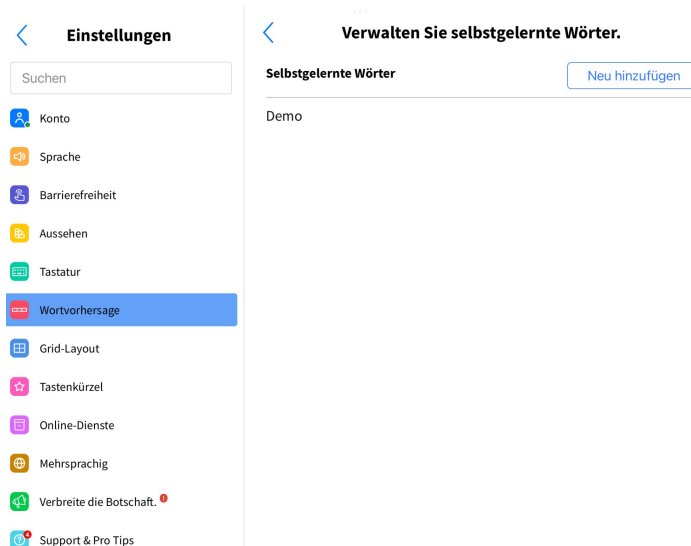


9.4. Schmutzwörter

Sie können wählen, ob Sie "Einschränken" oder "Zulassen" von unanständigen Wörtern in Ihren Vorhersagen möchten. Wenn diese Einstellung eingeschränkt ist, werden anstößige Wörter von den Wortvorhersagen ausgeschlossen. Darüber hinaus werden unanständige Wörter im Nachrichtenfenster mit Sternen versehen, was eine respektvolle und anpassbare Kommunikationsumgebung bietet.

Profane Words

Restrict

Allow

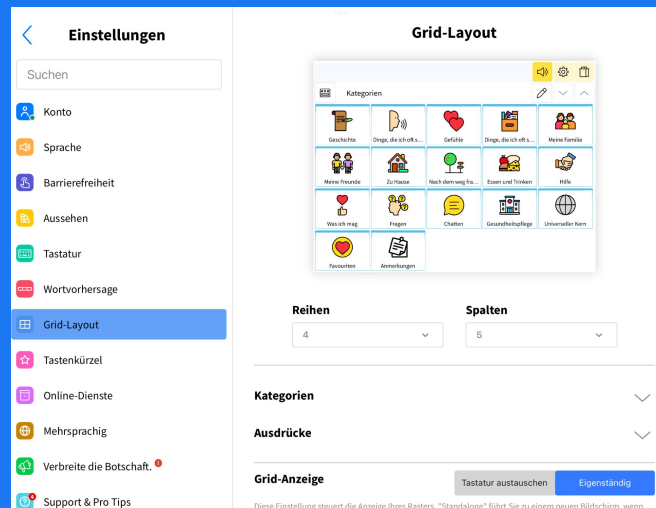

10. Grid Layout

10.1. Grid Größe

Verwenden Sie die Dropdown-Menüs für Zeilen und Spalten, um die Größe Ihres Grids zu bearbeiten. Sie können eine Vorschau darauf anzeigen, wie dies im Vorschaufenster über den Selektoren aussehen wird. Dies ändert sich, während Sie die Werte ändern.

Standardmäßig ist die Größe des Grids auf 4 Zeilen und 5 Spalten eingestellt. Sie können eine Listenstil-Phrasenbank erstellen, indem Sie den Spaltenwert auf 1 setzen.


10.2. Farben und Schriftanpassung

Durch Drücken der Kategorien- oder Phrasentitel in den Grid-Layout-Einstellungen können Sie die Einstellungsliste erweitern, um die Schriftgröße, Hintergrundfarbe, Schriftfarbe und Rahmenfarbe dieser Ansichten zu bearbeiten. Wählen Sie einfach über die Segmentsteuerung aus, welches Element Sie ändern möchten, und wählen Sie dann Ihre Farbe aus oder passen Sie den Maßstab nach Ihren Wünschen an.


10.3. Anzeigeeoptionen

Diese sind eine Gruppe anderer Anpassungen, die vorgenommen werden können, um die Grid-Anzeige zu personalisieren.

- **Grid-Anzeige** - Standalone ist die Vollbild-Grid-Anzeige, die auf Bild 1 unten zu sehen ist. "Tastatur ersetzen" ist eine Kombination aus der Grid- und der Tastatur-Anzeige, wobei die Grid den Tastaturbereich ersetzt. Zu sehen auf Bild 2.

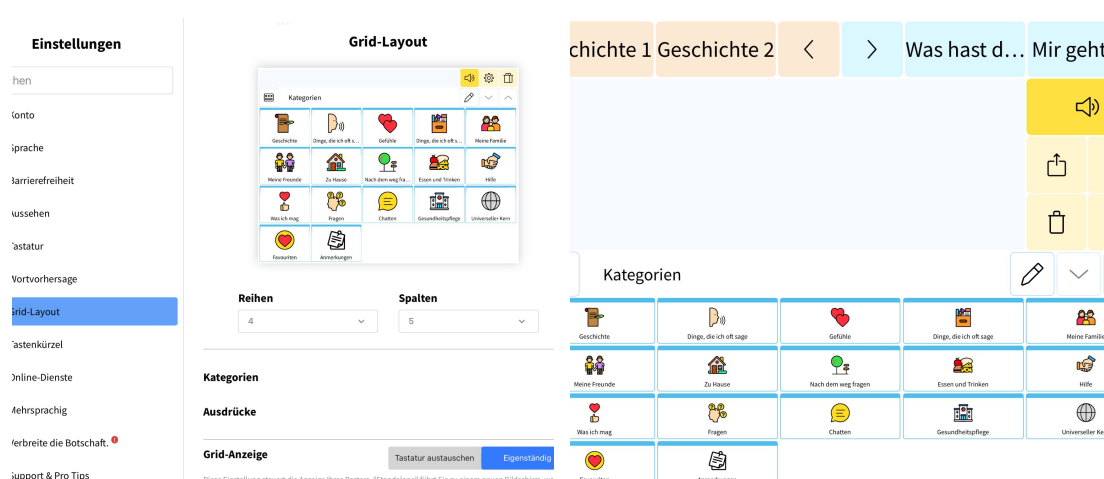

- **Kategorie/Phrase-Inhalt** - diese Optionen ermöglichen es Ihnen zu wählen, ob nur Text, nur das Symbol/Bild oder sowohl Symbol als auch Text für die Zellen in Ihrer Grid-Anzeige angezeigt werden sollen.
- **Grid-Nachrichtenfenster** - diese Einstellung zeigt oder verbirgt Ihr Nachrichtenfenster auf der 'Grid'-Anzeige.
- **Erscheinungsbild der Funktions-Tasten** - dies ermöglicht es Ihnen, die Hintergrundfarbe und die Iconfarbe der drei Funktions-Tasten zu ändern, die auf der Grid-Anzeige angezeigt werden. Drücken Sie einfach auf die Taste, die Sie ändern möchten, um die Anpassungsoptionen aufzurufen.
- **Scrollsperre** - dies ermöglicht es Ihnen, das physische Scrollen der Grid zu sperren, um versehentliche Auswahlen zu vermeiden. Einmal gesperrt, können Sie Ihre Grid-Optionen ausschließlich mit den Pfeiltasten nach oben und unten auf dem Bildschirm scrollen

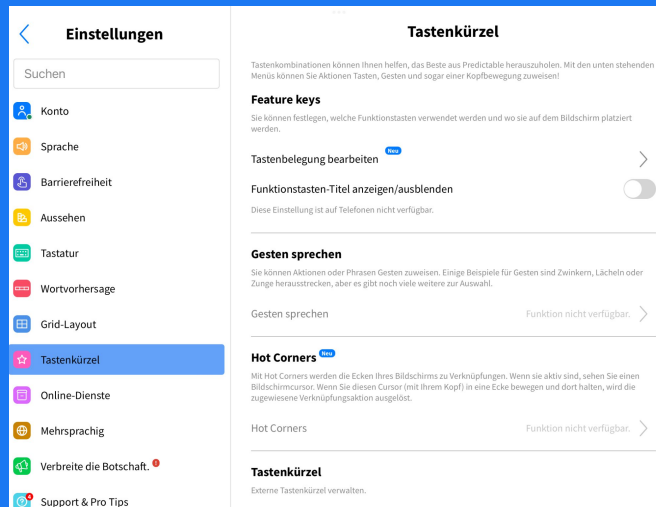

11. Verknüpfungen

11.1. Funktionstasten

Feature-Tasten sind die gelben Tasten auf dem Tastaturbildschirm. Es gibt 10 verfügbare Plätze dafür. Diese Tasten können verschiedenen Aktionen zugewiesen werden und somit nach Ihren Bedürfnissen personalisiert werden.

Durch Betreten des Funktionstasten-Bearbeitungsbildschirms können Sie die Aktionen ändern, die Ihren Funktionstasten zugewiesen sind, und auch die Hintergrund-/Symbolfarbe ändern.

Drücken Sie einfach auf die Position der Taste, die Sie ändern möchten, um das Anpassungsfenster zu öffnen. Drücken Sie dann auf das Dropdown-Menü, um alle verfügbaren Optionen durchzusehen und auszuwählen. Mehr zu jeder dieser Optionen finden Sie im Abschnitt Alle Aktionen.


Drücken Sie die Segmentsteuerung für Hintergrund-/Symbolfarbe, um die Farben für jede dieser Tasten zu personalisieren.



11.2. Gesture Speak

Gesture Speak ermöglicht es Ihnen, verschiedene Aktionen und Phrasen Gesten wie Lächeln, Wangen aufblasen und Mund öffnen zuzuweisen.


Drücken Sie auf "Neu hinzufügen" und wählen Sie dann entweder "Phrasen" oder "Aktionen" aus der Segmentsteuerung. Drücken Sie, um Ihre Option auszuwählen, und ein Häkchen sollte daneben erscheinen. Wählen Sie dann die Gesichtsgeste aus, die Sie verwenden möchten, um sie auszulösen. Sobald Sie mit Ihrer Auswahl zufrieden sind, können Sie auf "Speichern" drücken. Stellen Sie sicher, dass Sie "Gesten sprechen" aktivieren, bevor Sie es ausprobieren.

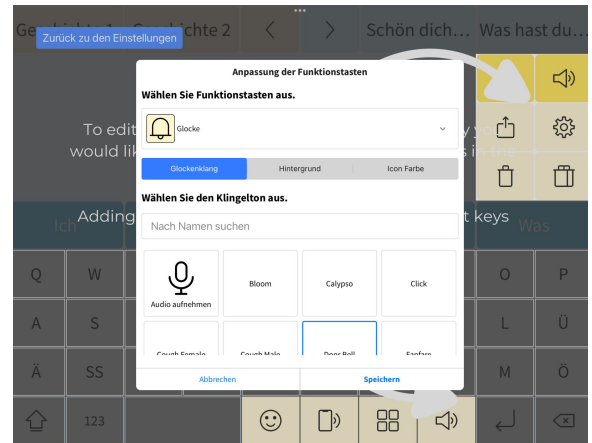

Wenn Sie feststellen, dass Ihre Gesichtsgesten nicht wie erwartet funktionieren, können Sie in die Einstellungen für Barrierefreiheit, Kopfverfolgung, Auslöser für die Auswahl gehen und die Geste kalibrieren, die Sie verwenden.

11.3. Hot Corners

Hot corners ermöglichen es Ihnen, Aktionen und Phrasen den vier Ecken Ihres Bildschirms zuzuweisen. Diese sind dann über die Kopfverfolgung zugänglich. Beachten Sie, dass Sie die Kopfverfolgung nicht aktiviert haben müssen, um die Hot Corners nutzen zu können.

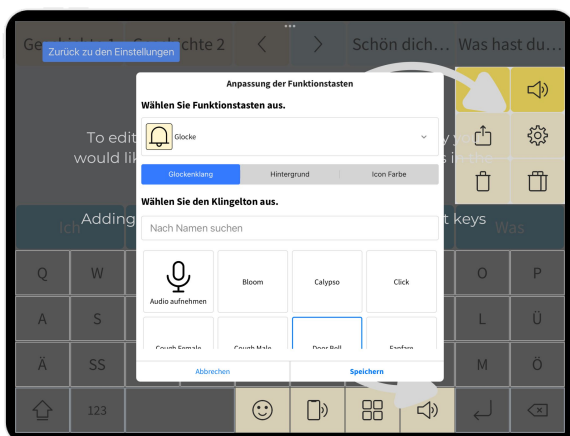

Um eine Hot Corner zuzuweisen, tippen Sie auf die Stelle, die Sie als Auslöser festlegen möchten, und wählen dann die Aktion oder Kategorie, die Sie zuweisen möchten. Nach dem Speichern steht Ihnen Ihre Hot Corner zur Verfügung. Stellen Sie sicher, dass Sie Hot Corners aktivieren, bevor Sie es ausprobieren.



11.4. Tastenkombinationen für externe Tastaturen

Mit Tastenkombinationen können Sie einer Aktion oder einem Ausdruck eine Verknüpfung auf Ihrer externen Tastatur zuweisen. Durch Drücken dieser Verknüpfung auf Ihrer externen Tastatur wird dann die zugewiesene Aktion aufgerufen oder der zugewiesene Ausdruck an das Nachrichtenfenster gesendet.

Um eine Verknüpfung zuzuweisen, drücken Sie auf "Neue hinzufügen". Wählen Sie dann die Aktion oder den Ausdruck sowie die Verknüpfungstasten aus. Nach dem Speichern steht Ihre Verknüpfung zur Verfügung. Stellen Sie sicher, dass Sie die Tastenkombinationen aktivieren, bevor Sie es ausprobieren.

11.5. Alle Aktionen

Hot Corners erlauben es Ihnen, Aktionen zuzuweisen und


- **Phrase zum Raster hinzufügen** - Wenn gedrückt, wird dies den Text, der sich derzeit in Ihrem Nachrichtenfenster befindet, als Phrase in Ihrem Raster speichern. Es wird automatisch in der obersten Ebene Ihres Rasters gespeichert, Sie können den Speicherort zu einem späteren Zeitpunkt ändern, wenn nötig.
- **Glocke** - Dies ermöglicht es Ihnen, eine Audiodatei auszuwählen: entweder TTS, eine Audioaufnahme oder eine ausgewählte Audiodatei, die abgespielt wird, wenn die Glockentaste gedrückt wird.
- **Anrufen und FaceTime** - Diese Funktion kann in den Einstellungen für Barrierefreiheit eingerichtet werden. Wenn gedrückt, ermöglicht Ihnen diese Taste das Durchführen eines Anrufs oder FaceTime.
- **ChatGPT** - Schreiben Sie Ihre Anfrage in das Nachrichtenfenster, und wenn diese Taste gedrückt wird, holt Predictable eine Antwort von ChatGPT ab, die in Ihrem Nachrichtenfenster angezeigt oder vorgelesen wird. Die Möglichkeiten sind endlos!
- **Kopieren** - Diese Taste kopiert jeden Text, der sich derzeit in Ihrem Nachrichtenfenster befindet, in Ihre Zwischenablage.
- **Alles löschen** - Wenn gedrückt, wird dies alle Texte aus Ihrem Nachrichtenfenster löschen.



- **Löschen** - Wenn gedrückt, wird das letzte Wort im Nachrichtenfenster gelöscht.
- **Zeichnen** - Wenn gedrückt, wird der Benutzer zu einem Bildschirm geleitet, auf dem er ein Bild zeichnen kann. Drücken Sie die Löschtaste, um den Bildschirm zu löschen, die Rückgängig-Taste, um Ihren letzten Strich rückgängig zu machen, und die Farben, um Ihre Stiftfarbe auszuwählen. Oben auf dem Bildschirm kann der Benutzer wählen, einen Glockenklang abzuspielen, den Bildschirm umzudrehen, um die Zeichnung anzuzeigen, oder die Zeichnung im Bildauswahlmenü zu speichern.
- **Duales Nachrichtenfenster** - Dies teilt Ihr Nachrichtenfenster in zwei Segmente auf und kehrt das obere Segment um. Dadurch können Sie anderen Personen problemlos Ihren Text zeigen, während Sie tippen, um die Kommunikation zu beschleunigen.
- **Dwell runter** - Bei Verwendung der Kopfsteuerung mit der Dwell-Auswahl als Auslöser verringert das Drücken dieser Taste inkrementell Ihre Verweildauer.
- **Dwell hoch** - Bei Verwendung der Kopfsteuerung mit der Dwell-Auswahl als Auslöser erhöht das Drücken dieser Taste inkrementell Ihre Verweildauer.
- **Emoji-Tastatur** - Diese Taste schaltet Ihre Tastatur zur Emoji-Tastatur um. Diese Emojis spielen Audio ab, wenn sie gesprochen werden. Diese Audios können in den Einstellungen angepasst werden.
- **Zufällige Ausdrücke** - Diese Taste spricht eine zufällige Auswahl Ihrer voreingestellten Zufallsausdrücke. Diese Ausdrücke können in den Einstellungen angepasst werden.
- **Grid-Ansicht** - Wenn gedrückt, navigiert dies Sie zur Grid-Ansicht in Predictable. Hier können Sie Ausdrücke anpassen und sprechen und sie in Kategorien organisieren.
- **Handschrift** - Diese Taste schaltet Ihre Tastatur zur Handschrift-Tastatur um, mit der Sie Ihre Nachrichten handschriftlich verfassen können.
- **Home-Assistent** - Wenn diese Taste gedrückt wird, wird ein „Weckwort“ am Anfang Ihres Textes im Nachrichtenfenster hinzugefügt und gesprochen, sodass Sie mit Ihrem Home-Assistenten interagieren können (z. B. Alexa). Dieses Weckwort kann angepasst werden, wenn Sie diese Funktionstaste auswählen.



- **Mehrsprachig** - Diese Taste ermöglicht es Ihnen, zwischen Ihrer primären und sekundären Sprache zu wechseln, während Sie unterwegs sind. Sie können diese Sprachen einrichten, indem Sie zum Mehrsprachig-Seitenbereich in den Einstellungen navigieren.
- **Notizen** - Durch Drücken dieser Taste gelangen Sie zur Notizen-Ansicht. Hier können Sie den Inhalt Ihres Nachrichtenfensters als Notiz speichern, zuvor gespeicherte Notizen bearbeiten und sprechen sowie Ihre Notizen in einer Vollbildansicht für längere Inhalte anzeigen.
- **Einfügen** - Mit diesem Schlüssel wird Text in Ihr Nachrichtenfenster eingefügt, der zuvor in die Zwischenablage kopiert wurde. Am besten in Kombination mit der Kopierfunktionstaste verwenden.
- **Privatsphäre-Modus** - Wenn gedrückt, wird der Privatsphäre-Modus je nach vorherigem Zustand ein- oder ausgeschaltet. Erfahren Sie mehr über den Privatsphäre-Modus im Abschnitt "Kontoeinstellungen" dieses Benutzerhandbuchs.
- **Bildschirmtipp** - Durch Drücken dieses Schlüssels wird die Bildschirmtipp-Zugriffsmethode neu gestartet.
- **Einstellungen** - Dieser Schlüssel führt Sie zu den Einstellungsbildschirmen von Predictable.
- **Teilen** - Durch Drücken dieses Schlüssels wird das Freigabemenü aufgerufen, damit Sie Ihre Nachricht in verschiedenen anderen Apps teilen können.
- **Tastatur für Verknüpfungen** - Wenn gedrückt, ändert dieser Schlüssel Ihre Tastatur in die Tastatur für Verknüpfungen. Hier sind alle hier aufgeführten Aktionen an einem Ort verfügbar.
- **Anzeigen** - Dies ermöglicht es Ihnen, Ihr Nachrichtenfenster auf den Vollbildmodus zu erweitern. In dieser Ansicht werden vier Tasten oben auf dem Bildschirm angezeigt: Zurück zur Tastatur, Glocke, Umdrehen und Sprechen.
- **Sprechtaste** - Mit dieser Taste wird die Nachricht im Nachrichtenfenster mithilfe Ihrer gewählten TTS-Stimme vorgelesen.
- **Zugang wechseln** - Durch Drücken dieses Schlüssels wird die Zugangsmethode wechseln neu gestartet.
- **Übersetzen** - Durch Drücken dieses Schlüssels wird der Inhalt in Ihrem Nachrichtenfenster in die ausgewählte Sprache übersetzt und mit einer kompatiblen TTS-Stimme vorgelesen.
- **Rückgängig machen** - Dies macht die zuvor auf dem Text im Nachrichtenfenster durchgeführte Aktion rückgängig.

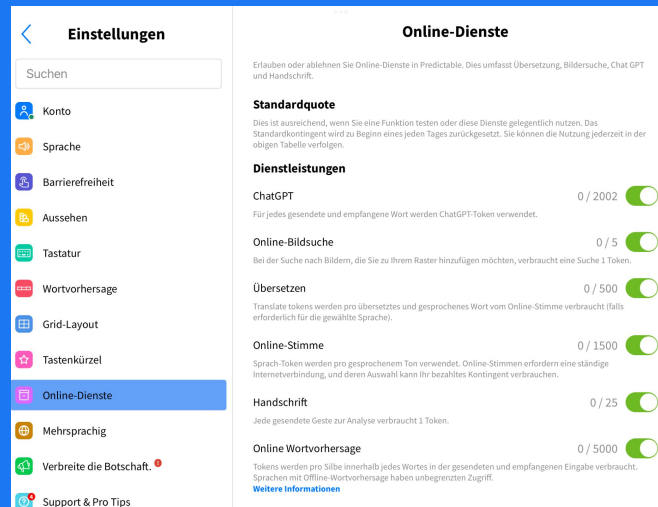


12. Online-Dienste

Einige Funktionen innerhalb von Predictable 7 erfordern eine Internetverbindung, um zu funktionieren. Diese können im Tab "Online-Dienste" ein- und ausgeschaltet werden.

13.1. Kontingente

Diese Funktionen verursachen fortlaufende Kosten für uns, um sie bereitzustellen, daher gibt es eine Quote, um sicherzustellen, dass wir sie für alle bereitstellen können. Die Standardquote wird jeden Tag zurückgesetzt. Sie können Ihre Nutzung jederzeit verfolgen, indem Sie die verfügbaren Zahlen im Tab "Online-Funktionen" überprüfen.

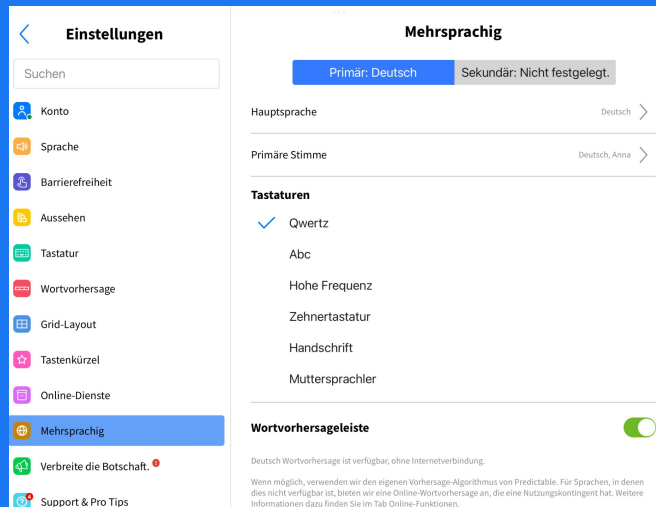

13. Mehrsprachig

13.1. Primäre und Sekundäre Sprachen

Die Multi-Language-Funktion in Predictable ermöglicht es Ihnen, eine primäre und eine sekundäre Sprache auszuwählen. Dadurch können Sie unterwegs zwischen diesen Sprachen wechseln und Ihre Tastatur und Stimme entsprechend anpassen. Wenn Sie eine unserer Kernsprachen als primäre Sprache wählen, ändert sich der gesamte Text der App-Navigation in Ihre gewählte Sprache. Sie können unsere vollständige Liste der Sprachen mit Informationen darüber, welche Kernsprachen es gibt, im Abschnitt **Verfügbare Sprachen** einsehen.

Um Ihre primäre und sekundäre Sprache auszuwählen, gehen Sie zum Tab **Multi-Language** in den Einstellungen und wählen Sie **Primär/Sekundär** im Segmentsteuerung oben auf der Seite aus. Drücken Sie dann die oberste Option für **Primäre/Sekundäre Sprache**, um aus unserer Liste der verfügbaren Sprachen zu wählen.

13.2. Stimmen

Die Auswahl der verfügbaren Geräte- und Online-Stimmen hängt von der gewählten Sprache ab. Wenn Sie eine Online-Stimme auswählen, wird dies Ihr Online-Features-Kontingent nutzen und eine konstante Internetverbindung erfordern.



13.3. Wortvorhersage

Im Abschnitt "Verfügbare Sprachen" steht die vollständige Liste der Sprachen mit Details darüber, ob die Wortvorhersage online oder offline verfügbar ist. Die offline Wortvorhersage ist ohne Verbrauch Ihres Kontingents verfügbar und kann sowohl online als auch offline verwendet werden. Die

Online-Wortvorhersage verbraucht Ihr Kontingent und ist nur verfügbar, wenn Sie mit dem Internet verbunden sind. Besuchen Sie die Seite "Online-Dienste" des Benutzerhandbuchs für weitere Informationen zu Kontingenten.

Wenn Sie eine Sprache mit Online-Wortvorhersage verwenden und Ihr Kontingent aufgebraucht ist, lohnt es sich zu prüfen, ob eine native Tastatur mit Wortvorhersage verfügbar ist.

13.4. Grid

Bei der Auswahl einer Primär- oder Sekundärsprache können Sie wählen, ob Sie Ihr Standard-grid hinzufügen oder ersetzen möchten. Die Auswahl von "Ersetzen" übersetzt die Standardkategorien und Phrasen und ersetzt Ihr vorheriges grid. Die Auswahl von "Hinzufügen" fügt den Inhalt des grid in Ihrer Fokus-Sprache zum aktuellen grid hinzu, den Sie bereits haben

13.5. Mehrsprachiger Funktionswahltasten


Um nahtlos zwischen Sprachen auf Ihrem Tastaturbildschirm zu wechseln, muss eine Mehrsprachige Funktionswahltaste installiert sein. Gehen Sie dazu zu den Predictable-Einstellungen, wählen Sie "Kurzbefehle", "Funktionswahltasten bearbeiten" und wählen Sie die Taste aus, die Sie ersetzen möchten. Wählen Sie dann die Option "Mehrsprachig" und speichern Sie Ihre Auswahl. Sie können dann diese Taste auf dem Tastaturbildschirm drücken, um Ihre Tastatur und Stimme sofort zwischen den Sprachen zu wechseln.



13.6. Verfügbare Sprachen

1. Arabic 	16. Hindi	31. Romanian
2. Bangla	17. Hungarian	32. Russian
3. Bulgarian	18. Indonesian	33. Slovak
4. Catalan	19. Italian 	34. Somali
5. Chinese	20. Japanese	35. Spanish  
6. Croatian	21. Kannada	36. Swedish  
7. Danish  	22. Korean	37. Tamil
8. Dutch  	23. Maithili	38. Telegu
9. English  	24. Malay	39. Thai
10. Finnish 	25. Marathi	40. Turkish
11. French  	26. Norwegian  	41. Ukrainian
12. German  	27. Persian	42. Urdu
13. Greek	28. Polish	43. Vietnamese
14. Gujarati	29. Portuguese 	
15. Hebrew 	30. Punjabi	


Hier ist eine Liste der verfügbaren Sprachen, die Sie in der Mehrsprachenoption wählen können. Die Sprachen mit einem grünen Quadrat () sind unsere Kernsprachen, für die eine Übersetzung der Navigationsbeschriftungen verfügbar ist, wenn sie als Primärsprache ausgewählt werden. Die Sprachen mit einem violetten Quadrat () bieten eine offline Wortvorhersage, alle anderen Sprachen nutzen eine Online-Wortvorhersage.

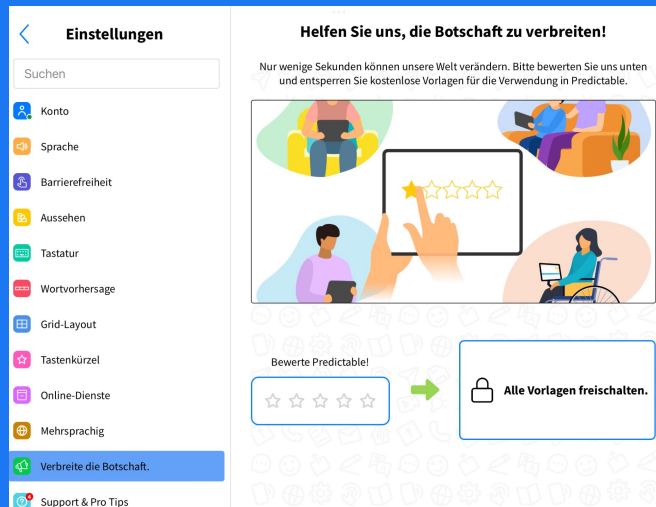

14. Verbreite die Nachricht

Auf dem "Verbreiten Sie die Nachricht"-Bildschirm können Sie alle Vorlagen innerhalb von Predictable freischalten, indem Sie uns eine Bewertung im App Store hinterlassen. Die Vorlagen werden automatisch freigeschaltet, sobald Ihre Bewertung registriert ist.

Bewertungen sind für uns wirklich nützlich, da sie anderen Benutzern und Sprach- und Sprachtherapeuten signalisieren, dass sie unsere App nützlich finden. Außerdem ermutigt es uns, weiter daran zu arbeiten, sie noch besser zu machen!

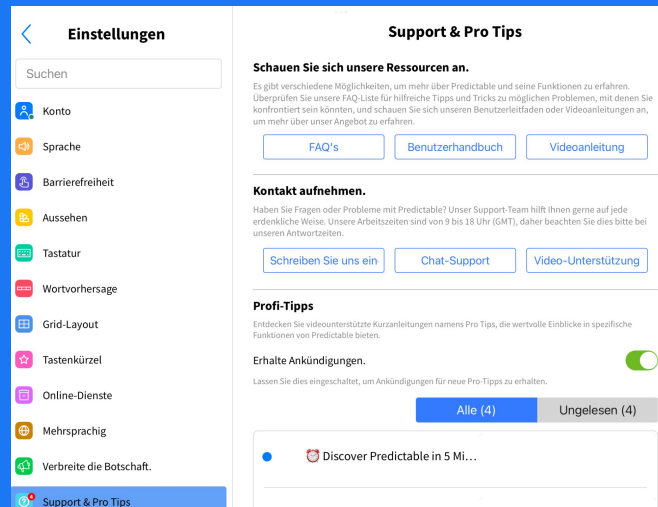

15. Unterstützung

15.1. Ressourcen

Wir haben eine Vielzahl von Unterstützungsressourcen für Sie, um mehr über Predictable zu erfahren. Wenn das Layout dieses Benutzerhandbuchs nicht am nützlichsten für Sie ist, haben wir auch Videoanleitungen auf unserem TherapyBox YouTube-Kanal verfügbar. Zusätzlich können Sie unsere FAQs auf unserer Website für schnelle Informationen und Fixes besuchen.

15.2. Kontaktieren Sie uns


Wenn Sie lieber mit einem Mitglied unseres Teams sprechen möchten, können Sie uns eine E-Mail an support@therapy-box.co.uk senden oder uns über den Chat kontaktieren (Link in der App oder auf unserer Website).


Sie können auch eine kostenlose Einzel- oder Gruppenschulung oder Unterstützungssitzung mit einem Mitglied unseres Teams buchen, entweder um mehr über Predictable zu erfahren oder um spezifische Probleme zu beheben. Dies kann über den Calendly-Link in der App oder auf unserer Website gebucht werden.



15.3. Pro Tipps

Pro Tipps ermöglichen es Ihnen, mehr über die Funktionen in Predictable zu erfahren und informiert zu werden, wenn neue Updates verfügbar sind. Alle bisherigen Pro Tipps werden im Bereich "Support & Pro Tipps" in den Einstellungen aufgelistet. Diejenigen mit einem blauen Punkt sind ungelesen, und dieser Punkt verschwindet, sobald Sie mit dem Tipp interagiert haben. Neue Tipps werden als modale Ankündigung angezeigt, Sie können jedoch wählen, diese Einstellung zu deaktivieren.

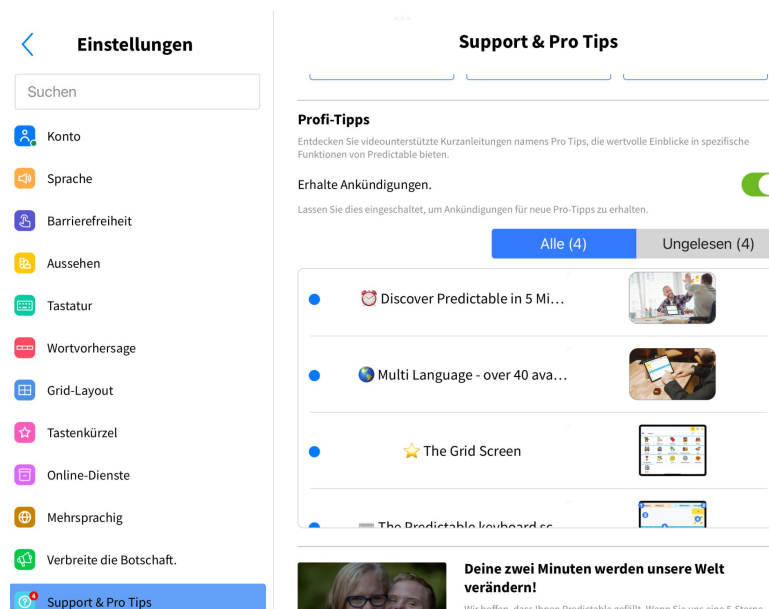

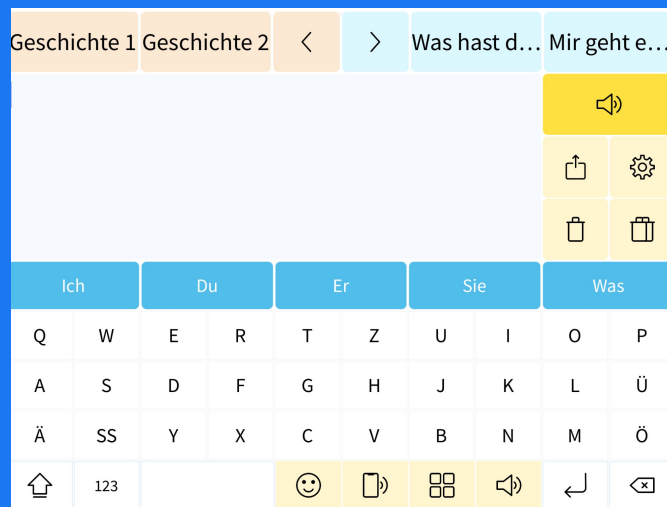

16. Webplattform

16.1. Was ist die Predictable Webplattform?

Bitte beachten Sie, dass die Webplattform für die Verwendung mit Predictable-Konten aller Sprachen zugänglich ist, alle Texte und Informationen auf der Webplattform jedoch in Englisch sind und daher für einige Benutzer möglicherweise nicht nutzbar sind.

Die Predictable Webplattform ermöglicht es Ihnen, sich remote in Ihr Predictable-Konto einzuloggen und Änderungen vorzunehmen. Sie können Ihre Einstellungen verwalten, Gitterinhalte bearbeiten sowie Bilder und Audio importieren und exportieren. Die Webplattform ist kompatibel mit dem Format von myMessageBanking.com, um den Import zu erleichtern.

Bitte beachten Sie, dass die Webplattform nur genutzt werden kann, wenn Sie ein online Predictable-Konto verwenden. Wenn Sie offline sind, können die Daten nicht geteilt und aktualisiert werden.

Webplattform-Link: <https://predictable-cms-4f655.web.app/>



16.2. Einstellungen

Über die Webplattform können Sie Ihre Predictable-Einstellungen ferngesteuert bearbeiten. Dies ist genauso aufgebaut wie in der App, sodass es einfach sein sollte, Einstellungen zu finden und Änderungen vorzunehmen. Einstellungen, die eine Änderung auf dem Gerät erfordern, werden auf der Webplattform ausgegraut angezeigt und können nicht bearbeitet oder aktiviert/deaktiviert werden. Dies umfasst Einstellungen wie das Aktivieren von Kopfverfolgung.

16.3. Grid

Im Abschnitt Grid der Webplattform können Sie Kategorien und Phrasen in Ihrem Grid hinzufügen, bearbeiten und löschen. Alle gleichen Anpassungsoptionen wie in der App sind hier verfügbar.

Drücken Sie die Schaltfläche "Kategorie hinzufügen", um eine Kategorie hinzuzufügen. Sobald eine neue Zeile in der Tabelle erscheint, können Sie einen Anzeigenamen und ein Bild oder Symbol hinzufügen. Alle Spalten mit einem Bindestrich bieten Anpassungsmöglichkeiten nur für Phrasen. Drücken Sie dann die Schaltfläche "Erweitern" am Ende der Zeile, um in die Kategorie zu gelangen und Phrasen sowie Unterkategorien hinzuzufügen.

Drücken Sie die Schaltfläche "Phrase hinzufügen", um eine neue Phrase hinzuzufügen. In der neuen Zeile, die erscheint, können Sie Anpassungen wie Anzeigetext, Sprechtext, Audio und Bild hinzufügen.



16.4. Bilder und Audio

Bilder

Im Bilder-Tab können Sie alle Bilder anzeigen, löschen und herunterladen, die mit Ihrem Predictable-Konto verbunden sind. Dies kann auf der Webplattform viel einfacher sein als in der App, da Sie Elemente mit den Kontrollkästchen auf der linken Seite jeder Zeile in der Masse auswählen können. Um neue Bilder für Ihre Rasteransicht hochzuladen, drücken Sie die Upload-Schaltfläche oben rechts und wählen Sie von Ihrem Gerät aus.

Audio

Im Audio-Tab können Sie alle Audio-Dateien anzeigen, löschen und herunterladen, die in Ihrem Predictable-Konto gespeichert sind. Auf die gleiche Weise wie bei Bildern können Sie Elemente mit den Kontrollkästchen auf der linken Seite jeder Zeile in der Masse auswählen, um Aktionen effizienter für mehrere Elemente durchzuführen.