

Clevy Keyboard 3

BENUTZERHANDBUCH – WWW.CLEVY.COM – REV 1.3 – 20-07-2026

Dieses Handbuch wurde gemäß den Barrierefreiheitsanforderungen der EN 301 549 erstellt und ist mit Screenreadern kompatibel.

Vielen Dank für den Kauf Ihrer Clevy Tastatur. In diesem Handbuch erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie alles einrichten und nutzen – kabelgebunden oder drahtlos – und wie Sie die smarten Funktionen optimal einsetzen.

1. Einführung

Die Clevy Tastatur ist eine minimalistische, vielseitige und angenehm taktile mechanische Tastatur. Sie bietet barrierearme Schreiblösungen für Menschen, die Unterstützung beim Tippen benötigen, und ist zugleich eine gute Einstiegstastatur für Kinder. Sie verwendet taktile **ALPS-Schalter** für eine klare, intuitive Rückmeldung.

1.1 Zweckbestimmung

Die Clevy Keyboard 3 ist ein Eingabehilfsmittel für Texteingaben. Sie unterstützt Menschen, für die eine Standardtastatur weniger gut funktioniert – zum Beispiel bei motorischen, visuellen oder kognitiven Herausforderungen – und eignet sich außerdem als Einstiegstastatur für Kinder. Große, kontrastreiche Tastenkappen, ein angepasstes Schriftbild und optionale Fingerführungen (Keyguards) fördern eine präzise Tastenbetätigung und reduzieren unbeabsichtigte Eingaben.

1.2 Einsatzindikationen

- Menschen mit eingeschränkter Feinmotorik oder reduzierter Handkraft, die von größeren Tasten und Keyguards profitieren.
- Menschen mit Sehbeeinträchtigung, die große, kontrastreiche Tasten und ein klares Schriftbild benötigen.
- Menschen mit besonderen Entwicklungsbedürfnissen (z. B. Autismus oder Lernherausforderungen), die eine einfache, strukturierte Eingabe bevorzugen.
- Kinder im Vorschul- oder Grundschulalter zum Erlernen der Tastaturnutzung.

1.3 Nicht geeignet für

Nicht geeignet für:

- Nutzerinnen/Nutzer, die ohne zusätzliche Zugangslösungen keine bewussten Tastenbetätigungen ausführen können.
- Nutzerinnen/Nutzer mit so starker motorischer Einschränkung, dass eine Tastatur nicht bedienbar ist.
- Nutzerinnen/Nutzer ohne ausreichende kognitive Fähigkeiten zur Computerbedienung.

Allgemeine Richtlinie: Nicht verwenden, wenn der vorgesehene Zweck nicht erreichbar ist oder wenn medizinischer Rat wiederholte, intensive Fingerbewegungen abrät.

1.4 Mögliche Risiken

- Fehlfunktion oder elektrischer Schaden bei Nutzung in nassen oder stark verschmutzten Umgebungen.
- Beschädigung durch Stürze oder mechanische Stöße.
- Ergonomische Belastung durch anhaltend ungünstige Körperhaltung oder Überlastung.
- Erstickungsgefahr, falls kleine Teile wie Tastenkappen sich lösen. Außer Reichweite kleiner Kinder aufbewahren.
- Oberflächen-/Finishschäden durch aggressive Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.

1.5 CE- und MDR-Kennzeichnung sowie Produktidentifikation

Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) und trägt die CE-Kennzeichnung. Klassifizierung: Klasse I, nicht messend, nicht steril.



Hersteller: Alt. Medical B.V., Wasaweg 3a, 9723 JD Groningen, Niederlande
SRN: NL-MF-000022878

Die Kennzeichnung erfüllt die MDR-Anforderungen, einschließlich Hersteller, Produktidentifikation und Serien-/Chargenangaben. Der UDI-Träger (DataMatrix) und die menschenlesbare Form sind auf Produktetikett und Verpackung gemäß MDR Anhang I, 23.2(q) und Anhang VI Teil C angebracht.

Die von dieser IFU abgedeckten Geräte sind hier aufgeführt: [Product Identification Data](#). Dieses Dokument enthält Produktcodes, Artikelnummern sowie Basic-UDI-DI und UDI-DI aller Varianten.

Optionale Zubehörteile (kein MDR, keine UDI-DI):

- Clevy Cover 3 – transparente Silikonhülle (CLCO3, 102524)
- Clevy Discover Italienisch CLDC2-CO-IT, 102510
- Clevy Discover Niederländisch CLDC2-CO-NL, 102511
- Clevy Discover Deutsch CLDC2-CO-DE, 102513
- Clevy Discover Belgisch CLDC2-CO-BE, 102583

Hinweis zu Layoutvarianten und UDI-DI

Werden ausschließlich Tastenkappen getauscht, um das sichtbare Layout zu ändern, bleibt die UDI-DI auf dem Produktetikett unverändert. Nur das Layoutetikett der Verpackung wird aktualisiert. So vermeiden wir Verwechslungen und erhalten die Rückverfolgbarkeit, da keine wesentlichen Konstruktions-, Leistungs- oder Sicherheitsmerkmale geändert werden.


EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt unterliegt der EU-Konformitätserklärung des Herstellers gemäß Verordnung (EU) 2017/745. Die Erklärung ist auf Anfrage unter info@altproducts.com erhältlich oder über www.clevy.com abrufbar.


1.6 Beschreibung

1. USB-C-Anschluss
2. Linke RGB-LED
3. Rechte RGB-LED
4. Batteriefach
5. Verstellbare Füße (zum Anheben der Tastatur)
6. Wireless Mode-Schalter
7. Kopplungstaste
8. Key Repeat / Function Keys Tool (Wiederholung / Funktionstasten-Werkzeug)
9. Flüssigkeitsablauföffnungen

1.7 Vorderansicht

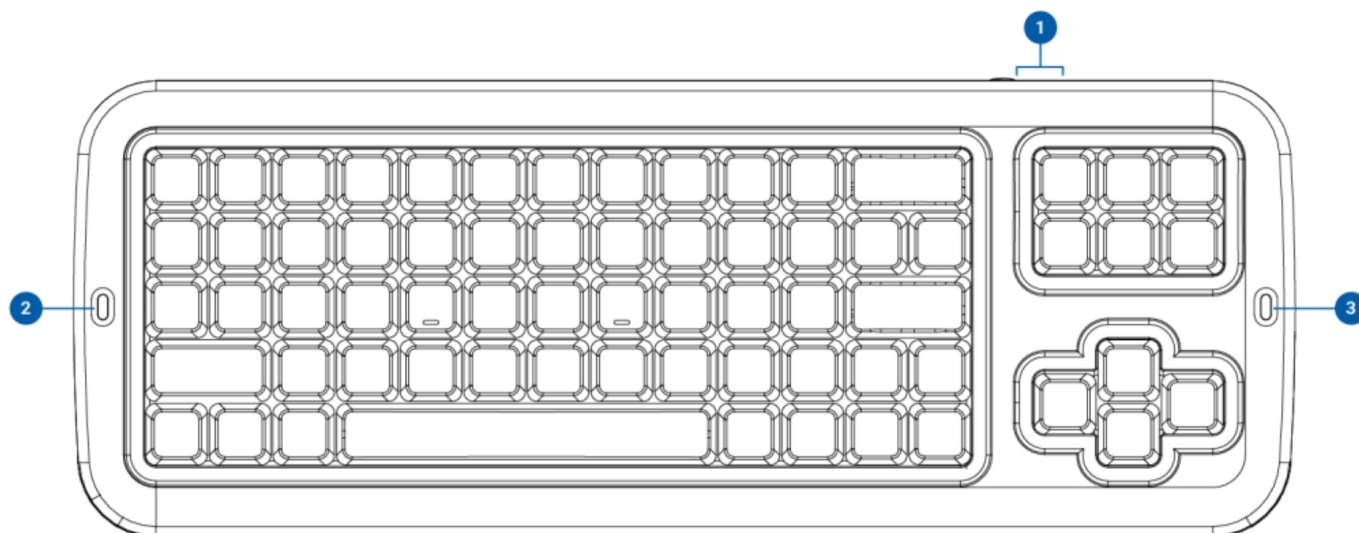

1.8 Rückansicht

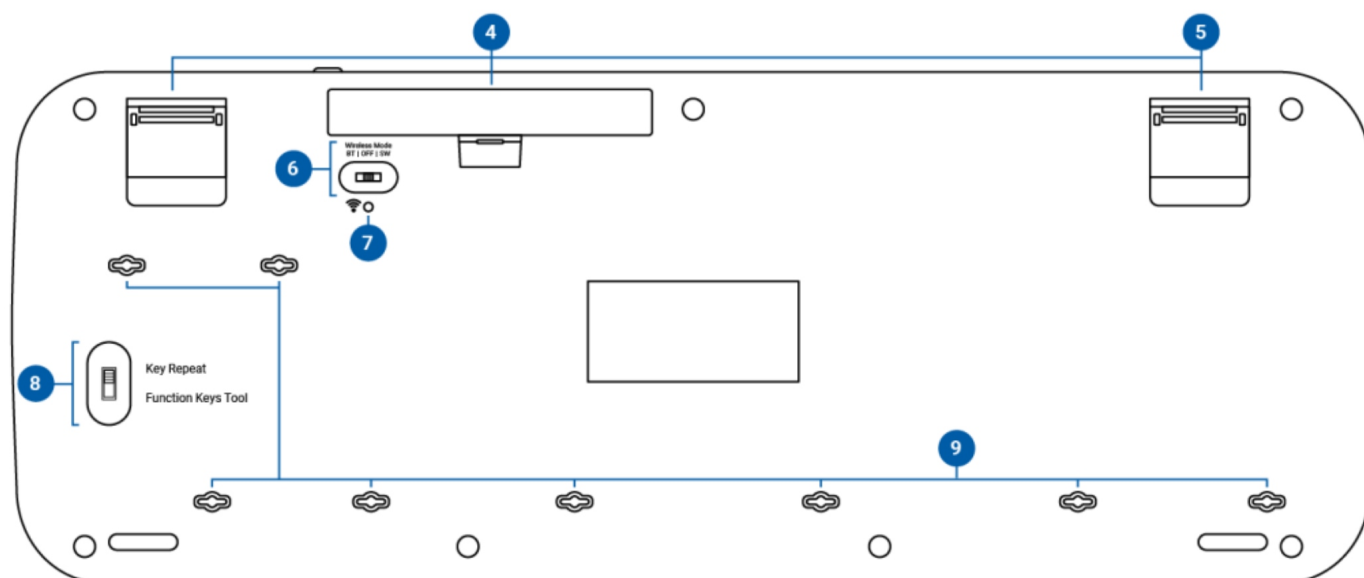

2. Technische Daten

Tastaturtyp:	Mechanische Tastatur
Schaltertyp:	ALPS-Schalter
Abmessungen Tastatur:	18.7 x 7.0 x 1.1 inches (475 x 178 x 29 mm)
Abmessungen Verpackung:	20.4 x 8.1 x 2.0 inches (517 x 206 x 50 mm)
Gewicht:	3.3 lbs (1,5 kg)
Tastenkappengröße:	0.79 x 0.79 inches (20 x 20 mm)


Tastenzahl:	67 Tasten
Verbindungen:	Kabelgebunden und drahtlos: • Kabelgebunden: USB-C • Drahtlos: Bluetooth® 5.3
Drahtlose Reichweite:	bis 10 m
USB-Leistung/Strom:	typ. 20–35 mA; max. 100 mA
USB-Klasse:	Standard USB HID; keine Treiber erforderlich
Betriebsbedingungen:	Temperatur 32 bis 113°F (0 bis 45°C); relative Luftfeuchtigkeit 20 bis 90 % r. F. (nicht kondensierend); atmosphärischer Druck 86 bis 106 kPa
Lagerbedingungen:	Temperatur -4 bis 140°F (-20 bis 60°C); relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 95 % r. F. (nicht kondensierend)
Transportbedingungen:	Temperatur -4 bis 140°F (-20 bis 60°C); relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 95 % r. F. (nicht kondensierend)
Batterien:	2× AA (nicht enthalten) Alkaline empfohlen
OS-Kompatibilität:	Windows®, macOS®, Linux®, ChromeOS®, iOS® und Android®
Werksgarantie:	2 Jahre bei normaler Nutzung
Lieferumfang:	• Clevy Tastatur • USB-C-auf-USB-A-Kabel 1,8 m • Karte mit QR-Code für Benutzerhandbuch & Sicherheitshinweise

3. Erste Schritte

Folgen Sie diesen Schritten, um Ihre Clevy Tastatur schnell und angenehm zu verbinden – kabelgebunden oder drahtlos.


3.1 Versorgung per USB (kabelgebunden)

Verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-auf-USB-A-Kabel für eine stabile Verbindung. Schließen Sie das USB-C-Ende an der Tastatur an.

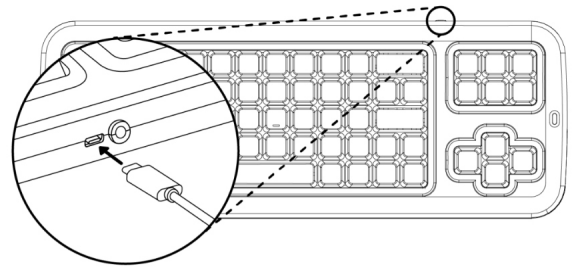


3.2 Versorgung per Batterien

Für den drahtlosen Betrieb kann die Tastatur mit 2× AA-Batterien (nicht enthalten) betrieben werden. Einsetzen im Batteriefach auf der Rückseite.

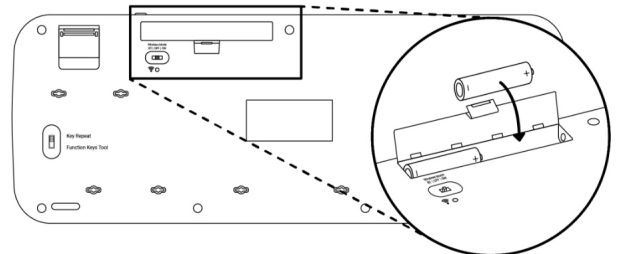

3.3 Aktivieren des drahtlosen Modus (Wireless Mode)

Stellen Sie den **Wireless Mode-Schalter** auf **BT** (Bluetooth), um die Funktion zu aktivieren. Stellen Sie den Wireless Mode auf **OFF**, um Funkverbindungen zu deaktivieren. Die Reihenfolge der Verbindungspräferenz finden Sie in Kapitel 4.

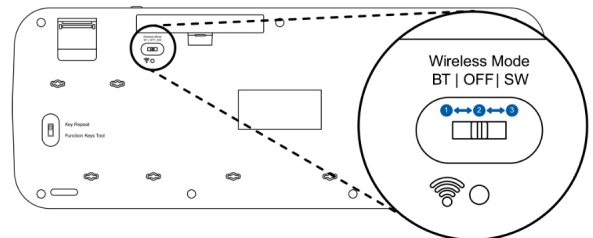


ANFORDERUNGEN AN DIE USB-VERSORGUNG

Das angeschlossene Gerät muss als USB-Host fungieren und ausreichend Strom bereitstellen. Besonders bei USB-C-Adaptern und Mobilgeräten ist darauf zu achten. In manchen Fällen ist ein aktiver USB-Hub oder ein USB-C-Adapter mit Power Delivery (PD) erforderlich.

3.4 Bluetooth koppeln

Wird keine frühere Funkverbindung erkannt und erlaubt der Wireless Mode dies, beginnt die rechte LED automatisch zu blinken: Die Tastatur ist im Kopplungsmodus.

Hinweis: Die Verbindungspräferenz finden Sie in Kapitel 4.

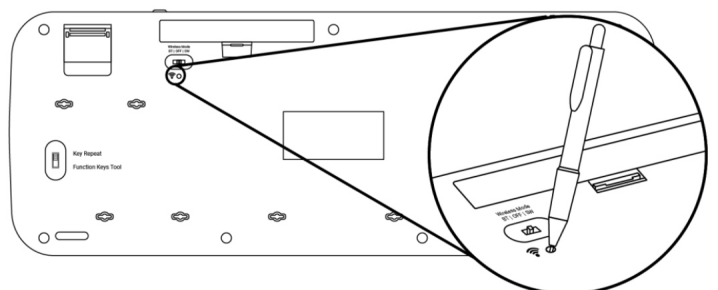

1. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen und suchen Sie nach Geräten.
2. Stellen Sie den Wireless Mode-Schalter auf der Rückseite der Clevy Tastatur auf **BT**. Der Kopplungsmodus startet automatisch.
– **ODER** –
Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden kurz die **Kopplungstaste** auf der Rückseite der Clevy Tastatur.
3. Der Kopplungsmodus ist aktiv, wenn die rechte LED fortlaufend **blau** blinkt. Der Modus bleibt 3 Minuten aktiv.
4. Das Gerät *Clevy KB3* erscheint auf Ihrem Bildschirm. Wählen Sie es aus und folgen Sie den Systemhinweisen.
5. Nach erfolgreicher Verbindung „atmet“ die rechte LED langsam **BLAU** – *alle 5 Sekunden*. Die Clevy Tastatur ist im Bluetooth-Modus einsatzbereit.

BATTERIEN ENTFERNEN Bei längerer Nichtnutzung beide AA-Batterien entnehmen, um Leckagen zu vermeiden.

BATTERIEHINWEIS Keine alten und neuen Batterien mischen; keine unterschiedlichen Typen/Marken kombinieren. Auf Polarität achten. Keine beschädigten oder auslaufenden Batterien verwenden.

4. Verbindungspräferenz


So wählt die Tastatur automatisch die beste Verbindung – abhängig von Situation und Stellung des Wireless Mode-Schalters.

4.1 Vorrang für USB-C

Ist das USB-C-Kabel angeschlossen, hat die Kabelverbindung Vorrang (außer während des Kopplungsmodus).

4.2 Vorrang für Funk ohne Kabel

Ohne Kabel verbindet die Tastatur automatisch mit der zuletzt genutzten Bluetooth-Verbindung – abhängig vom Wireless Mode-Schalter.

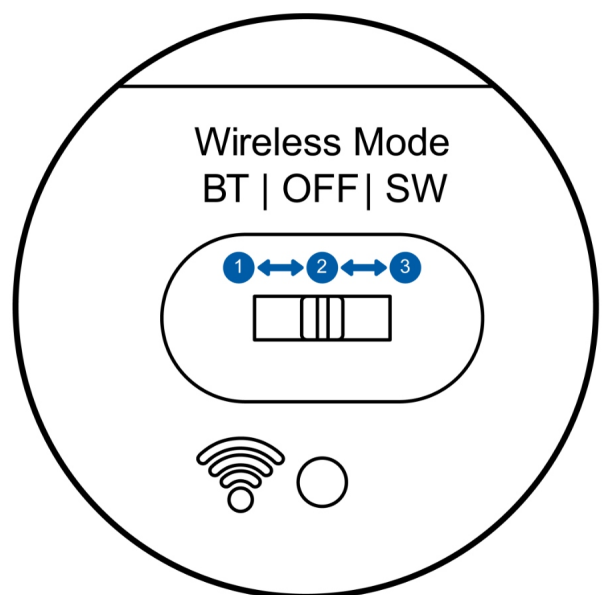

4.3 Wireless Mode – Stellungen

BT Bluetooth	Bevorzugt Bluetooth-Verbindungen.
OFF	Deaktiviert Funk; Tastatur nur per USB aktiv.

5. Tastenkombinationen


5.1 Multimedia

Kombination	Aktion	Windows	macOS	iOS
ALTGR + PAGE UP	Lauter	✓	✓	
ALTGR + PAGE DOWN	Leiser	✓	✓	
ALTGR + BACKSPACE	Stumm	✓	✓	
ALTGR + INSERT	Play/Pause	✓	✓	
ALTGR + HOME	Stopp	✓		
ALTGR + DELETE	Vorheriger Titel/Video	✓	✓	
ALTGR + END	Nächster Titel/Video	✓	✓	

5.2 Funktionen

Kombination	Aktion	Windows	macOS	iOS
ALT + ALTGR + P	Vollbild aufnehmen (Print Screen) (siehe 6.1)	✓		
ALTGR + F 2 s	Function Keys Modus an/aus (siehe 6.2 und 6.3)	✓	✓	✓
CAPS LOCK + ALTGR 3 s	Windows-Taste aus/an (siehe 6.4)	✓	✓	✓
CTRL + SHIFT 5 s	Sticky Keys an/aus (siehe 6.5)	✓	✓	✓
CTRL + ALTGR 5 s	Eingabeanzeige an/aus (siehe 6.6)	✓	✓	✓
ALTGR + ↑	LED-Helligkeit erhöhen (siehe 6.7)	✓	✓	✓
ALTGR + ↓	LED-Helligkeit verringern (siehe 6.7)	✓	✓	✓
CTRL + ALT + I	Zum iPad-Modus wechseln (siehe 6.8)	✓		
CTRL + ALT + C	Zurück zum Computermodus (siehe 6.8)	✓	✓	
ALT + ALTGR + Q* 5 s	ABCDE-Layout an/aus (siehe 6.9)	✓	✓	✓
ALT + ALTGR + R	BT/SW/Einstellungen zurücksetzen (siehe 6.10)	✓	✓	✓

* **HINWEIS** Die ABCDE-Kombination verwendet stets dieselbe physische Position – die Taste direkt rechts neben Tab – unabhängig von der Beschriftung. Nicht für kyrillische Layouts verfügbar.

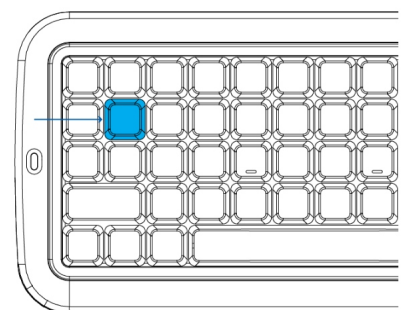

6. Funktionen

Ihre Clevy Tastatur steckt voller Funktionen, die Tippen leichter und angenehmer machen.

6.1 Print Screen (Bildschirmfoto)

Die Tastatur verfügt über eine Funktion, die ein Screenshot des aktuellen Bildschirms aufnimmt.

Nützlich auf Systemen ohne separate Print-Screen- Taste.


ALT + ALTGR + P	Vollbild aufnehmen (Print Screen)
------------------------	-----------------------------------

Windows: Kopiert den aktuellen Bildschirm in die Zwischenablage.

macOS: Entspricht **SHIFT + COMMAND + 3** – Ablage auf dem Schreibtisch.

6.2 Key Repeat / Function Keys Tool – Schalter

Links auf der Rückseite befindet sich der Schalter für **Key Repeat / Function Keys Tool** (*Wiederholung / Funktionstasten-Werkzeug*). Hier wählen Sie zwischen **Normal** und **Assistive Technology**.

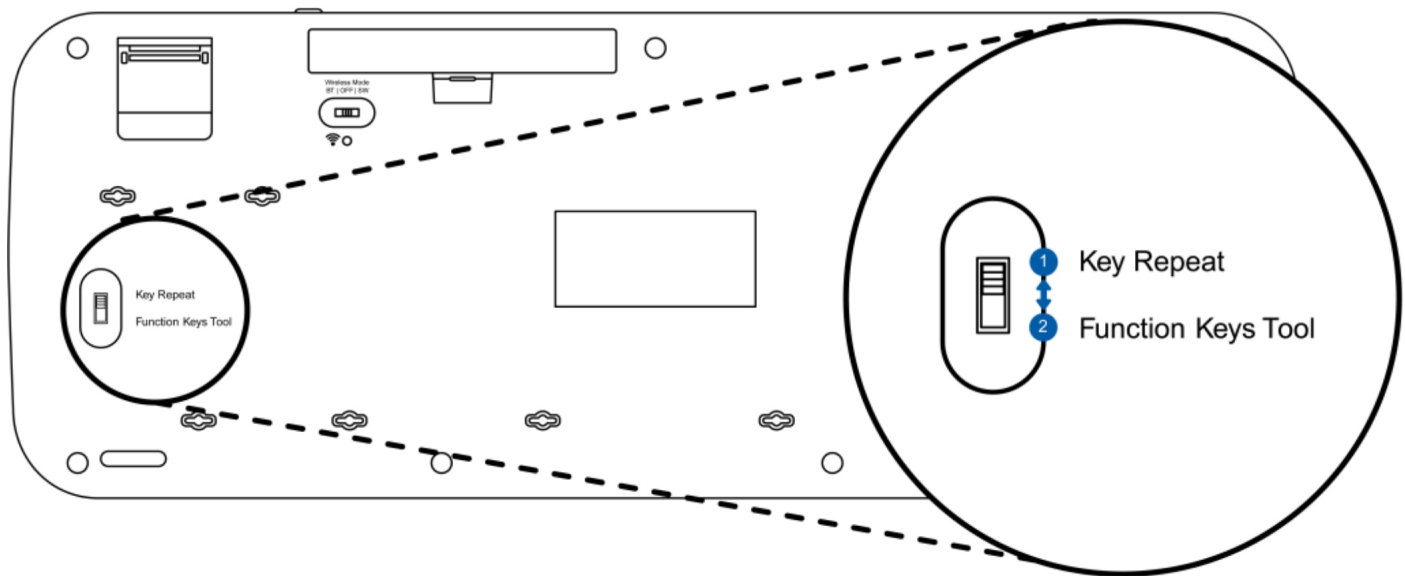

1. Normal



Key Repeat ON / Function Keys Tool OFF

- Schalter nach oben.
- Zeichen wiederholt sich beim Gedrückthalten.
- Standardverhalten für die meisten Nutzerinnen/Nutzer.

2. Assistive Technology

Key Repeat OFF / Function Keys Tool ON


- Schalter nach unten.
- Verhindert unbeabsichtigte Wiederholungen beim Halten.
- Ermöglicht Funktionstasten (F1–F12) über die **F**-Taste plus Zahl/Zeichen.

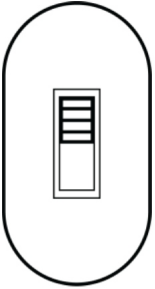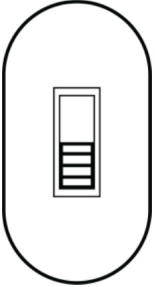	Key Repeat ON Function Keys Tool OFF	Normal: Standardtippen mit Wiederholung.
	Key Repeat OFF Function Keys Tool ON	Assistive Technology: keine Wiederholung, schneller Zugriff auf F-Tasten.

Hinweis – macOS und iOS In macOS und iOS ist Key Repeat oft standardmäßig deaktiviert. Aktivieren Sie dies bei Bedarf in den Einstellungen. Diese OS-Einstellung beeinflusst das Function Keys Tool auf der Tastatur nicht.

Bei aktiver **Assistive Technology** (Function Keys Tool ON):

F + 1 = F1	F + 2 = F2	F + 3 = F3	F + 4 = F4	F + 5 = F5	F + 6 = F6
F + 7 = F7	F + 8 = F8	F + 9 = F9	F + 0 = F10	F + [= F11	F +] = F12

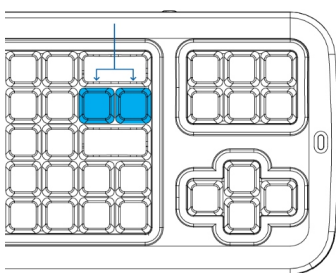

HINWEIS: Diese Kombinationen basieren auf dem US-International-Layout. In anderen Layouts können F11/F12 an anderen Positionen liegen; häufig sind es die beiden Tasten direkt unter Backspace.

6.3 Function Keys Modus ohne Schalter

Vorübergehend aktivieren mit **ALTGR + F (2 s)**. Drücken Sie dann 1–0, [oder] für F1–F12. Nach Nutzung schaltet der Modus automatisch aus. So bleibt Key Repeat aktiv.

6.4 Windows-Taste deaktivieren

ALTGR + CAPS LOCK (3 s)	Windows-Taste aus/an
--------------------------------	----------------------

Hinweis: Unter macOS wirkt die Windows-Taste als Command (⌘). Das Deaktivieren betrifft daher auch Command-Kombinationen.

6.5 Sticky Keys

Erleichtert Tastenkombinationen, wenn gleichzeitiges Drücken schwierig ist.

Halten Sie **CTRL + SHIFT (5 s)**, um die Sticky Keys zu aktivieren. Machen Sie anschließend eine Taste sticky, indem Sie sie 2 s gedrückt halten:

ALT / ALTGR / CTRL / SHIFT / WIN/MAC / F

Zum Deaktivieren dieselbe Taste erneut drücken. Mehrere sticky Tasten gleichzeitig möglich.

Beispiele: Ctrl sticky, dann Alt sticky und Delete → Ctrl+Alt+Delete. Oder Alt sticky, F sticky und 4 → Alt+F4.

6.6 Eingabeanzeige

CTRL + ALTGR (5 s)

An/Aus

Bei jeder Tastenbetätigung leuchtet die rechte LED kurz orange für direkte Rückmeldung.

6.7 LED-Helligkeit anpassen

Sie können die Helligkeit der Indikator-LEDs anpassen. Am deutlichsten sehen Sie die Änderung, während Caps Lock aktiv ist: Die linke LED leuchtet dann konstant orange.

Besonders hilfreich bei eingeschränktem Sehvermögen: Heller für bessere Sichtbarkeit, dunkler wenn das Licht zu intensiv oder ablenkend ist.

Unterschiede je nach Verbindung:

- Im **USB-Modus** ist die rechte LED dauerhaft an – Helligkeitsänderungen sind gut sichtbar.
- Im **Bluetooth-Modus** „atmet“ die rechte LED sanft blau – Änderungen fallen weniger auf.

Drücken Sie **ALTGR + ARROW UP ↑**, um die LED-Helligkeit zu erhöhen, oder **ALTGR + ARROW DOWN ↓**, um sie zu verringern. Helligkeitsstufen:

Stufe 1	Aus
Stufe 2	25%
Stufe 3	50%
Stufe 4	75%
Stufe 5	100%

Tipp: Passen Sie die Helligkeit am besten im USB-Betrieb an, um die deutlichste visuelle Rückmeldung zu erhalten.

6.8 iPad-Modus

Ihre Clevy Tastatur kann zwischen **Computermodus (Standard)** und **iPad-Modus** wechseln. Alles geschieht in der Tastatur – keine Softwareinstallation nötig. Die Verfügbarkeit von Funktionen kann von iPadOS und VoiceOver-QuickNav abhängen.

CTRL + ALT + I (3 s)	Zum iPad-Modus wechseln
CTRL + ALT + C (3 s)	Zurück zum Computermodus

Im iPad-Modus:

ARROW UP ↑ + ARROW DOWN ↓	Wirkt als ENTER/AUSWÄHLEN und öffnet das markierte Element. Eine kurze Verzögerung zwischen ↑ und ↓ sorgt dafür, dass sie nicht exakt gleichzeitig gedrückt werden müssen.
ARROW LEFT ←	Navigiert nach links durch Apps, Schaltflächen oder Text.
ARROW RIGHT →	Navigiert nach rechts durch Apps, Schaltflächen oder Text.
HOME	Wirkt als iPad-Home-Taste.
ALTGR (in Textfeldern)	Schaltet QuickNav für Apple VoiceOver ein/aus und wechselt zwischen Element- bzw. Zeichen-Navigation.

6.9 ABCDE-Layout

Wechsel zu einem alphabetischen (ABCDE) Layout. Möchten Sie die physische Beschriftung anpassen, tauschen Sie die Tastenkappen.

ALT + ALTGR + Q (5 s)	ABCDE-Layout an/aus
------------------------------	---------------------


Die Tastenkombination verwendet stets dieselbe physische Position (direkt rechts neben Tab), unabhängig von der Beschriftung. Nicht für kyrillische Layouts verfügbar.

6.10 Werksreset

Setzen Sie alle Einstellungen mit **ALT + ALTGR + R** zurück. Beide LEDs leuchten in Regenbogenfarben auf als Bestätigung. Nach einem Reset müssen Bluetooth neu gekoppelt werden; auch weitere Präferenzen kehren zu Standard zurück.

7. LED-Verhalten

Die beiden RGB-LEDs informieren Sie über Status und Verbindung.

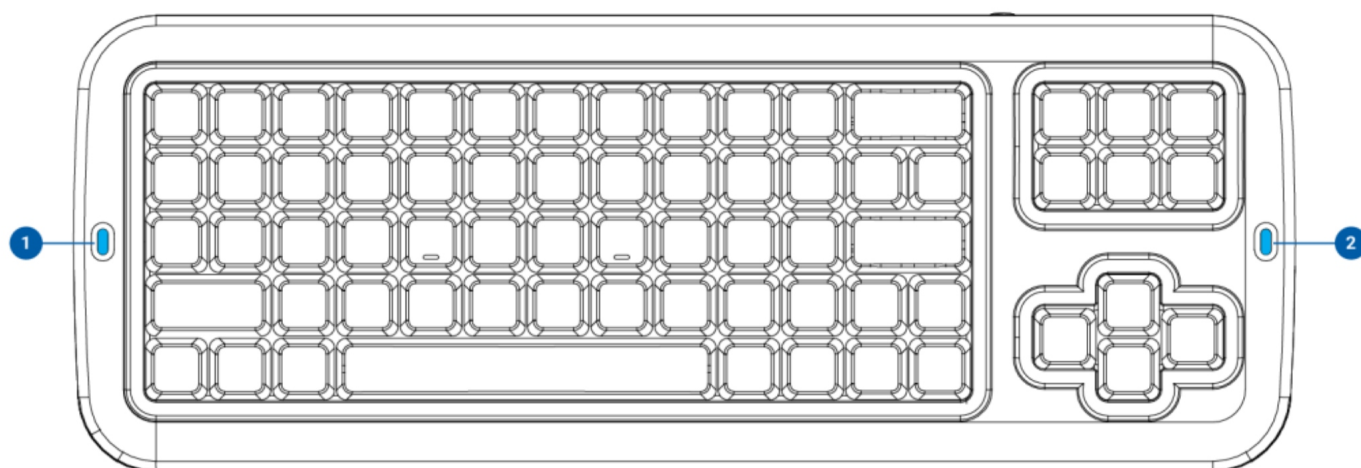

1. Linke RGB-LED

2. Rechte RGB-LED

7.1 Linke LED – Rückmeldung

Modus / Status	Verhalten linke LED
Feststelltaste	Leuchtet konstant ORANGE
Windows-Taste umschalten (AN)	Blinkt 3× GRÜN
Windows-Taste umschalten (AUS)	Blinkt 3× ROT
ABCDE aktiv	Blinkt 5× BLAU
Standardlayout	Blinkt 5× WEISS
Function Keys Modus (aktiv)	Leuchtet konstant GRÜN
Sticky Keys an/aus	Blinkt 3× WEISS
Sticky (ALT/ALTGR/CTRL/SHIFT/WIN/MAC)	Dauerblinken GRÜN

7.2 Rechte LED – Rückmeldung

Status	Beschreibung	Verhalten rechte LED
Bluetooth	Verbindung per Bluetooth	„Atmet“ langsam BLAU – alle 5 Sekunden
USB	Kabelverbindung aktiv	Leuchtet konstant WEISS
Niedrige Batterie	Batterie fast leer	Blinkt 2× ROT – alle 3 Sekunden
Eingabeanzeige	Visuelle Rückmeldung bei Tastenbetätigung	Leuchtet ORANGE bei Betätigung

8. Reinigung

Schutzart: nicht wasserdicht; keine IP-Klassifizierung.

Bei Flüssigkeitseintritt

- USB trennen und den Wireless Mode auf **OFF** stellen.
- Beide AA-Batterien entnehmen.
- Flüssigkeit über die Ablauföffnungen ablaufen lassen. Nicht schütteln oder drehen.
- 24–48 Stunden an der Luft trocknen lassen (keine Wärmequellen).
- Vor der Wiederinbetriebnahme auf Rückstände/Korrosion prüfen.

Regelmäßige Reinigung

1. Alle Stromquellen trennen (USB und AA-Batterien).
2. Bei Funkbetrieb: Wireless Mode auf **OFF** stellen.
3. Tastatur vorsichtig kippen, damit Staub und Krümel herausfallen.

Mit einem weichen, fusselfreien Tuch leicht mit Wasser anfeuchten. Zur Desinfektion 70–90% Isopropylalkohol verwenden. Aggressive Lösungsmittel vermeiden. Vor dem Wiederanschluss vollständig trocknen lassen.

9. Wiederverwendung

Vor Wiederverwendung oder Weitergabe gründlich reinigen und desinfizieren. Nicht wiederverwenden bei sichtbarer Beschädigung, Korrosion oder Zubehör, das nicht ausreichend zu desinfizieren ist.

10. Fehlerbehebung

1. **Verbindung** – Stellung des Wireless Mode-Schalters prüfen und Kopplung kontrollieren.
2. **Versorgung** – Batterien bzw. USB-Kabel und Hostleistung prüfen.
3. **Tasten** – Schmutz entfernen und erneut testen.
4. **Schalter** – Zwischen *Normal* und *Assistive Technology* wechseln und testen.
5. **Reset** – **ALT + ALTGR + R (3 s)** stellt alle Einstellungen auf Werk zurück.

Weitere Hilfe: www.clevy.com/faq – E-Mail: info@altproducts.com

11. Mit Blick auf den Planeten

Verpackungen und Druckeisen aus verantwortungsvoll bezogenem, FSC-zertifiziertem Papier.

verpackungen und Drucksachen aus verantwortungsvoll bezogenem, FSC-zertifiziertem Papier. Statt eines gedruckten Hefts liegt eine Karte mit QR-Code bei – so sind Informationen stets aktuell und es fällt weniger Abfall an.



Recycle for a Clever Future



Verpackung (FSC® Karton): flach machen und dem Altpapier zuführen.

Kunststofffenster (PET): entfernen und dem Kunststoffrecycling zuführen (lokale Vorgaben beachten).

Tastatur: Enthält Elektronik. Abgabe an einer autorisierten Sammelstelle für Elektroaltgeräte (**WEEE / ElektroG** in Deutschland; **eRecycling** in der Schweiz, z. B. **SWICO/SENS** Sammelstellen).

Marken

- Windows® ist eine Marke der Microsoft Corporation.
- macOS® und iOS® sind Marken der Apple Inc.
- Linux® ist eine Marke von Linus Torvalds.
- Bluetooth® ist eine Marke der Bluetooth SIG, Inc.
- Android® und ChromeOS® sind Marken von Google LLC.